


H2 Kopfhaut- und Nackenmassagegerät

Bedienungsanleitung



Mini-Größe

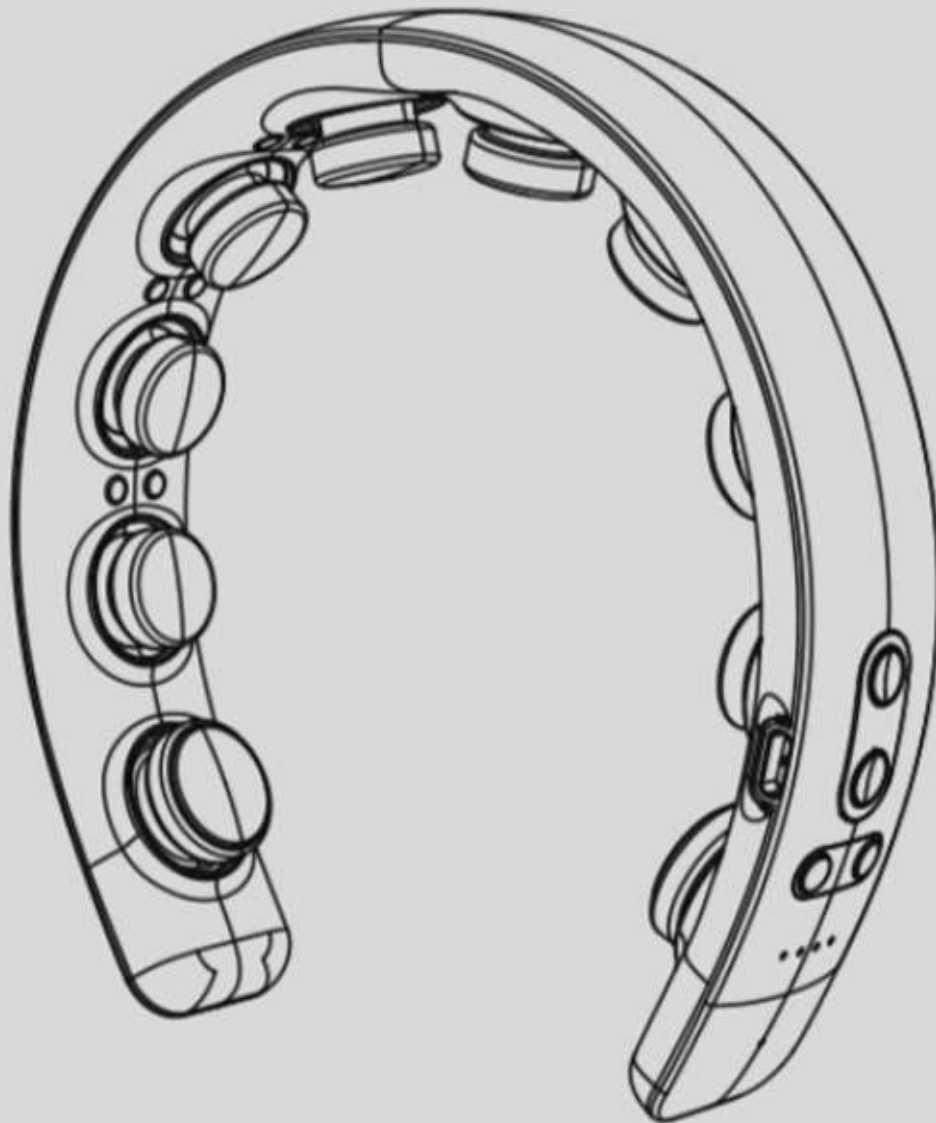

Vibrationsmassage



Phototherapie



Heiße Kompresse

Die Bilder dienen nur als Referenz und das tatsächliche Produkt ist maßgebend.

Lieber Kunde,


Vielen Dank für den Kauf des H2 Kopfhaut- und Nackenmassagegeräts! Das H2 Kopfhaut- und Nackenmassagegerät ist ein kleines und leichtes Massagegerät in Haarbandform. Durch seine Flexibilität und Elastizität passt sich das Produkt wie ein Stirnband an die Kopfkontur an. Dieses leichte, modische Massagegerät verfügt über intelligente Massage-, Heißkompressen- und LED-Phototherapie-Wartungsfunktionen.

Ausgestattet mit 10 unabhängigen Vibrationsmassageköpfen verfügt jeder Massagekopf über die Fähigkeit zur elastischen Ausdehnung und Kontraktion und ist für verschiedene Kopfformen, Hälsen und Beine geeignet.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung.

(Hinweis: Hi5 behält sich das Recht auf Designänderungen und endgültige Produktinterpretationen vor. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten, Produktfarbe und Aussehen haben in der Art Vorrang.)

Produktstruktur

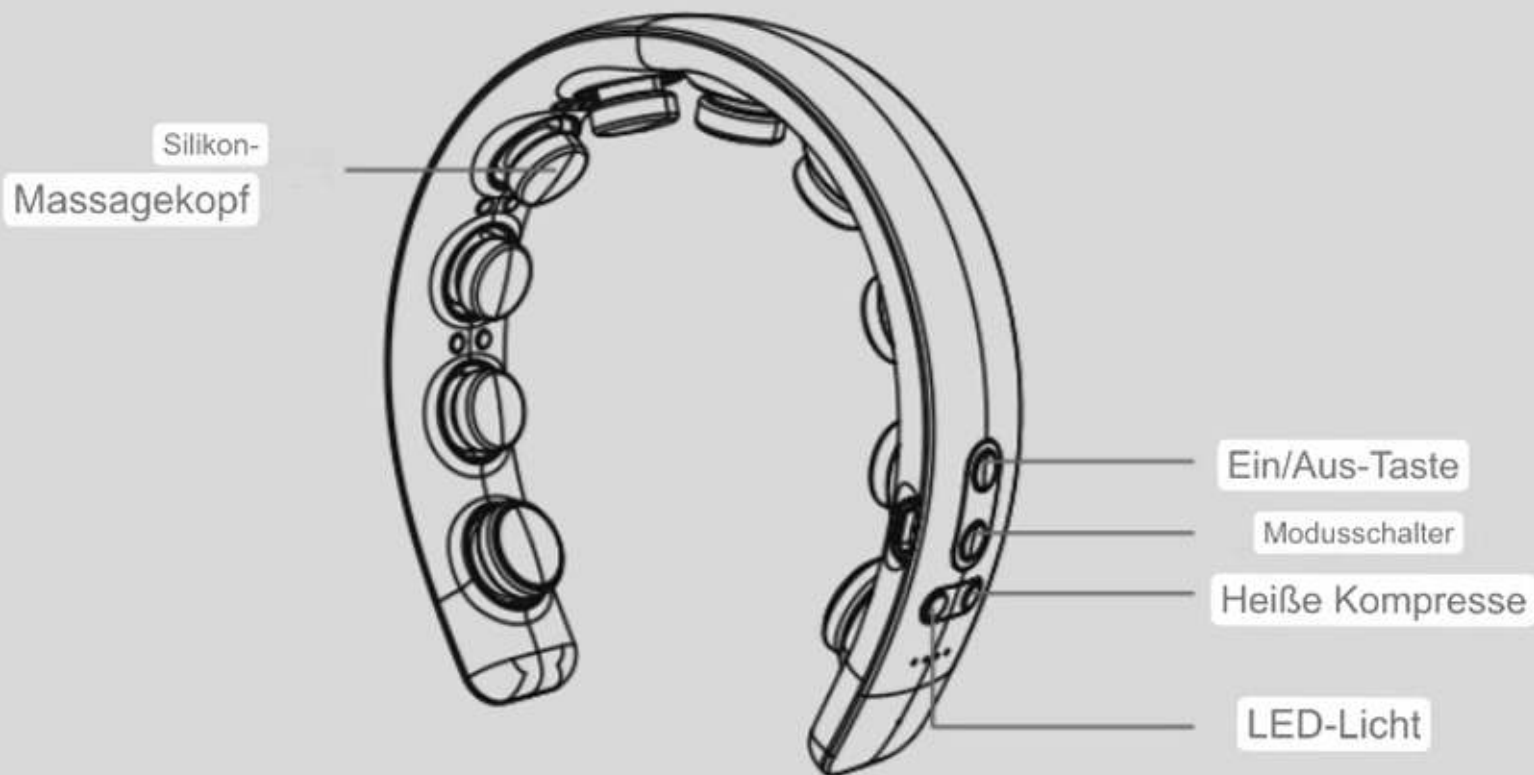

Produktparameter

Produktname: H2 Kopfhaut- und Nackenmassagegerät

Modell: H2

Nennleistung: 6,5 W

Nennladespannung: 5 V

Batteriekapazität: 600 mAh

Automatisches Timing: 15 Minuten

Heiztemperatur: 40°C-42°C-45°C

Shanghai Sintang Industrial Co., Ltd.

Executive-Standard: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

*Hinweis: Dieses Produkt ist kein Ersatz für ein medizinisches Gerät.

Produktmerkmale

- 10 unabhängige Vibrationsmassagepunkte
- 5 Vibrationsmodi:
 - Wachmodus,
 - Beruhigungsmodus,
 - Schlafmodus,
 - Aktiver Modus,
 - Nackenmassagemodus
- Einstellung von drei Intensitätsstufen
- 3 einstellbare Heißkompressen: -40° niedrige Hitze
 - 42° mittlere Hitze
 - 45° hohe Hitze
- LED-Phototherapie: -Rotes Licht für die Haarpflege
 - Blaues Licht zur Ölkontrolle
- Automatischer Timer: 15 Minuten

Produktmerkmale

Trageweise (siehe Bild)



Mitte des Kopfes



Nacken



Stirn



Oberschenkel



Hinterkopf



Oberseite des Kopfes

Gebrauchsanweisung

Betriebsstatus:

- Tragen: Legen Sie das Produkt an und stellen Sie eine bequeme Position ein.
- Einschalten: Drücken Sie die Taste [Ein/Aus] 1,5 Sekunden lang, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Der Standardvibrationsmodus ist der Wachmodus mit der 2. Intensitätsstufe, geringer Wärmekompression und rotem Licht.

Gebrauchsanweisung

- Modusanpassung: Drücken Sie die Taste [Ein/Aus], um den Weckmodus umzuschalten. Wechseln Sie zwischen den Modi „Wach“, „Beruhigend“, „Schlaf“, „Aktiv“ und „Nackentherapie“.
 - Anpassung der Intensitätsstufe: Drücken Sie die Taste [Intensitätsstufe], um die Intensitätsstufe anzupassen. Durchlaufen Sie die 3. Ebene – Vibration aus – 1. Ebene – 2. Ebene.
 - Anpassung des Modus „Heiße Komresse“: Drücken Sie die Taste [Heiße Komresse], um die Temperatur der heißen Komresse zu ändern. Wechseln Sie zwischen 42° mittlerer Temperatur – 45° hoher Temperatur – heißer Komresse aus – 40° niedriger Temperatur Temperatur. •
- Beleuchtung: Drücken Sie kurz die Taste [LED-Licht], um die Lichtfarbe zu wechseln, und wechseln Sie zwischen blauem, abwechselnd zweifarbigem, Licht aus und rotem Licht.
- Herunterfahren: Drücken Sie die [Ein/Aus]-Taste 1,5 Sekunden lang, um das Gerät herunterzufahren, wenn es funktioniert.
 - Laden: Bitte verwenden Sie den 5V-1A- oder 5V-2A-Ladepf und den Originalen Typ-C-Ladepf zum Laden.

Gebrauchsanweisung

Leistungsanzeige während des Gebrauchs:

Wenn das H2-Massagegerät eingeschaltet ist, zeigt die Betriebsanzeige die aktuell verbleibende Leistung an.

1. Wenn die Leistung weniger als 5 % beträgt, blinkt die erste Lichtperle 2 Sekunden lang und erlischt dann;
2. Wenn die Leistung 6 % bis 24 % beträgt, blinkt die erste Lichtperle 2 Sekunden lang und schaltet sich dann aus;
3. Wenn die Leistung 25–49 % beträgt, blinken die 1. und 2. Lichtperlen 2 Sekunden lang und schalten sich dann aus;
4. Wenn die Leistung 50 % bis 74 % beträgt, blinken die 1., 2. und 3. Lichtperlen 2 Sekunden lang und schalten sich dann aus;
5. Wenn die Leistung 75 % bis 100 % beträgt, blinken die 1., 2., 3. und 4. Lichtperlen 2 Sekunden lang und erlöschen dann.

Leistungsanzeige während des Ladevorgangs:

Wenn das H2-Massagegerät aufgeladen wird, zeigt die Betriebsanzeige die aktuell verbleibende Leistung an.

1. Wenn die Leistung 0 % bis 24 % beträgt, blinkt die erste Lichtperle;
2. Wenn die Leistung 25 % bis 49 % beträgt, ist die erste Lichtperle eingeschaltet und die zweite Lichtperle blinkt;
3. Wenn die Leistung 50 % bis 74 % beträgt, leuchten die 1. und 2. Lichtperle und die 3. Lichtperle blinkt;
4. Wenn die Leistung 75 % bis 99 % beträgt, leuchten die 1., 2. und 3. Lichtperle und die 4. Lichtperle blinkt;
5. Wenn die Leistung 100 % beträgt, leuchten die 1., 2., 3. und 4. Lichtperlen.

Haftungsausschluss

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

a) Verbot

1. Patienten mit Kopferkrankungen und -verletzungen ist die Nutzung untersagt;
2. Patienten mit Osteoporose und Wirbelfrakturen ist die Nutzung untersagt;
3. Patienten mit durch Diabetes verursachtem Bluthochdruck ist die Anwendung untersagt;
4. Patienten mit Epilepsie in der Vorgeschichte ist die Verwendung untersagt.
5. Patienten mit mittelschweren und schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen und schweren Herzerkrankungen ist die Nutzung untersagt;
6. Patienten mit Störungen der Kopfhaut oder abnormaler Kopfhaut ist die Verwendung untersagt.
7. Patienten, die sich einer Kraniotomie am Kopf unterzogen haben und ein intrakranielles Hämangiom haben, ist die Verwendung untersagt;
8. Patienten in der Rehabilitationsphase nach einer Kopfoperation ist die Nutzung untersagt;
9. Schwangeren Frauen ist die Nutzung untersagt;
10. Patienten im Rehabilitationsstadium nach einer Operation oder Patienten, die sich noch nicht vollständig erholt haben, ist die Nutzung untersagt;
11. Patienten, die sich in Behandlung befinden und sich körperlich abnormal fühlen, ist die Nutzung untersagt;
12. Patienten mit Bluthochdruck, Arteriosklerose oder Hirnthrombose ist die Nutzung untersagt;
13. Patienten mit hohem Fieber und bösartigen Tumoren ist die Anwendung untersagt;
14. Personal sowie Kleinkindern und Kindern, die nicht für sich selbst sorgen können, ist die Nutzung untersagt.

Haftungsausschluss

b) Anweisungen zur sicheren Verwendung

1. Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.
2. Schalten Sie das Produkt zu Ihrer eigenen Sicherheit vor dem Schlafengehen aus.
3. Von Feuerquellen, ätzenden Flüssigkeiten und verschiedenen widrigen Umgebungen fernhalten;
4. Waschen Sie das Produkt nicht. Wenn das Produkt nass ist, muss es vor der Verwendung vollständig getrocknet werden;
5. Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch ab oder reinigen Sie sie mit einem neutralen Reinigungsmittel und lassen Sie sie auf natürliche Weise trocknen.
6. Benutzen Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs;
7. Tragen Sie während des Gebrauchs keine Kontaktlinsen, Haarspangen, Accessoires usw.;
8. Dieses Produkt enthält eine Lithiumbatterie. Um Gefahren zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht selbst zusammenbauen, demontieren, modifizieren, reparieren oder ins Feuer werfen.
9. Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen längeren Zeitraum ununterbrochen. Andernfalls kann es zu Müdigkeit und Unwohlsein kommen;
10. Werfen Sie das Produkt nicht ins Wasser und stellen Sie es nicht in einen Hochtemperatur- oder Hochtemperaturofen feuchte Umgebung wie Balkon oder Badezimmer;
11. Sollten durch Reizungen während der Anwendung Beschwerden auftreten, brechen Sie sofort ab;
12. Dieses Massagegerät ist als elektronisches Gesundheitsprodukt für den Heimgebrauch konzipiert und dient nicht der Diagnose, Therapie oder anderen kommerziellen Zwecken.

Haftungsausschluss

c) Serviceumgebung

1. Stellen Sie das Produkt nicht ins Badezimmer und verwenden Sie es nicht in einer feuchten Umgebung.
2. Stellen Sie das Produkt nicht auf Elektroheizungen, Öfen oder an Orte, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
3. Benutzen Sie es nicht während eines Blitzeinschlags.

d) Netzstecker und Kabel

1. Verwenden Sie zum Laden keine andere Stromquelle als die Nennspannung und verwenden Sie bitte das Original-Netzkabel des Produkts, um Brände oder Schäden am Produkt zu vermeiden.
2. Halten Sie beim Herausziehen des Netzkabels den Stecker des Netzkabels und nicht das Netzkabel fest;
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ersetzen Sie das nicht qualifizierte Kabel nicht selbst, um Gefahren zu vermeiden.

Garantie

Innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum bieten wir kostenlose Reparaturen, Ersatz oder notwendige Teile für Produktausfälle an, die nicht auf menschliche Faktoren zurückzuführen sind. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind:

a) Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, falsche Handhabung oder Versand verursacht wurden;

b) Eigenmächtige Reparaturen;

c) Störungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden;

d) Schäden, die den Produktwert übersteigen;

e) Schäden, die durch unsachgemäße Lagerbedingungen verursacht wurden;

f) Es kann kein Nachweis des Kaufdatums vorgelegt werden.

Fehlerbehebung

Sollten bei der Verwendung dieses Produkts Probleme auftreten, beachten Sie bitte die folgenden Tipps. Wenn das Produkt eine Fehlfunktion aufweist oder nicht verwendet werden kann, ziehen Sie bitte das Netzkabel ab und kontaktieren Sie uns zur Inspektion und Reparatur.

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Das Produkt funktioniert nicht	1. Niedriger Batteriestand 2. Automatisches Herunterfahren	1. Aufladen 2. Starten Sie neu
Die Intensität wird schwächer	Niedriger Batteriestatus	Aufladen
Das Gerät kann nicht aufgeladen werden	1. Das USB-Kabel ist nicht richtig eingesteckt 2. Das USB-Kabel oder der Adapter ist beschädigt	1. Stecken Sie das Ladekabel wieder ein. 2. Ladekabel oder Ladegerät wechseln.
Die Batterieanzeige funktioniert nicht richtig	Stromkreisfehler	Wenden Sie sich für den Kundendienst an das Vertriebspersonal

- Hinweis: Benutzer dürfen dieses Produkt nicht selbst zerlegen oder reparieren. Wenn das Produkt durch Selbstzerlegung oder Reparatur beschädigt wird, erlischt die Produktgarantie und das Unternehmen ist nicht für die daraus resultierenden Folgen verantwortlich.