

M:CURO

Schnellstartanleitung

BHRL-09 ist ein optisches Haarentfernungsgerät, das speziell für den Heimgebrauch entwickelt wurde



Total Body Hair Removal



IPL-Hautverjüngung



Sicher und schmerzlos

Es verwendet IPL-Impulslicht,

um sichere Haarentfernungsbehandlungen anzubieten. Der Haarwachstumszyklus dauert 18 bis 24 Monate, daher sind mehrere Behandlungen erforderlich, um eine dauerhafte Haarentfernung zu erreichen.

Zyklusprogramm zur Haarentfernung:






Anfangsphase
Alle 2 Wochen verwenden



Zweite Phase
Alle 4 Wochen anwenden.



Letzte Phase
Für beste Ergebnisse bitte regelmäßig nach Bedarf anwenden.

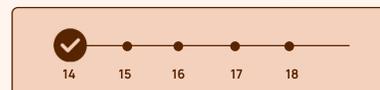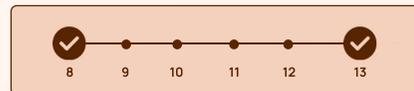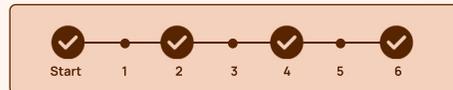

Schritte zur Verwendung



1 Die Oberflächenhaare rasieren und reinigen.



2 Den Netzstecker und das Kabel anschließen.



3 Schutzbrille tragen, um Blendung zu vermeiden.



4 Die geeignete Energiestufe einstellen.



5 Das Fenster vertikal platzieren und die Blitztaste drücken.



6 Nach der Haarentfernung Hautpflegeprodukte



⚠ Wählen Sie die passende Lichtintensität für Ihre Haut- und Haarfarbe aus und beginnen Sie mit der niedrigsten Stufe, um Ihre Toleranz allmählich aufzubauen.

⚠ Höhere Intensitäten können die Haarentfernungseffizienz verbessern, sollten jedoch je nach persönlichem Komfort angepasst werden.

⚠ Achten Sie darauf, dass der Lichtimpuls die Haut erwärmt, aber nicht schmerzhaft ist.

Schritte zur Verwendung						
<input checked="" type="checkbox"/>						
Schwarz	Dunkelbraun	Braun	Dunkelblond	Rot	Hellblond	Weiß Grau
Hautton						
<input checked="" type="checkbox"/>						
Weiß	Nory weiß	Cremerfarbe	HellBraun	Tiefbraun	Schwarz	