

# MICRO- DERMABRASION MACHINE

FINDE EIN BESSERES ICH



## INHALTSVERZEICHNIS

- 01/ PRODUKTEINFÜHRUNG
- 02/ ZUBEHÖRLISTE
- 03/ TIPPS OPTIONEN
- 04/ TASTENBESCHREIBUNG
- 05/ ÜBER DAS AUFLADEN
- 06/ VOR GEBRAUCH
- 07/ ANWENDUNG
- 08/ AUTOMODUS
- 09/ MANUELLER MODUS
- 10/ REINIGUNG UND WARTUNG
- 11/ FAQ

**Vorsichtsmaßnahme: Bitte vor  
Gebrauch sorgfältig lesen.**

Vermeiden Sie die Anwendung auf offenen Wunden oder Pusteln im Gesicht. Behalte die Tipps. Bewegen Sie sich sanft über die Haut und bleiben Sie nicht an derselben Stelle über einem zweite. NEWDERMO DIAMOND MICRODERMABRASION wurde entwickelt Für den persönlichen Gebrauch wird die gemeinsame Nutzung mit anderen nicht empfohlen. Empfohlen Häufigkeit der Anwendung: Einmal pro Woche, höchstens zweimal.

## PRODUKTEINFÜHRUNG

NEWDERMO DIAMOND MICRODERMABRASION durch den bestimmten Grad Unterdruck durch eine einstellbare Pumpe und leichte Reibung dazwischen die medizinischen Diamanten und die Haut, um die alternden geschädigten Zellen zu entfernen Haut. Gleichzeitig regt es die Hautwachstumsschicht zur Sauerstoffaufnahme an, fördern die Durchblutung und beschleunigen das Wachstum des Hautgewebes, fördern die Regeneration von Kollagen und Elastin mild und ohne Reizung. Verglichen mit der chemischen Methode ist diese rein physikalische und mechanische Methode zum Entfernen abgestorbener Zellen ist zarter und für empfindliche Haut geeignet. Das Peeling Prozess wird durch die Saugleistung und Saugspitzen kontrolliert, weniger Reizungen und frei von Hautverletzungen, Pigmentflecken oder Rötungen. Außerdem streuen Diamantpartikel nicht oder lassen Sie es sauber und sicher auf Ihrem Gesicht. Die regelmäßige Anwendung stimuliert und reinigt Ihre Haut, mildert Falten und hellt sie auf Haut, entfernen Sie die Aknenarben, verkleinern Sie die Poren, verbessern Sie die Durchlässigkeit der Poren und fördern Sie die Absorption der Essenz, bringen Sie Ihre Schönheit und Ihr Selbstvertrauen zurück. Bestehen Sie auf einmal pro Woche, Sie werden Ihren zufriedenen Hautzustand innerhalb von eins erreichen 60 Tage.

# KOMPONENTENLISTE



DIAMANT  
MIKRODERMABRASION X1



USB-Ladekabel X 1



Ladestation X 1



V-face massage tip x 1



Normale Diamantspitze x 1



Feine Diamantspitze x 1



Körperdiamantspitze x 1

CD»



Tragbare Tragetasche X1



O-förmiger  
Gummi  
Dichtungen



Reinigungsbürste X 1

Ersatzfilter X 30

## TIPP-OPTIONEN



Regulär

### REGULÄRE DIAMANTSPITZE:

Anwendung auf Wangen, Stirn, Kiefer, Nase, Nacken; Anzug für alle Hauttypen (einmal oder zweimal pro Woche).



Massage

### V GESICHTSMASSAGE-TIPP:

Anwendung auf Gesicht, Hals, Körper; Anzug für alle Hauttypen (kann jeden Tag verwendet werden nach dem Säubern).



Fine

### FEINE DIAMANTSPITZ

Verwenden Sie es um die Augen, Nase und empfindliche Haut (ein- bis zweimal pro Woche)




Körper

### KÖRPERDIAMANT-TIPP:

Anwendung an Armen und Beinen; Anzug für alle Typen der Haut (ein- bis zweimal pro Woche)

# TASTENBESCHREIBUNG

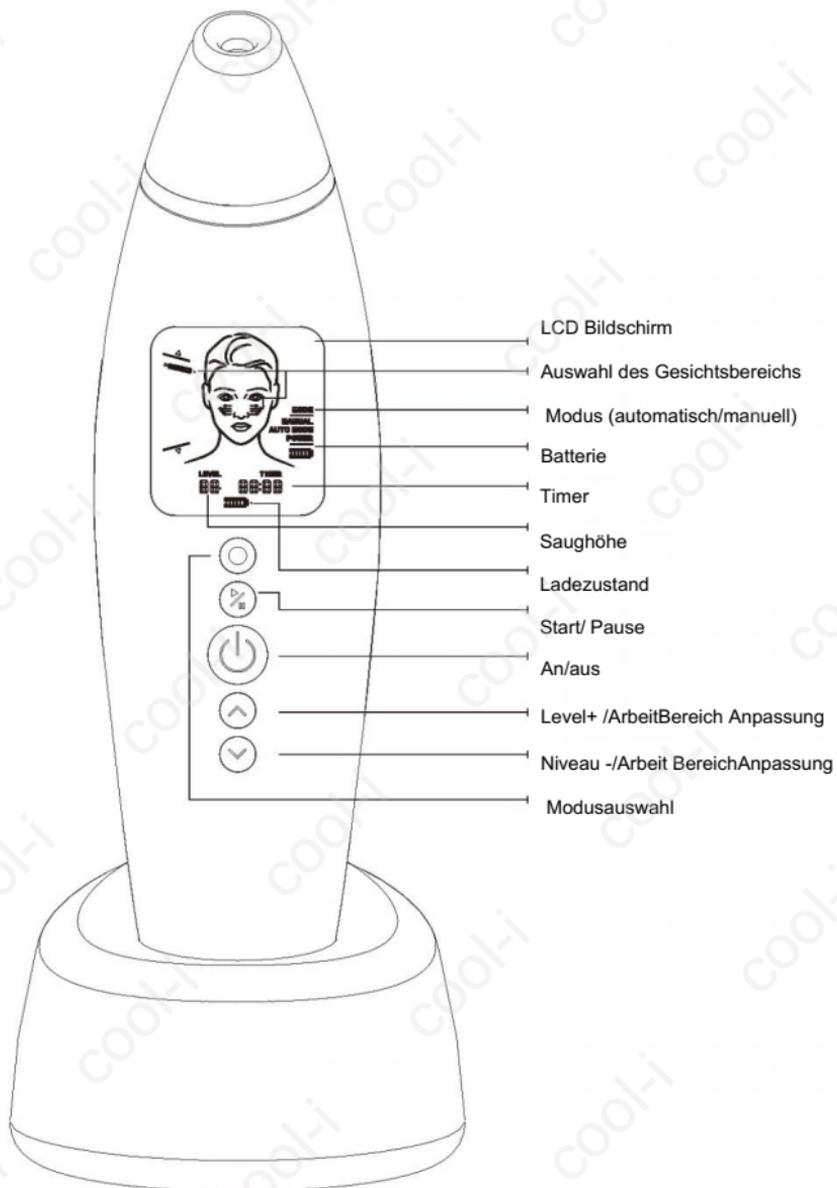

## AUFLADEN



### **Weg Option 1:**

Stellen Sie das MICRODERMABRASION auf Laden Basis durch Einpassen des Lochs auf der Unterseite des MICRODERMABRASION zum Stift im Inneren Ladestation, und stecken Sie das Kabel dann in eine Steckdose Auslauf.

### **Weg Option 2:**

Schließen Sie das Netzkabel direkt an der Unterseite an der MICRODERMABRASION, dann stecken Sie die Kabel in eine Steckdose.

Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden nach vollständiger Aufladung die MIKRODERMABRASION stoppt automatisch den Ladevorgang. Das LCD-Display zeigt den Ladestatus an als voll.

Wenn die Leistung niedriger als 3,55 M ist, wird die Batterie Symbol auf dem Bildschirm wird in Blinken umgewandelt Status. Gleichzeitig alarmiert das Gerät mit 2 piepst alle 30 Sekunden, aber es kann trotzdem funktionieren. Wann die Leistung ist niedriger als 3,3 V, die Maschine stoppt arbeiten und in den Standby-Modus wechseln, dann wird es automatisch ausschalten nach 10 Sekunden.

## VOR GEBRAUCH



1. Wir empfehlen, das Gerät nachts zu verwenden. Bei morgendlicher Anwendung Sonnencreme auftragen Creme zum Schutz der Haut nach der Anwendung.
2. Bitte reinigen Sie Ihr Gesicht, um Fett und Staub vor dem Gebrauch zu entfernen, und warten Sie dann und stellen Sie sicher, dass Ihr Gesicht vollständig trocken ist.
3. Testen Sie die Saugkraft der Maschine und die Reibungskraft der verschiedenen Spitzen auf Ihrem Arm zuerst, wählen Sie die am besten geeignete aus, verwenden Sie die minimale Saugkraft beim testen.

# WIE BENUTZT MAN

- 1** Drücken Sie zum Einschalten die Ein-/Aus-Taste. Sein LCD-Bildschirm leuchtet auf und in den Standby-Modus wechseln
- 2** Wählen Sie den Arbeitsmodus.  
AUTO MODE ist der automatische Modus, Details finden Sie unter 08/ AUTO MODE .Im MANUELLEN MODUS können Sie den Arbeitsbereich , die Intensität und die Dauer auswählen Ihrem Programm , Details siehe 09/ MANUELLER MODUS.
- 3** Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um mit der Arbeit zu beginnen. Vertikal und sanft.Drücken Sie die Spitzen dicht an die Haut und bewegen Sie sich entsprechend der angezeigten Spur auf dem LCD-Bildschirm bleiben Sie nicht an der gleichen Stelle. Für eine bessere Wirkung ein anderes Hand kann dabei helfen, die Haut gleichzeitig zu dehnen und zu straffen.
- 4** Passen Sie die Saugstärke an, indem Sie die Aufwärts-Taste \ oder die Abwärts-Taste gedrückt halten arbeiten, erhöht oder verringert jeder Druck die Saugstärke. Stufe 1 ist die minimale Saugleistung, Stufe 2 ist die mittlere und Stufe 3 die höchste.
- 5** Während der Verwendung können Sie es jederzeit stoppen, indem Sie die Start/Pause-Taste drücken.Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es 3 Minuten lang ohne Unterbrechung angehalten wird jede Operation.

# AUTO MODE

Dies ist unser empfohlener Modus, der gesamte Vorgang dauert 4 Minuten. Jeder Arbeitsbereich komplett mit zwei Pieptönen und in den nächsten Arbeitsbereich automatisch nach 3 Sekunden. Sie können die Aufwärts- (Taste) oder Abwärts- (Taste), um die Saugleistung bei laufender Maschine zu erhöhen oder zu verringern, die Saugänderungen ändern nicht das Timing und die Einstellung der Arbeit Bereich.

## 4 Minuten, wecken Sie Ihre Haut auf



Wangen

bewegen von innen nachdraußen , eine Minute



nasale Seite

von oben nach unten bewegendreißig Sekunden



Kinn

von oben nach unten bewegendreißig Sekunden



Stirn

Bewegen Sie sich von der Mitte in die Seiten, 30 Sekunden



Augenbereich

um die Augenpartiebewegen.Nicht auf dem Augenlid verwenden und bleibe außerhalb Augenumlaufbahn, dreißig Sekunden



Nacken

von oben nach unten bewegen,1 Minute

Wenn Sie einen Arbeitsbereich im AUTOMODUS überspringen möchten, folgen Sie bitte diese schritt wie folgt:

1. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um das Programm zu stoppen.
2. Drücken Sie  $\triangle$  \  $\nabla$  um den gewünschten Arbeitsbereich auszuwählen.
3. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um zu starten.

## MANUELLER MODUS



### MANUELLER MODUS

Der Timer berechnet die Zeit im MANUELLEN MODUS, die längste Zeit ist 1 Minute, Sie müssen die Arbeitszeit, die Saugstärke und den Arbeitsbereich ändern du selber. Bitte verwenden Sie den MANUELLEN MODUS für Gliedmaßen, Rumpf und Bauchbereich geeignete Tipps und stellen Sie die Saugstärke ein, Arbeitszeit nach Ihrem Gefühl (Bleiben Sie nicht länger als 2 Sekunden an einer Stelle).

# REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG



Schritt 1: Ziehen Sie die Spitze aus der Maschine



Schritt 2: Entfernen Sie die alte Dichtung (Filter) am Ende des Ansatzteils.



Schritt 3: Verwenden Sie zum Reinigen eine Bürste und Reinigungsmittel die äußere und innere Oberfläche (Tipps: Bessere Wirkung um die Spitze mit Ultraschall zu reinigen, wenn die Bedingungen dies zulassen).



Schritt 4: Ersetzen Sie danach eine neue Dichtung (Filter). Spitze wird gereinigt und getrocknet.



Schritt 5: Setzen Sie die Spitze in die Maschine ein und beenden Sie die Reinigung.

# FAQ

## 1. Warum lässt sich das Gerät nicht einschalten??

Stellen Sie zunächst sicher, dass die Batterie noch Strom hat, und schließen Sie Ihren Adapter an Gerät per USB-Kabel anschließen und mindestens eine Stunde aufladen. Der Ladezustand auf dem LCD-Display zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird. Wenn der Indikator schaltet sich nicht ein, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

## 2. Wie wechselt man die Diamantspitzen, wenn sie nicht grob genug sind?

Nach jedem Gebrauch empfehlen wir, die Spitzen mit der Bürste zu reinigen. Der Diamant Die Spitzen sollten alle 4-6 Monate ausgetauscht werden. Sie können Originaldiamanten kaufen Tipps auf unserer Website.

## 3. Was ist, wenn die Saugkraft nachlässt?

Denken Sie vor dem Gebrauch daran, einen Filter an der Unterseite der Spitzen zu installieren, um dies zu verhindern Fremdkörper können in den Motor eindringen. Und auch der richtige Einbau von Spitzen ist wichtig.

## 4. Kann ich das Mikrodermabrasionsgerät mit anderen Hautpflegeprodukten verwenden?

Ja, du kannst. Aber bitte vermeiden Sie übermäßiges Entfernen des Schnitts. Das Gerät kann fördern Absorption der Hautpflegeprodukte und erzielen die beste Wirkung.

## 5. Kann ich das Gerät mehrmals pro Woche verwenden?

Wir empfehlen Ihnen, es einmal pro Woche zu verwenden, nicht öfter als zweimal. Mit dem V-Gesicht Massagetipp, den Sie jeden Tag anwenden könne



## **Lyunhing GmbH**

George-Washington-Str.181  
68309 Mannheim Germany  
info@cool-i.de

FC CE RoHS

