

Photonen-Schönheitsmaske



Bedienungsanleitung des Produkts



Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch. Das Handbuch enthält die "Produktgarantiekarte". Bitte bewahren Sie es auf und befolgen Sie die Anweisungen. Beachten Sie die im Produkthandbuch aufgeführten Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen.

1 Einführung

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte, Photon Beauty Mask ist ein Neues Produkt, das von unserem Unternehmen entwickelt wurde, nur um den Verbrauchern das gleiche Pflegetherlebnis wie Schönheitssalons auf wissenschaftliche und gesunde Weise zu bieten und sicherer Weg.

Um ein besseres Erlebnis und eine bessere Wirkung zu erzielen, lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung bitte sorgfältig durch.

2 Ausrüstungsliste

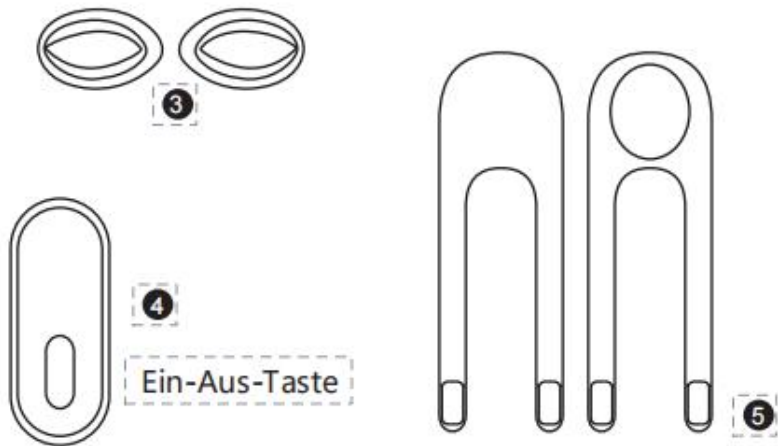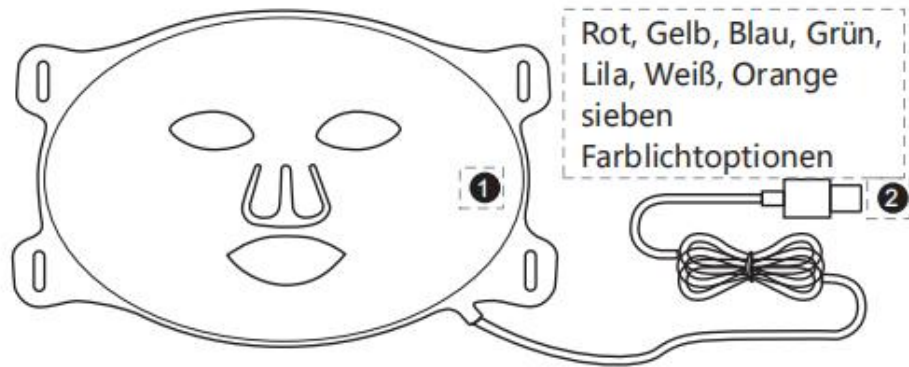

- 1 Flexible Gesichtsmaske aus Silikon
- 3 Verdunkelnde Augenmaske
- 5 Fester Riemen


- 2 USB-Ladekabel
- 4 Kabelgebundene Fernbedienung

*Zubehör unterliegt der physischen Quittung

3 Schnelle Gebrauchsanweisung



Schritt 1: Reinigen und trocknen Sie Ihr Gesicht

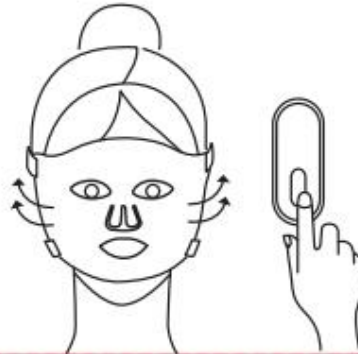

Schritt 2: Schließen Sie das Band an und passen Sie es an, tragen Sie die Maske, Zum Einschalten lange auf die 1,5-S-Schaltertaste drücken, einschalten das standardmäßige rote Licht



Schritt 3: Verbinden Sie den Stecker des Mask Beauty-Geräts mit dem Anschluss



Schritt 4: Nach der eingestellten Zeit Das Gerät schaltet sich automatisch aus. Entfernen Sie die Maske, und führen Sie die anschließende Hautpflege durch.



wenn Sie einer der folgenden sind

Leute, nicht
verwenden
dieses Produkt

1. Menschen, die schwanger sind, bereiten sich darauf vor Schwangerschaft und Stillzeit;
2. Menschen, die lichtempfindlich sind oder sind Einnahme von Medikamenten, die Lichtempfindlichkeit verursachen können;
3. Menschen mit genetischen Erkrankungen oder Hautkrankheiten Auge (z. B. Lupus erythematodes, lichtempfindliches Ekzem oder Albinismus).



Aufladen
Anweisungen

- Dieses Produkt enthält Lithium-Ionen Polymer-Akkus. Verwenden Sie sie nicht während des Ladevorgangs. (Hinweis: Einmal während des Ladevorgangs verwendet.)
- Beim Aufladen kann es zu Schäden am Gerät kommen Batterie und Gerät, die Maske jedoch nicht leuchten und funktionieren nicht)
- Bitte vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen
- Schließen Sie zum Laden das Gerät an USB-Ladekabel zum Controller,
- Stecken Sie den Stecker ein, schalten Sie den Strom ein und Starten Sie den Ladevorgang. (Hinweis: Zusätzlich zu Steuern des Schalters und Einstellen der Gang, der Controller hat auch die Funktion von "Ladebank", also nur der Typ-C Ladekabel und der Controller können sein
- Beim Laden angeschlossen, ohne Verbindung mit der Maske, um die Beschädigung der Maskenteile zu reduzieren)
- Wenn die Controller-Anzeige blinkt, das Gerät befindet sich im Ladezustand; Wann Wenn die Controller-Anzeige aufleuchtet und gleichzeitig aufhört zu blinken, ist der Ladevorgang abgeschlossen vollständig.

5 Die Schönheit der Optik

7 spektral abgestufte Injektionen voller Schönheitskraft mit hoher Muskelenergie.

01/ Rot

Mit einer Wellenlänge von 630 nm, bekannt als "biologisches Aktivlicht", kann es die Zellaktivität verbessern, den Stoffwechsel beschleunigen und fördern
Kollagenbildung. Es hat die Funktionen der Aufhellung und Aufhellung
Flecken, Verjüngung und Faltenentfernung, Vergrößerung der Haut
Elastizität, Verbesserung des Hautzustands, Reparatur geschädigter Haut,
Verkleinerung der Poren, Straffung der Haut, Anti-Aging und
Antioxidation.

02/ Blau

Die Wellenlänge von 470 nm kann Bakterien abtöten, Entzündungen beseitigen und Entzündungen hemmen. Sie kann Propionibacterium zerstören
effektiv, ohne das Hautgewebe zu schädigen und Akne zu reduzieren
Entzündungsphase, um in kurzer Zeit zu heilen. Es hat die Funktion, Akne
und Wunden zu beseitigen, Sterilisation und Entzündungen zu
verursachen.
Repariert die Haut und hinterlässt keine Narben und Pigmente.

03/ Grün

Die Wellenlänge 520 nm mit Neutralisierung, Gleichgewicht und Stabilität kann die Ölsekretion der Haut reduzieren. Gleichen Sie den Anteil von Wasser und Öl aus.
lindert effektiv psychische Spannungen, fördert Lymphe und
Drainage Schwellung.

04/ Gelb

Nach einer speziellen Behandlung der Wellenlänge 590 nm wird die verbessert

Austausch von Zellsauerstoff, Wiederauffüllung der Hautzellen mit Energie, Abbau von Pigmenten, Förderung der Lymphentgiftung, Verbesserung der Haut

Rauheit und Falten. Behandlung von Hautrötungen, Fieber, Ringelflechte usw. Verbesserung der Hautimmunität.

05/ Lila

Es ist das Doppelfrequenzlicht von rotem und blauem Licht. Es kombiniert die Wirkung zweier Lichtarten, insbesondere bei der Behandlung von Akne und Akneflecken.

06/ Türkis

Es kann die Zellenergie schrittweise steigern und den Stoffwechsel fördern.

07/ Weiß

Dringt tief in die Haut ein, beschleunigt den Stoffwechsel des aktiven Gewebes, beseitigt Flecken, verbessert feine Linien und entspannt die Haut.

6

Bedienungsanleitung

Verwendung und Schritte

Step 1	Reinigen und trocknen Sie Ihr Gesicht gründlich.
Step 2	Befestigen Sie das Band an der Maske und setzen Sie die Maske auf das Gesicht, stellen Sie den Riemen ein und schnallen Sie ihn so fest, dass der Die Maske wird auf dem Gesicht befestigt. Drücken Sie lange auf den Schalter, um das Gerät einzuschalten.
Step 3	Je nach Lichtfarbe verfügt das Gerät über insgesamt sieben Farblichter in den Farben Rot, Gelb, Blau, Grün, Lila, Weiß und Orange. Sie können das Licht drücken Auswahl taste zum Umschalten des Farblichts. Danach Beim Starten leuchtet das Gerät standardmäßig rot und die Die Bestrahlungszeit kann durch kurzes Drücken angepasst werden die Zeittaste. Wenn die drei Lichter blinken, wird die Das Gerät befindet sich in einem Energiesparzustand und muss dies auch tun berechnet.
Step 4	Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn Sie Erreichen Sie den Zeitpunkt, zu dem Sie es verwenden möchten. Entfernen Sie die Maske, nachdem das Gerät ausgeschaltet ist, und beenden Sie das i Bestrahlung und folgen Sie dem täglichen Hautpflegeprozess.
Remarks	Es wird empfohlen, dies 3-5 Mal pro Woche über 4 aufeinanderfolgende Wochen durchzuführen.

7

Qualitätssicherungsdienst

Bei normalem Gebrauch, bei dem das Produkt selbst Qualitätsprobleme aufweist, ist dies der Fall

Das Produkt bietet 2 Jahre Garantie auf den Host und ein halbes Jahr auf das Zubehör. Wir gehen davon aus, dass Schäden und Qualitätsmängel nicht durch die Garantie abgedeckt sind

Garantie.

Wenn Sie während der Nutzung Fragen oder Fragen haben, können Sie die anrufen

Telefon des Kaufhändlers werktags zwischen 9 und 18 Uhr für Beratung.

8

Wartung und Instandhaltung der Ausrüstung

Kaution

Bitte lagern Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung

Bei Raumtemperatur Staub, direkte Sonneneinstrahlung oder feuchte Umgebung vermeiden.

Sauber

Wischen Sie die Maske vor und nach dem Gebrauch mit einem wasserbasierten Lappen oder einem feuchten Reinigungstuch ab. Wann Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

Recycling Behandlung

Dieses Produkt enthält Lithiumbatterien und Bitte senden Sie das Gerät an die zuständige örtliche Fachstelle

Sammelstelle für Recycling abgeben. Es wird empfohlen

anderen Haushalt zu klassifizieren und zu entsorgen Müll als Beitrag zum Umweltschutz.

9

Service und Wartung

1. Für den Hauptmotor des Instruments gilt eine Garantie von einem Jahr das Kaufdatum (auf Rechnung), Zubehör und Verbrauchsmaterialien jedoch nicht von der Garantie abgedeckt; Im Rahmen der Nicht-Garantie und darüber hinaus Garantiezeit können Sie auch für die Wartung verantwortlich sein und Verlängerung (vorbehaltlich der Arbeitsdienstgebühren).
2. Wenn Sie Zubehör und Verbrauchsmaterialien ergänzen oder kaufen müssen, wenden Sie sich bitte an den Händler.
3. Wir bieten keinen kostenlosen Garantieservice für die folgenden menschlichen Faktoren an: ① Fehler, der durch Selbsterlegung und Modifikation des Instruments verursacht wird; ② Fehler, der durch unsachgemäße Verwendung und mangelnde angemessene Wartung verursacht wird;
- ③ Der Fehler, der durch unvorsichtige Stürze und Stürze verursacht wird.

10

Garantiekarte

Produktname		
Bestellnummer		
Kaufdatum		
Kundenname und Telefonnummer		
Wartungszeit	Wartungsprotokoll	Unterschrift des Betreuers