



IPL ELYSEA

HAARENTFERNUNGSGERÄT FÜR
DEN HEIMGEBRAUCH
ENTWORFEN VON VULPÉS,
DEUTSCHLAND

Inhaltsverzeichnis

- 1 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN – BITTE LESEN
- 2 WAS IST IPL ELYSEA?
- 3 ANENDUNGSBEREICH AM KÖRPER
- 4 HAAR UND HAUTTYPEN
- 5 WIE FUNKTIONIERT IPL ELYSEA?
- 6 WIE WIRD IPL ELYSEA ANGEWENDET?
- 7 NACHBEHANDLUNG DER HAUT
- 8 MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
- 9 TECHNISCHE INFORMATIONEN
- 10 GERÄTEWARTUNG
- 11 GARANTIEBEDINGUNGEN

Bitte lesen und befolgen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden. Dadurch wird eine sichere und effektive Anwendung gewährleistet und das Risiko von Verletzungen sowie Geräteschäden minimiert.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Tattoos, Muttermalen, Sommersprossen, Narben oder gereizter Haut.
- Das Gerät darf nicht von Schwangeren, stillenden Frauen oder Personen mit Hauterkrankungen wie Ekzemen, Psoriasis oder Rosacea verwendet werden.
- IPL Elysea ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt und sollte nicht mit anderen Personen geteilt werden.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Blicken Sie niemals direkt in das Behandlungsfenster, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

2. Sichere Anwendungshinweise

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich auf trockener, sauberer Haut, die frei von Cremes, Lotionen oder Deodorants ist.
- Setzen Sie die behandelten Hautbereiche unmittelbar nach der Behandlung nicht direktem Sonnenlicht aus. Tragen Sie mindestens 48 Stunden lang nach der Behandlung einen Sonnenschutz mit Lichtschutzfaktor (LSF) 30 oder höher auf.
- Vermeiden Sie heiße Duschen, Saunabesuche und starkes Schwitzen für mindestens 24 Stunden nach der Behandlung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie in den letzten drei Monaten eine Strahlen- oder Chemotherapie erhalten haben.
- Sollte Ihre Haut starke Rötungen, Brennen oder Blasenbildung zeigen, brechen Sie die Anwendung ab und konsultieren Sie einen Arzt.
- Behandeln Sie denselben Hautbereich nicht mehrfach in einer Sitzung, um Verbrennungen oder Hautreizungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie durch Personen ohne entsprechende Erfahrung und Kenntnisse bestimmt, es sei denn, sie werden bezüglich der sicheren Nutzung beaufsichtigt oder angeleitet, um das Risiko von Brandverletzungen zu vermeiden.
- Die Behandlungsstufe des Geräts ist anfänglich auf Stufe 1 eingestellt. Erhöhen Sie das Energieniveau stufenweise von niedrig zu hoch, abhängig von Ihrem Komfortempfinden und Ihrer Hautempfindlichkeit. Folgen Sie den Empfehlungen im Benutzerhandbuch, um die passende Einstellung für Ihren Hauttyp auszuwählen. Leichte Hautrötungen nach der Behandlung sind normal; die Anwendung eines Kühlpacks kann helfen, die Haut zu beruhigen und eventuelle Reizungen zu reduzieren.
- Üben Sie bei der Anwendung keinen übermäßigen Druck auf das Gerät aus. Zu starker Druck kann Beschwerden verursachen oder die Wirksamkeit der Behandlung vermindern.

3. Kontraindikationen – Nicht verwenden, wenn::

- Sie sind jünger als 18 Jahre.
- Sie hatten Hautkrebs oder es besteht der Verdacht auf bösartige Hautveränderungen.
- Sie neigen zu Keloidbildung oder extremer Lichtempfindlichkeit.
- Sie verwenden Medikamente, die eine Lichtempfindlichkeit verursachen, z.B. Retinoide, Accutane oder bestimmte Antibiotika.
- Sie haben ein implantiertes elektronisches medizinisches Gerät, wie z.B. einen Herzschrittmacher oder eine Insulinpumpe.
- Sie leiden an einer lichtempfindlichen Erkrankung, wie z.B. Lupus oder Porphyrie.
- Sie haben Epilepsie oder litten in der Vergangenheit an lichtinduzierten Krampfanfällen.
- Sie hatten in der Vergangenheit Herpes-Ausbrüche im Behandlungsbereich.

4. Zu vermeidende Bereiche

- Gesicht oberhalb der Wangenlinie: Vermeiden Sie die Anwendung des Geräts im Bereich der Augen, Augenbrauen oder Wimpern, um Augenschäden vorzubeugen.
- Genital- und Perianalbereich: Verwenden Sie IPL nicht an Genitalien, Brustwarzen oder im Analbereich, da die Haut in diesen Bereichen äußerst empfindlich ist.
- Krampfadern und Hauterkrankungen: Behandeln Sie keine Bereiche mit Krampfadern, offenen Wunden, aktiver Akne oder Hautinfektionen.
- Tätowierungen und dunkle Hautpigmente: Die Verwendung von IPL auf Tätowierungen oder stark pigmentierter Haut kann zu Verbrennungen oder Verfärbungen führen.

5. Augensicherheit

- Das IPL-Gerät gibt intensive Lichtimpulse ab, die für die Augen schädlich sein können.
- Verwenden Sie während der Behandlung stets die mitgelieferte Schutzbrille.
- Blicken Sie beim Auslösen des Lichtimpulses nicht direkt in das Behandlungsfenster.
- Stellen Sie sicher, dass das Behandlungsfenster vollständig auf der Haut aufliegt, bevor Sie den Lichtimpuls auslösen.
- Richten Sie den Lichtimpuls niemals in Richtung der Augen und tragen Sie stets die mitgelieferte Schutzbrille, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.
- Wenn Sie das Gerät im Gesicht verwenden, schließen Sie immer die Augen, um eine Exposition gegenüber dem intensiven Licht zu vermeiden.

6. Elektrische Sicherheit

- Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Geräts mit der örtlichen Stromversorgung übereinstimmt, bevor Sie es anschließen.
- Verwenden Sie ausschließlich den Original-Netzadapter und das mitgelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Sollte das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sein, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und kontaktieren Sie umgehend den Kundendienst.

7. Gerätehandhabung und Wartung

- Bitte stecken Sie keine metallischen Gegenstände in die Wärmeabgabeöffnung, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher; verdecken Sie während des Betriebs weder Lufteinlass noch Belüftungsöffnungen.
- Falls das Gerät nicht korrekt reagiert, starten Sie es neu. Bleibt das Problem bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät niemals eigenmächtig. Bei Funktionsstörungen senden Sie das Gerät einschließlich des Zubehörs zur Überprüfung und Wartung an den Hersteller zurück.
- Ziehen Sie nach der Verwendung stets den Netzstecker und lagern Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Reinigen Sie regelmäßig das Behandlungsfenster mit einem weichen, trockenen Tuch oder Wattestäbchen, um Rückstände zu entfernen.
- Das Gerät sollte vor vorhersehbaren Umwelteinflüssen geschützt werden, darunter externe elektrische Störungen, elektrostatische Entladung, Druckschwankungen, plötzliche Beschleunigung und thermische Zündquellen.

8. Lagerung und Entsorgung

- Lagern Sie das Gerät in einer trockenen, gut belüfteten Umgebung, geschützt vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung.
- Entsorgen Sie das Gerät nicht über den normalen Hausmüll. Geben Sie es stattdessen bei einer autorisierten Recyclingstelle zur fachgerechten Entsorgung ab.

Was ist IPL Elysea?


Das Vulpes Elysea IPL-Gerät ermöglicht professionelle Haarentfernungsbehandlungen in Salonqualität für zu Hause. Durch fortschrittliche IPL-Technologie (Intense Pulsed Light) in Kombination mit aktiver Kühlung und einem austauschbaren Laserkopf bietet es eine schmerzmindernde und effiziente Haarentfernung mit langanhaltenden Ergebnissen.

How Does IPL Work

Das Vulpés IPL Elysea Haarentfernungsgerät verwendet die IPL-Technologie (Intense Pulsed Light), um gezielte Lichtwellenlängen auszusenden, die in die Haut eindringen. Das Gerät ist so konzipiert, dass es den Haarwachstumszyklus unterbricht, indem es Lichtenergie an die Hautoberfläche abgibt, wo diese durch das Melanin im Haarschaft absorbiert wird. Die aufgenommene Energie wird anschließend in Wärme umgewandelt, wodurch der Haarfollikel effektiv deaktiviert und weiteres Haarwachstum verhindert wird. Das Ergebnis ist eine langanhaltende Haarreduktion.

What is in the box?

Im Lieferumfang sind 1x Vulpés Elysea IPL-Gerät inklusive Netzkabel und 1x Schutzbrille enthalten.

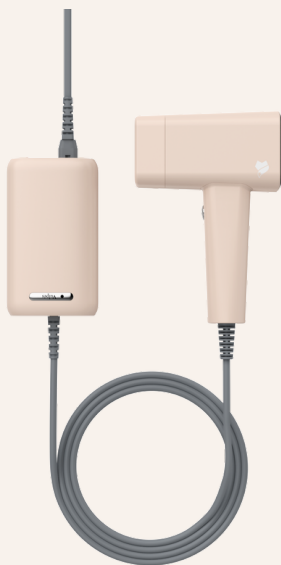

*Vulpés Elysea IPL-Gerät
inklusive Netzkabel*



Schutzbrille

Das Vulpes Elysea IPL-Gerät kann für verschiedene Körperbereiche verwendet werden. Bitte beachten Sie dabei die jeweiligen Hinweise.



Beine



Achseln



Bikini Zonen



Arme



Brust und
Rücken



Gesicht

Hinweise – Bitte sorgfältig lesen

Einige Körperbereiche eignen sich aufgrund ihrer Hautempfindlichkeit, des Reizungsrisikos oder mangelnder Wirksamkeit nicht für eine IPL-Behandlung. Vermeiden Sie die Anwendung von IPL an folgenden Bereichen:

⊘ Augen und Augenbrauen

PL-Licht kann schwere Augenschäden verursachen. Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie IPL im Gesicht anwenden. Wenden Sie IPL niemals an Augenbrauen oder Wimpern an, um Augenverletzungen zu vermeiden.

⊘ Kopfhaut und Kopfbereich

Die Kopfhaut ist dünner und empfindlicher als andere Hautbereiche. IPL ist bei sehr hellem, grauem oder rotem Haar, wie es typischerweise auf der Kopfhaut vorkommt, unwirksam.

⊘ Genital- und Perianalbereich

Die Bikinizone kann sicher behandelt werden, jedoch sollte eine direkte Anwendung auf den Genitalien vermieden werden. Dieser Bereich ist besonders empfindlich und stark pigmentiert, was das Risiko für Verbrennungen erhöht.

⚠ Tätowierungen, Muttermale, Sommersprossen und Leberflecken

Dunkle Pigmente absorbieren mehr Licht und können daher Verbrennungen oder Hautreizungen verursachen. Behandeln Sie daher keine Stellen mit Tätowierungen, großen Muttermalen oder stark pigmentierten Flecken.

⚠ Bereiche mit Krampfadern oder Hauterkrankungen

Nicht empfohlen für Personen mit Krampfadern, Ekzemen, Schuppenflechte (Psoriasis) oder offenen Wunden. IPL kann diese Beschwerden verschlechtern und zusätzliche Hautreizungen verursachen.

⊘ Brustwarzen und Brustwarzenhof (Areolen)

Die Haut in diesem Bereich ist äußerst empfindlich und stärker pigmentiert, was das Risiko von Verbrennungen erhöht. Vermeiden Sie die Behandlung dieses Bereichs, um Beschwerden oder Verletzungen zu verhindern.

Das Vulpés IPL Elysea wurde für eine sichere und effektive Haarentfernung bei unterschiedlichen Hauttönen und Haarfarben entwickelt. Aufgrund der Funktionsweise der IPL-Technologie hängt die Wirksamkeit des Geräts jedoch vom Kontrast zwischen Haarpigment und Hautton ab.




Geeignete Haar- und Hauttypen

Das IPL Elysea ist besonders effektiv bei Personen mit heller bis mittlerer Hautfarbe (Fitzpatrick-Typen I–IV) und dunklem, pigmentiertem Haar wie dunkelblond, braun oder schwarz. Bei sehr dunklen Hauttypen (Fitzpatrick-Typen V–VI) wird das Gerät nicht empfohlen, da der hohe Melaningehalt das Risiko von Verbrennungen, Hautreizungen oder Verfärbungen erhöhen kann. Darüber hinaus ist IPL bei sehr hellblondem, weißem, grauem oder rotem Haar aufgrund unzureichender Pigmentaufnahme weniger wirksam oder unwirksam.

Wichtige Hinweise

- Gebräunte oder kürzlich der Sonne ausgesetzte Haut sollte erst behandelt werden, wenn sie wieder ihren natürlichen Farbton angenommen hat.
- Dunkler pigmentierte Bereiche wie Sommersprossen, Muttermale oder Tätowierungen sollten während der Behandlung ausgespart werden.
- Falls Unsicherheiten bezüglich der Haut- und Haareignung bestehen, sollte zunächst ein Verträglichkeitstest (Patch-Test) an einer kleinen Hautstelle durchgeführt werden, bevor die vollständige Behandlung erfolgt.
- Durch das Befolgen dieser Hinweise erzielen Anwender optimale Ergebnisse und stellen zugleich eine sichere und effektive Haarentfernung sicher.

Produktfunktionen (Abbildung)

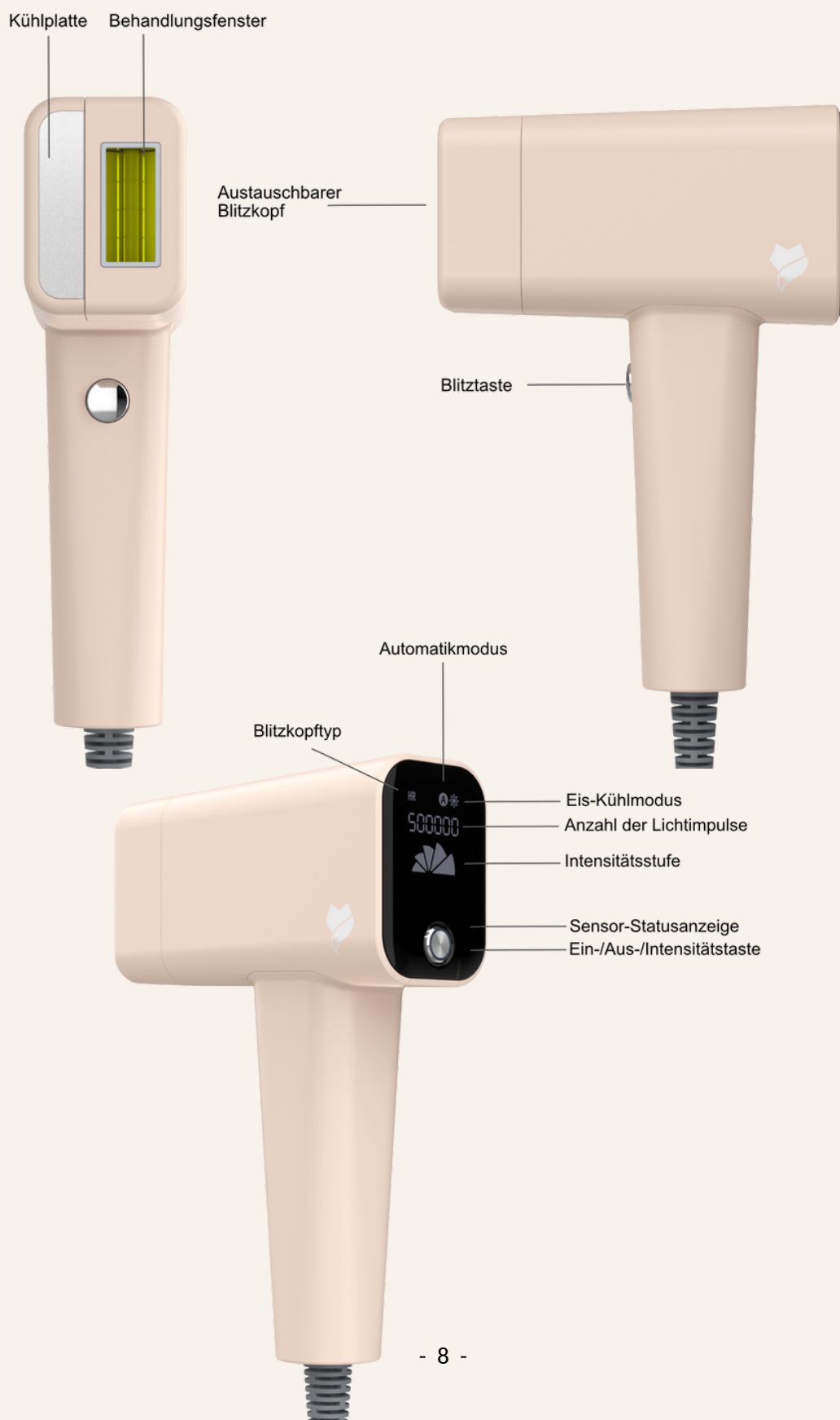

1. Ein-/Ausschalter & Auswahl der Behandlungsstufe

Drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter für mehr als 3 Sekunden gedrückt (nachdem das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen wurde), um das Gerät einzuschalten. Das Gerät startet automatisch auf Stufe 1. Mit jedem weiteren Tastendruck erhöht sich die Behandlungsstufe und durchläuft insgesamt fünf Intensitätsstufen von niedrig bis hoch. Um das Gerät auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste erneut länger als 3 Sekunden.

2. Eis-Kühlfunktion

Das Gerät verfügt über eine automatische Eis-Kühlfunktion, die beim Einschalten aktiviert wird. Um die Kühlfunktion auszuschalten, drücken Sie gleichzeitig den Ein-/Ausschalter und die Blitztaste. Das Eis-Kühl-Symbol auf dem Display erlischt. Hinweis: Die Kühlfunktion dient dazu, die Hauttemperatur für eine komfortablere Behandlung zu reduzieren. Sie hat keine medizinischen oder therapeutischen Effekte, sondern dient ausschließlich dem Komfort während der Anwendung.

3. Blitztaste & Behandlungsmodus

Die Blitztaste aktiviert die Blitzlampe nur, wenn das Behandlungsfenster vollständig auf der Haut aufliegt. Einzelpuls-Modus: Drücken Sie die Blitztaste einmal für einen einzelnen Lichtimpuls. Automatik-Modus: Halten Sie die Blitztaste für 3 Sekunden gedrückt, bis das „A“-Symbol aufleuchtet. Das Gerät gibt dann kontinuierlich Lichtimpulse ab. Um den Automatik-Modus zu beenden, drücken Sie einfach einmal die Blitztaste, und das Gerät kehrt zum Einzelpuls-Modus zurück. Bewegen Sie das Gerät nach jedem Impuls, sodass mit jedem Blitz ein neuer Hautbereich behandelt wird.

4. Statusanzeigen

Modus	Kontrollleuchte	Statusbeschreibung
Aktivierung/Standby (AUS)	Keine Leuchte	Gerät ist ausgeschaltet (nicht mit Stromversorgung verbunden).
Standby-Modus	Langsam blinkendes Blau	Gerät befindet sich im Standby-Modus (nach Anschluss an die Stromversorgung aktiviert).
Vorbereitung der Stufe	Schnell blinkendes Blau	Gerät passt die Behandlungsstufe an.
Haarentfernungsmodus	Konstant blaues Licht	Gerät ist bereit für die Behandlung und gibt einen Lichtimpuls ab, sobald es vollständig auf der Haut aufliegt.

Um optimale Ergebnisse bei der Haarentfernung mit dem IPL Elysea zu erzielen, befolgen Sie bitte sorgfältig diese Anweisungen.



Vorbehandlungspflege

Die richtige Vorbereitung vor der Anwendung des Vulpés IPL Elysea ist entscheidend, um sichere, wirksame und langanhaltende Ergebnisse bei der Haarentfernung zu erzielen. Befolgen Sie diese Schritte zur optimalen Vorbereitung, um die Behandlungseffizienz zu maximieren und das Risiko von Hautreizungen zu minimieren.

Rasieren des Behandlungsbereichs: Rasieren Sie den Bereich 24 Stunden vor der Behandlung, um eine optimale Lichtabsorption zu gewährleisten. Verzichten Sie auf Wachsen, Zupfen oder Epilieren, da bei IPL die Haarwurzel intakt bleiben muss.

Haut reinigen und trocknen: Stellen Sie sicher, dass die Haut frei von Lotionen, Ölen, Deodorants und Selbstbräunern ist, um Irritationen zu vermeiden und die Effektivität der Behandlung zu erhöhen.

Sonnenexposition vermeiden: Vermeiden Sie mindestens 48 Stunden vor der Behandlung direkte Sonneneinstrahlung und Solariumbesuche. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Sonnenschutz mit mindestens LSF 30.

Verträglichkeitstest durchführen: Erstanwender sollten das Gerät zunächst an einer kleinen Hautstelle testen und 24 Stunden abwarten, um eventuelle Reaktionen auszuschließen, bevor eine vollständige Behandlung durchgeführt wird.

Überprüfung der Haut auf Hautprobleme: Verwenden Sie IPL nicht auf Schnitten, Wunden, Ausschlägen, Ekzemen, Psoriasis, Tätowierungen oder Muttermalen, da dies Verbrennungen oder Irritationen verursachen könnte.

Schmuck entfernen: Stellen Sie sicher, dass sich keine Metallgegenstände in der Nähe des Behandlungsbereichs befinden, um Störungen zu vermeiden.


Hautfeuchtigkeit und Hautgesundheit erhalten: Halten Sie Ihre Haut in den Tagen vor der Behandlung gut mit Feuchtigkeit versorgt, vermeiden Sie jedoch das Auftragen von Cremes oder Lotionen unmittelbar vor der Anwendung.



Einschalten des Geräts

Um das Vulpés IPL Elysea einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 2–3 Sekunden gedrückt, bis das Gerät aktiviert wird. Die Standard-Behandlungsstufe ist Stufe 1. Die Kontrollleuchte leuchtet auf und signalisiert, dass das Gerät einsatzbereit ist.

EINSCHALTEN

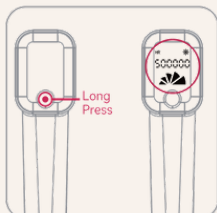



Laser Anwendung

1. Gerät auf dem Behandlungsbereich positionieren

Platzieren Sie das Behandlungsfenster des Vulpés IPL Elysea flach auf der Haut im ausgewählten Behandlungsbereich. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig auf der Haut aufliegt, um eine optimale Wirkung zu gewährleisten.

2. Aktivierungsanzeige überprüfen

Wenn das Gerät korrekt positioniert ist, leuchtet die Kontrollanzeige blau auf und signalisiert, dass das IPL einsatzbereit ist. Sollte die blaue Anzeige nicht erscheinen, hat das Gerät möglicherweise keinen vollständigen Hautkontakt.

3. Gerät gegebenenfalls neu ausrichten


Falls die Kontrollanzeige nicht aufleuchtet, heben Sie das Gerät leicht an und positionieren Sie es erneut, um den vollständigen Kontakt zur Haut sicherzustellen. Vermeiden Sie Lücken oder ungleichmäßigen Kontakt, da dies die Aktivierung des IPL verhindern könnte.

4. IPL-Behandlung starten


Sobald die Kontrollanzeige blau aufleuchtet, drücken Sie die Blitztaste, um einen Lichtimpuls auszulösen. Bewegen Sie das Gerät nach jedem Lichtimpuls auf den nächsten Hautabschnitt, um den gesamten Behandlungsbereich vollständig und gleichmäßig abzudecken.

Drücken Sie die Blitztaste erneut, um die Haarentfernung fortzusetzen, und bewegen Sie das Gerät nach jedem Impuls weiter. Machen Sie bei Bedarf kurze Pausen, um der Haut Zeit zur Abkühlung zu geben, bevor Sie die Behandlung ein- bis zweimal wiederholen. Vermeiden Sie es, denselben Bereich mehrfach unmittelbar nacheinander zu behandeln, um Hautreizungen oder Verbrennungen vorzubeugen.

AKTIVIERUNG
-LICHT

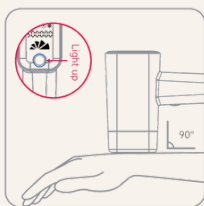


BEHANDLUNG

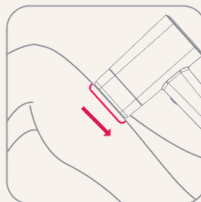

Kühlmodus

Um den Kühlmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie gleichzeitig die Griff-Taste und die Monitor-Taste. Dadurch wird die Kühlfunktion ein- oder ausgeschaltet und sorgt so für ein komfortableres IPL-Behandlungserlebnis.

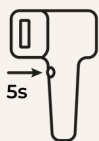


Manueller und automatischer Modus

Um den Behandlungsmodus auszuwählen, halten Sie die Griff-Taste für 5 Sekunden gedrückt, um zwischen automatischem und manuellem Modus zu wechseln:


Automatischer Modus:

Im automatischen Modus gibt das Gerät Lichtimpulse in einem Intervall von 0,5 Sekunden pro Blitz ab, was eine kontinuierliche und effiziente Behandlung größerer Hautbereiche ermöglicht. Wenn der automatische Lichtimpulsmodus aktiviert ist, erscheint das „A“-Symbol auf dem Display. Um diesen Modus zu verlassen, drücken Sie kurz die Blitztaste; das „A“-Symbol erlischt anschließend. Um Hautreizungen oder Verbrennungen zu vermeiden, behandeln Sie denselben Bereich nicht öfter als drei Mal in Folge während einer Sitzung.

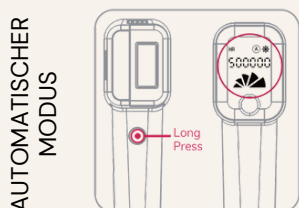

Manueller Modus:

Im manuellen Modus beträgt der Blitzabstand 1 bis 1,5 Sekunden pro Lichtimpuls, was eine kontrolliertere Anwendung ermöglicht und ideal für präzise Behandlungen kleiner oder empfindlicher Hautpartien ist. Beim Einschalten startet das Gerät standardmäßig auf Behandlungsstufe 1. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um durch die Intensitätsstufen zu wechseln. Sobald sich die Haut an das Licht gewöhnt hat, können Sie die Behandlungsstufe je nach Komfort und Verträglichkeit anpassen. Bei jedem Druck auf die Blitztaste gibt das Gerät einen Lichtimpuls ab, begleitet von einem leichten Wärme- oder Kribbelgefühl, was während der Anwendung vollkommen normal ist.

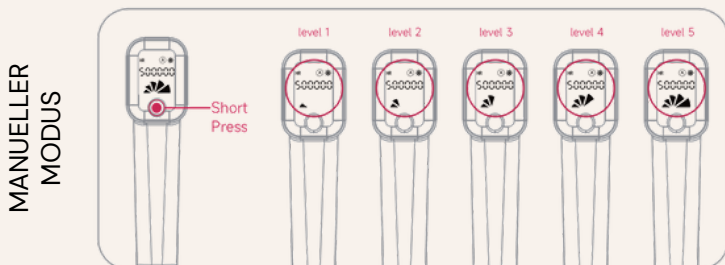

Nachbehandlung

Nach der IPL-Behandlung sollten Sie die Haut mit Feuchtigkeit versorgen, um sie hydratisiert, glatt und gesund zu halten. Verwenden Sie dazu eine sanfte, parfümfreie Feuchtigkeitscreme oder Aloe-Vera-Gel, um mögliche Rötungen zu lindern und die Haut zu pflegen. Regelmäßige Feuchtigkeitspflege unterstützt die Wirksamkeit der Behandlung, sorgt für angenehmen Komfort und beugt Trockenheit vor. (Siehe Abschnitt 07 – Hautpflege nach der Anwendung)



Nachbehandlung der Haut

Eine sorgfältige Nachbehandlung ist entscheidend, um optimale Ergebnisse zu erzielen, Irritationen zu minimieren und eine gesunde Haut nach der IPL-Behandlung aufrechtzuerhalten.

Befolgen Sie diese Hautpflegehinweise nach der Anwendung, um Komfort und Wirksamkeit zu maximieren:

1. Beruhigung & Feuchtigkeit der Haut Tragen Sie nach jeder Sitzung eine parfümfreie, alkoholfreie Feuchtigkeitscreme oder Aloe-Vera-Gel auf, um die Haut zu beruhigen und Trockenheit vorzubeugen. Verzichten Sie unmittelbar nach der Behandlung auf aggressive Chemikalien, Parfüms oder Peelings.
2. Schutz vor Sonneneinstrahlung Vermeiden Sie mindestens 48 Stunden nach der Behandlung direkte Sonneneinstrahlung, da die Haut empfindlicher gegenüber UV-Strahlen ist. Verwenden Sie vor dem Aufenthalt im Freien einen Breitband-Sonnenschutz (mindestens LSF 30+), um Sonnenbrand, Hyperpigmentierung oder Hautreizungen zu verhindern. Meiden Sie Solarien, Selbstbräuner und längere Sonnenexposition während des gesamten Behandlungszyklus.
3. Vermeidung von Hitze & reizenden Stoffen Verzichten Sie mindestens 24 Stunden nach der Behandlung auf heiße Duschen, Bäder oder Saunabesuche, da Hitze Hautreizungen verstärken kann. Vermeiden Sie intensives Training oder starkes Schwitzen, um zusätzliche Hautreizungen zu verhindern.
4. Sanfte Reinigung & Verzicht auf aggressive Produkte Waschen Sie die behandelten Hautbereiche mit lauwarmem Wasser und einem milden, hautfreundlichen Reinigungsmittel. Verwenden Sie mindestens eine Woche lang keine Peelings, chemischen Säuren (wie AHAs, BHAs oder Retinoide) oder andere intensive Hautpflegeprodukte.
5. Vermeidung von Kratzen, Reiben oder Haarentfernung Leichte Rötungen oder Empfindlichkeit sind normal – kratzen oder reiben Sie die Haut nicht, um Irritationen oder Narbenbildung zu verhindern. Vermeiden Sie Wachsen, Zupfen oder Epilieren zwischen den IPL-Sitzungen, da die Haarwurzel für eine wirksame Behandlung intakt bleiben muss.
6. Hydratation & Gesunde Hautroutine Trinken Sie ausreichend Wasser, um die Haut hydratisiert zu halten und die Heilung zu fördern. Setzen Sie die regelmäßige Anwendung von Feuchtigkeitscremes fort, um die Haut weich und geschmeidig zu halten. Halten Sie sich an den empfohlenen Behandlungsplan, um optimale Ergebnisse bei der langfristigen Haarreduktion zu erzielen.

Durch Einhaltung dieser Pflegeschritte nach der Behandlung können Sie eine sichere, angenehme und effektive IPL-Haarentfernung gewährleisten, Hautreizungen minimieren und eine glatte, haarfreie Haut erreichen.

Bei Verwendung gemäß den Anweisungen sind Nebenwirkungen des Vulpés IPL Elysea selten. Dennoch können, wie bei jeder kosmetischen Anwendung, bei manchen Nutzern leichte Reaktionen auftreten. Falls eine der folgenden Nebenwirkungen länger als 24 Stunden anhält, konsultieren Sie einen Arzt.

Nebenwirkung	Ursache	Maßnahmen zur Linderung
Leichte Rötungen & Irritation	Normale Hautreaktion auf Lichtimpulse	Aloe-Vera-Gel oder parfümfreie, alkoholfreie Feuchtigkeitscreme auftragen. Kratzen oder Reiben vermeiden.
Erhöhte Sonnenempfindlichkeit	Haut nach Behandlung empfindlicher gegenüber UV-Strahlen	Mindestens 48 Stunden direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, Sonnenschutz mit mindestens LSF 30+ verwenden und schützende Kleidung tragen.
Wärme- oder Kribbelgefühl	Die Haut absorbiert IPL-Energie	Klingt meist innerhalb weniger Stunden ab. Zur Linderung kalte Kompressen oder die integrierte Kühlfunktion verwenden.
Verbrennungen oder Blasen	Anwendung von IPL auf sonnenverbrannter, gebräunter oder sehr empfindlicher Haut	Behandlung sofort abbrechen, kalte Kompressen und beruhigende Cremes (z.B. Aloe Vera) verwenden. Blasen nicht aufkratzen. Bei schwerwiegenden Fällen ärztlichen Rat einholen.
Schwellungen	Hautreaktion aufgrund erhöhter Empfindlichkeit	Kalte Kompressen und beruhigende Lotionen verwenden, enge Kleidung im behandelten Bereich vermeiden.
Hyperpigmentierung (dunkle Flecken)	Behandlung von gebräunter oder dunkler Haut mit hoher Intensität	IPL nicht auf kürzlich gebräunter Haut anwenden, konsequent Sonnenschutz verwenden. Bei Auftreten dunkler Flecken Hautarzt aufsuchen.
Hypopigmentierung (helle Flecken)	Übermäßige IPL-Energieabsorption	Intensitätsstufe reduzieren und auf geeigneten Hauttyp achten. Helle Flecken bilden sich meist mit der Zeit von selbst zurück.

Nebenwirkung	Ursache	Maßnahmen zur Abhilfe
Infektion	Behandlung einer offenen Wunde oder gereizten Haut	Anwendung sofort beenden, die betroffene Stelle sauber halten und ein Antiseptikum auftragen. Ärztlichen Rat einholen, wenn sich die Symptome verschlechtern.
Narbenbildung	Übermäßige IPL-Behandlung derselben Hautstelle	Dieselbe Stelle nicht überbehandeln. Empfohlene Behandlungsintervalle einhalten und korrekte Intensitätseinstellungen verwenden.
Blutergüsse	Zu starker Druck des Geräts auf die Haut	Gerät nur sanft auf die Haut drücken. Blutergüsse verschwinden normalerweise innerhalb weniger Tage von selbst.

So verhindern Sie Nebenwirkungen

Indem Sie diese Vorsichtsmaßnahmen und Pflegehinweise befolgen, können Sie eine sichere, komfortable und effektive IPL-Anwendung gewährleisten und das Risiko von Nebenwirkungen minimieren.

- Führen Sie vor der ersten Anwendung einen Hautverträglichkeitstest durch, um eventuelle Reaktionen festzustellen.
- Verwenden Sie die empfohlenen Intensitätsstufen entsprechend Ihrem Hautton und Ihrer Haarfarbe.
- Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und tragen Sie vor und nach der Behandlung Sonnenschutz mit mindestens LSF 30+ auf.
- Halten Sie Ihre Haut mit parfümfreien Lotionen gut hydratisiert, um Trockenheit und Hautreizungen zu reduzieren.
- Behandeln Sie keine verletzte, gereizte oder gebräunte Haut, um Verbrennungen oder Hautverfärbungen zu verhindern.

Nachbehandlung & Sicherheit

- Überprüfen Sie nach jeder Sitzung das Behandlungsfenster auf mögliche Beschädigungen.
- Berühren oder reinigen Sie das Behandlungsfenster nicht unmittelbar nach Gebrauch –lassen Sie es zunächst vollständig abkühlen.



Technische Informationen

Kategorie	Spezifikationen
Produktname	IPL Elysea
Modell	VULPESIPLO1
Lichttyp	Intense Pulsed Light (IPL)
Lichtquelle	Mittlere Xenon-Bogenblitzlampe
Wellenlängenbereich	510 ~ 1200 nm
Pulsdauer	0.5 ~ 2.5 Millisekunden
Spotgröße (Behandlungsfenster)	3.9 cm ²
Behandlungsstufen	Stufe 1 bis 5
Maximale Energieabgabe	17J ± 20%
Energiedichte	1.84 J/cm ² ~ 5.23 J/cm ²
Pulsintervall	0.5 ~ 1.5 Sekunden
Risikogruppe	Freigestellt
Schutzklasse	BF Typ, Klasse II
Geräte-Lebensdauer	Bis zu 500.000 Lichtimpulse
Sterilisationsmethode	N/A
Betriebsmodus	Kontinuierlich
Eignung für sauerstoffreiche Umgebung	Nicht zutreffend
Konformität und Sicherheitsstandards	IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-2-83:2019/AMD1:2022
Vorsicht	Bedienung oder Anpassung außerhalb der angegebenen Verfahren kann zu gefährlicher Strahlung führen.
Spezifikation	Wert
Eingangsspannung	AC 100~240V, 50/60Hz, 2.5A MAX
Betriebstemperatur	0°C ~ 30°C (32°F ~ 86°F)
Betriebsfeuchtigkeit	25% ~ 75%
Betriebsatmosphärischer Druck	80kPa ~ 106kPa
Lagertemperatur	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Lagerfeuchtigkeit	25% ~ 75%
Lageratmosphärischer Druck	80kPa ~ 106kPa

Reinigung

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung stets aus und ziehen Sie den Netzstecker. Verwenden Sie ein trockenes, fusselfreies Tuch, um das Behandlungsfenster von Staub, Haarresten oder Hautölen zu reinigen. Sollten Markierungen oder dunkle Stellen verbleiben, reinigen Sie den Bereich vorsichtig mehrfach, bis er vollständig sauber ist. Verwenden Sie niemals Aceton, Alkohol oder aggressive Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche und Komponenten des Geräts beschädigen könnten. Das IPL-Gerät darf keinesfalls nass werden oder in Wasser eingetaucht werden, da dies zu einem elektrischen Schlag führen könnte. Überprüfen und reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsöffnungen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten und Überhitzung vorzubeugen.

Überprüfung von Blitzlampe und Sensoren

Kontrollieren Sie regelmäßig die Blitzlampe auf Anzeichen von Verbrennungen, dunklen Stellen oder Abnutzung, da eine beschädigte oder abgenutzte Lampe die Effizienz der Behandlung reduzieren kann. Wenn der Hautkontaktsensor nicht korrekt funktioniert, kann dies das Auslösen von Lichtimpulsen verhindern. Um eine optimale Funktion sicherzustellen, reinigen Sie den Sensor sorgfältig und vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit.

Stromversorgung

Lassen Sie das Gerät nicht für längere Zeit am Strom angeschlossen, wenn es nicht verwendet wird. Um Sicherheit und optimale Leistung sicherzustellen, verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Original-Netzadapter, um elektrische Schäden zu vermeiden.

Ersatzteile

Die Lampenkartusche oder das Blitzmodul hat eine begrenzte Lebensdauer (z.B. 500.000 Lichtimpulse). Überwachen Sie die Nutzung und ersetzen Sie diese bei Bedarf rechtzeitig.



Wartung & Lagerung

Um Schäden oder Verlust von Geräteteilen zu verhindern, lagern Sie das Gerät nach jeder Anwendung in der Originalverpackung. Reinigen Sie das Gerät vor der Lagerung und bewahren Sie es in einer sicheren, trockenen und geschützten Umgebung auf, um die Lebensdauer und Leistung zu erhalten. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät oder dessen Zubehör, um Bruchschäden zu vermeiden.

Garantiezeitraum

Das Vulpés IPL Elysea verfügt über eine einjährige Garantie ab Kaufdatum für das Hauptgerät. Die Lampenkappe unterliegt ebenfalls der Garantie, sofern eine Funktionsstörung aus nicht selbstverschuldeten Gründen auftritt und mehr als 30 % der verfügbaren Lichtimpulse verbleiben. In diesem Fall wird sie kostenlos repariert oder ersetzt.

Garantieumfang

Tritt innerhalb der Garantiezeit ein Mangel auf, der nachweislich auf einen Herstellungsfehler zurückzuführen ist, übernimmt das Unternehmen die kostenfreie Reparatur oder den Austausch des Geräts. Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, fehlerhafte Handhabung oder Ereignisse höherer Gewalt entstanden sind, fallen nicht unter die Garantie. Zur Inanspruchnahme der kostenlosen Wartung müssen Nutzer einen gültigen Kaufbeleg, beispielsweise eine Rechnung, vorlegen. Für Schäden durch unsachgemäße Verpackung bei der Rücksendung haftet das Unternehmen nicht.

Garantieeinschränkungen

Nicht unter die Garantie fallen Schäden, die durch Feuer, Erdbeben, Eingriffe Dritter, unsachgemäße Nutzung oder Betrieb unter ungewöhnlichen Bedingungen verursacht wurden. Indirekte Schäden, wie beispielsweise Betriebsunterbrechungen oder Kosten für Ersatzgeräte und -leistungen infolge der Produktnutzung, sind ebenfalls nicht abgedeckt. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unbefugtes Zerlegen, Verwendung nicht genehmigten Zubehörs oder Reparaturen durch Dritte entstanden sind, führen zum Erlöschen der Garantie. Weiterhin ausgeschlossen sind Schäden aufgrund von Überlastung, ungeeigneten Betriebsbedingungen, falscher Lagerung, Flüssigkeitsschäden oder Schädlingsbefall.

Für Garantieansprüche oder weitere Unterstützung kontaktieren Kunden bitte den Vulpés Kundendienst unter Vorlage des Kaufnachweises und einer detaillierten Beschreibung des Problems.

Kontaktinformationen: support@vulpes-tech.com

Adresse: Vulpés Electronics GmbH, Hasselbrookstraße 52, 22089 Hamburg, Deutschland



IPL ELYSEA

VULPÉS ELECTRONICS GMBH,
HASSELBROOKSTRASSE 52, 22089
HAMBURG, DEUTSCHLAND