


## I Gebrauchsanweisung

### Installation/Austausch von Massageköpfen

Wählen Sie einen für Ihre Anwendung passenden Massagekopf aus und stecken den Massagekopf in die runde Öffnung an der Vorderseite der Massagepistole.

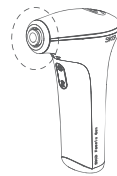

### Auswirkung der Installation



### ① Ein-/Aus schalten

Drücken Sie die Einschalttaste lange, um die Faszienpistole ein- oder auszuschalten.

※ Es wird empfohlen, die Faszienpistole 5 Sekunden nach dem Einschalten zu benutzen.  
! Verwenden Sie sie nicht während des Aufladens.

### Intensitätsumschaltung

Nach dem Einschalten kann der Benutzer die Einschalttaste drücken, um nacheinander zu den Intensitäten 1, 2 und 3 zu wechseln.

### }} Hitze ein/aus

Halten Sie die Taste gedrückt, um den Zustand der heißen Kompression zu aktivieren oder zu deaktivieren.

### Heiße Kompression Zustandsumschaltung

Nach dem Einschalten kann der Benutzer die Hitzestaste drücken, um die Temperatur zu schalten, und es kann drei Zustände wie unten schalten: niedrige Temperatur, mittlere Temperatur und hohe Temperatur in der Reihe.

### Zustand des Maschinenschutzes

1. Im Falle einer Maschinenblockade leuchtet die rote Lampe normalerweise auf, und der Leerlaufbetrieb wird automatisch wiederhergestellt;
2. Im Falle einer Maschinenblockade leuchtet die rote Lampe normalerweise auf; wenn die Blockade 15 Sekunden lang andauert, wird die Maschine automatisch abgeschaltet;

3. Hochtemperaturschutz; wenn die Motortemperatur über 120 °C steigt, schaltet sich die Maschine automatisch ab, nachdem die rote Lampe dreimal blinkt; die Maschine kann nach drei Minuten wieder eingeschaltet und verwendet werden.

## I Sicherheitshinweise

- Um Hautschäden zu vermeiden, wird nicht empfohlen, das Produkt zur direkten Massage der Hautoberfläche zu verwenden. Legen Sie trockene und saubere Kleidung oder ein Handtuch auf die zu massierende Stelle und drücken und bewegen Sie das Produkt dann sanft.
- Verwenden Sie den Hochgeschwindigkeitsmodus oder den Hochdruckmodus nicht für den Kopf oder einen Teil mit Knochen, sondern nur für Weichteile, solange es weder Schmerzen noch Beschwerden gibt.
- Häufige Hochgeschwindigkeits- oder Hochdruckmassage an einem einzelnen Teil kann zu Abrieb führen. Bei Schmerzen oder Unwohlsein ist die Massage sofort abzubrechen.
- Halten Sie Finger, Haare oder andere behaarte Teile vom Dehnungsteil des Produkts fern, um Schmerzen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Werfen Sie das Produkt nicht weg und verwenden Sie es nicht unsachgemäß.
- Bauen Sie das Produkt nicht wieder ein.
- Sorgen Sie dafür, dass das Produkt in unbeaufsichtigtem Zustand nicht funktioniert oder geladen wird.
- Das Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden.
- Personen mit einer Kontraindikation sollten das Produkt nach Rücksprache mit einem Arzt verwenden.
- Das Gerät hat eine Heizfläche, Personen, die nicht hitzeempfindlich sind, müssen darauf achten.



waste separately for special treatment is necessary.

**ENTSORGUNG:** Dieses Produkt darf nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Eine getrennte Sammlung solcher Abfälle zur speziellen Behandlung ist erforderlich.

Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Dieses Produkt muss an einer autorisierten Stelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten entsorgt werden.

Durch das Sammeln und Recyceln von Abfällen tragen Sie dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen, und stellen sicher, dass das Produkt auf umweltfreundliche und gesunde Weise entsorgt wird.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung versorgt werden, die der Kennzeichnung auf dem Gerät entspricht.
- Setzen Sie das Gerät oder den Akku nicht zu hohen Temperaturen aus.
- Dieses Gerät enthält Akkus, die nicht austauschbar sind. Wenn der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Hitzeunempfindliche Personen müssen bei der Verwendung des Geräts vorsichtig sein.