


# 7MAGIC Elektrische Schallzahnbürste

D26

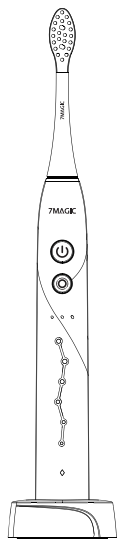

Bedienungsanleitung

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

## Angelegenheiten brauchen Aufmerksamkeit

### Verbieten

- Laden Sie das Gerät nicht im Badezimmer auf. Platzieren Sie das Ladegerät nicht in einem Wasserbehälter, über oder in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens usw.
- Die Batterie kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden, sondern nur durch autorisiertes Personal durch unser firmeneigenes Kundendienstzentrum. Der Austausch des Produkts ist nicht durch Laien gestattet.

### Warnung

- Um die Sicherheit zu gewährleisten, verwenden Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren mit Behinderungen, geistigen oder sensorischen Beeinträchtigungen, denen es an einschlägiger Erfahrung und Wissen mangelt, dieses Produkt nur unter Aufsicht oder Anleitung. Erlauben Sie Kindern nicht, unbeaufsichtigte Tätigkeiten zur Reinigung und Wartung des Produkts durchzuführen und seine Kabel sollten außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahrt werden.

1

### Hinweis



- Bei der ersten Verwendung dieses Produkts kommt es aufgrund der Hochgeschwindigkeitsvibration der Borsten bei manchen Menschen zu Zahnreizungen oder Kribbeln, und sogar am Zahnfleisch kann es gelegentlich zu leichten Blutungen oder Beschwerden kommen, was ein normales Phänomen ist.
- Sollte dieser Zustand nach zweiwöchiger kontinuierlicher Anwendung immer noch auftreten, stellen Sie bitte die Verwendung dieses Produkts ein und wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.
- Wenn Sie sich kürzlich einer Mund- oder Zahnfleischoperation unterzogen haben, an Zahnproblemen leiden oder zwei Monate lang eine ausgedehnte orale Behandlung hatten, konsultieren Sie bitte Ihren Zahnarzt, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Wenn Sie Schmerzen verspüren, beenden Sie bitte die Verwendung dieses Produkts und wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.
- Wenn die Zahnbürste längere Zeit nicht verwendet wird und das Licht beim erneuten Aufladen nicht leuchtet, warten Sie bitte 6–10 Minuten geduldig und kehren Sie dann zum Normalbetrieb zurück.

2

- Beim Laden fühlt sich das Zahnbürstengehäuse leicht heiß an, was ein normales Phänomen ist. Wenn es sich heiß anfühlt, schalten Sie bitte sofort den Strom aus und bringen Sie es zur Überprüfung zu unserem autorisierten Kundendienstzentrum.
- Dieses Produkt ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt und kann nicht an Zahnärzte und weitere Patienten
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Stellen Sie die Zahnbürste nicht direkt ins Sonnenlicht. Sie sollte bei Raumtemperatur oder an einem trockenen, belüfteten Ort gelagert werden.

3

### Produktbeschreibung

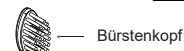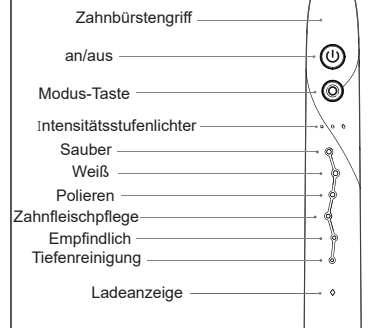


4

### (Erinnerung):

Produkt, Zubehör, Benutzeroberfläche und andere Abbildungen im Handbuch sind schematische Diagramme und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -Upgrades können die Produkte geringfügige Unterschiede zwischen dem tatsächlichen Produkt und dem schematischen Diagramm aufweisen. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Produkte.

## GEBRAUCHSANLEITUNG


Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Bürstenkopf und Griff richtig zusammengesetzt sind.

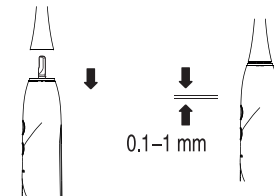

Schritt 2: Befeuchten Sie den Bürstenkopf und drücken Sie ihn zusammen

5

Tragen Sie die Zahnpasta auf die Borsten auf.

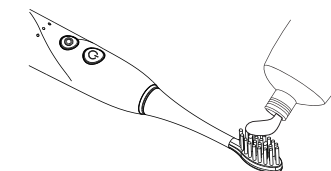

Schritt 3: Starten/Moduswechsel/Herunterfahren.

- 1 Einschalten: Tippen Sie im ausgeschalteten Zustand auf die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Modusschalter: Ein-/Aus-Zustand, drücken Sie kurz die Modustaste und die Zahnbürste wechselt nacheinander in verschiedene Putzmodi;
- 3 Modusumschaltung: Ein-/Aus-Zustand, langes Drücken der Modustaste für 1,5 Sekunden, der Arbeitsmodus wird zwischen schwach, mittel und stark umgeschaltet;

6

☻ Umweltfreundlicher Nutzungszeitraum

- 1 Das Symbol stellt eine 10-jährige umweltfreundliche Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum dar, d.
- 2 Das Symbol deckt alle im Luftreiniger enthaltenen Zubehörteile ab:
- 3 Bringen Sie das Produkt nach 10 Jahren umweltfreundlicher Nutzung zu einer Sammelstelle zum Recycling.

Sie können Ihren bequemsten Putzmodus wählen:

Diese Zahnbürste verfügt über 6 Modi (jeder Modus mit drei Intensitäten: stark, mittel, schwach);

- Sauber: für die meisten Menschen geeignet;

- Weiß: geeignet für Rauchflecken, Teeflecken und andere durch schwarze und gelbe Pigmente verursachte Zahnverfärbungen;

- Polnisch: geeignet für Menschen mit Zahnstein und Zahnstein;

- Zahnfleischpflege: geeignet für Menschen mit Zahnfleischbluten;

- Empfindlich: geeignet für zahnfleisch- und zahnempfindliche Personen;

- Tiefenreinigung: Menschen mit Zahnstein, Zahnstein und Zahnfleischbluten.

7

### Turn off

1. Tippen Sie im Betriebszustand auf die Ein-/Aus-Taste, um in den Abschaltzustand zu gelangen.
2. Nach 3 Sekunden Arbeit wird beim Aufrufen des Herunterfahrens der Produktspeicher vor dem Herunterfahren in den Modus „Stark“ oder „Schwach“ und beim nächsten Mal in den Standard-Arbeitsmodus „Stark“ oder „Schwach“ geändert.
3. Nach jedem Herunterfahren leuchtet die Kontrollleuchte bei jedem funktionierenden Modell 2 Sekunden lang und zeigt die

### Schritt 4: Zähne richtig putzen

1. Platzieren Sie die Borsten in einem 45-Grad-Winkel zum Zahnfleischrand und beginnen Sie langsam im Kreis. Reiben Sie die Zahnbürste vorsichtig an der Stelle zwischen Zahnwurzel und Zähnen.



8

2. Bewegen Sie den Bürstenkopf weiter, um den gesamten Zahn zu reinigen;



3. Während des Putzens macht der Vibrationseffekt der Zahnbürste alle 30 Sekunden eine kurze Pause und fordert Sie auf, die Putzposition zu ändern.

4. 2-3 Minuten ist die beste Zeit zum Zähneputzen. Automatische Abschaltung nach 2 Minuten. Wenn Sie Ihre Zähne noch putzen müssen, schalten Sie sie bitte ein, um fortzufahren.

### Schritt 5: Reinigen Sie den Bürstenkopf.

1. Reinigen Sie nach dem Zähneputzen die Borsten des Bürstenkopfes unter fließendem, klarem Wasser
2. Nach der Reinigung des Bürstenkopfes stellen Sie die elektrische Zahnbürste bitte an einen trockenen und kühlen Ort.



☼ Der Zahnarzt empfiehlt, den Bürstenkopf alle drei Monate zu wechseln.


9

## Leitfaden zur Wartung

### charging

Die rote Kontrollleuchte an der Unterseite der Zahnbürste blinkt, um Sie daran zu erinnern, dass der Strom der Zahnbürste nicht ausreicht. Bitte laden Sie sie rechtzeitig auf.

Lademethode wie unten dargestellt

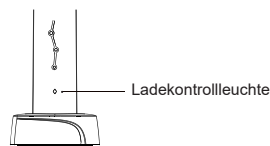

1. Ladeanzeige rot atmend blinkend: Laden;

2. Die Ladeanzeige leuchtet 30 Sekunden lang grün und erlischt dann. Der Akku ist vollständig aufgeladen.

3. Der Akku ist schwach (die Ladeanzeige blinkt rot oder lässt sich nicht einschalten). Schließen Sie das Ladekabel an und schalten Sie das Gerät ein. Der vollständige Ladevorgang dauert etwa 8 Stunden.

10

Hinweis: Die Original-Ladeleitung ist exklusiv für das Ladekabel D26 der elektrischen Schallzahnbürste, unterstützt kein Schnellladen für andere Geräte, unterstützt keine Datenübertragung.

## Grundinformationen

Produktname:  
Elektrische Schallzahnbürste  
Modell: D26

Ladestation  
Nennspannung: 5V  
Nennleistung: 2W

Gastgeber  
Nennspannung: 3,7 V  
Nennleistung: 2 W

Ladezeit: ca. 8 Stunden

Wasserdichtigkeitsgrad: IPX7  
Ursprünglich: China

⚠ Der Ladeständer kann nicht gewaschen oder mit Wasser eingeweicht werden.



11

## Fehlerbehebung

Problem	Mögliche	Ursache Lösung
Nicht möglich zu starten	Geringer Strom	Laden Sie Ihre elektrische Zahnbürste auf
BH kann den Griff nicht einfügen	Fremdmaterial im Einsteckloch des Bürstenkopfes	Entfernen Sie das Fremdmaterial
	Behandeln Sie die Antriebswelle mit Fremdkörpern	Fremdmaterial entfernen
Kurze Servicezeit	Unpassende Zahnbürstenköpfe	Kaufen Sie den offiziellen passenden Bürstenkopf
	Übernutzung	Aufladen an die Zahnbürste
Die Vibration des Bürstenkopfes ist weniger stark	Bürstenkopf und Griff sind nicht ordnungsgemäß montiert	Entfernen Sie das Fremdmaterial, setzen Sie den Bürstenkopf wieder zusammen.
	Niedrige Batterieleistung	Aufladen an die Zahnbürste

@7magic\_club

@7MagicClub

US: +1 909 808 1006

EU: +4921042865085

www.7magic.de

inktoner\_center@163.com

13