


Yes!

Contained within the Package

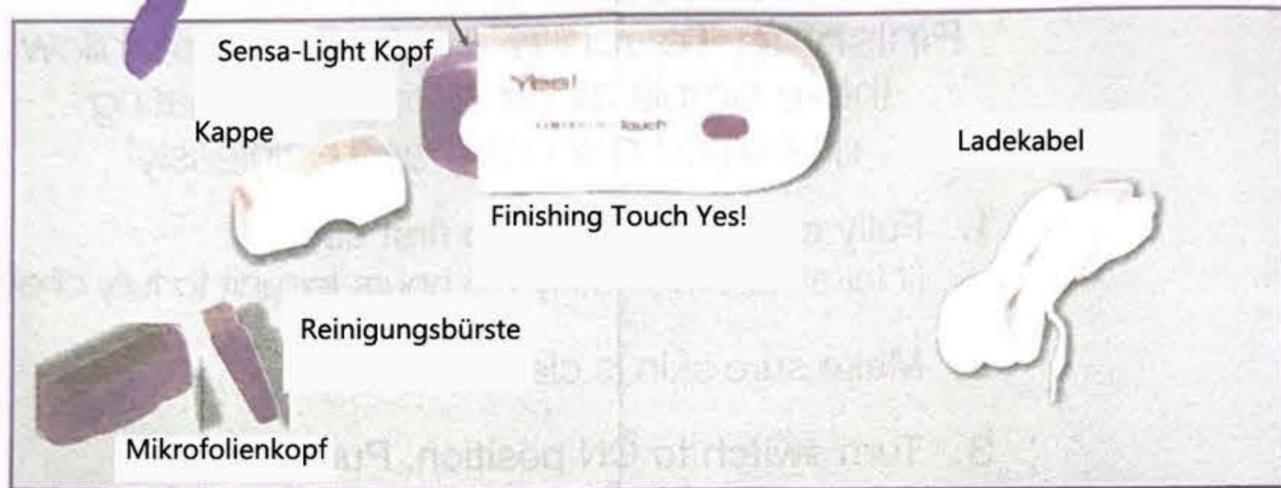

Akku aufladen




HINWEIS: Vor der ersten Verwendung FT Yes für ca. 2,5 Stunden vollständig aufladen.

FT Yes muss mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufgeladen werden, entweder mit dem mitgelieferten Netzteil oder einer alternativen USB-Quelle.

Während das Gerät aufgeladen wird, leuchtet die rote Lampe weiterhin.

Die grüne LED bleibt eingeschaltet, wenn das Gerät an das Netzteil angeschlossen und vollständig aufgeladen ist. Die Ladung hält etwa 60 Minuten lang.

Adapter and Charging Cable

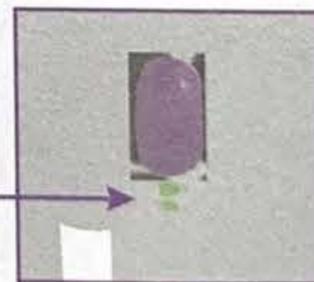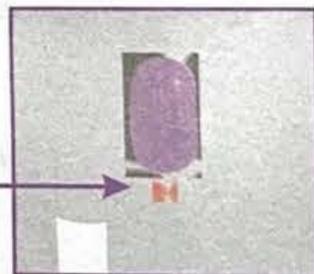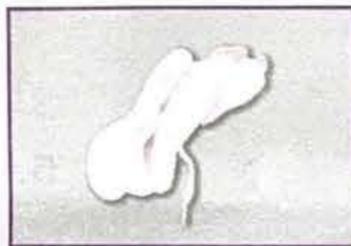

Gebrauchsanweisung:

Auf sauberer und völlig trockener Haut ohne Creme- oder Kosmetikrückstände anwenden.

1. Abdeckung abnehmen (siehe Bild 1).
2. Stellen Sie den Schalter auf die Position „ON“ (in Richtung Kopf) (siehe Abbildung 2).
3. Lila Sensa-Light Technology™™ und grüne LED blinken (siehe Bild 3).
4. Berühren Sie die Haut mit dem Sensa-Light™™ Kopf, um mit der Haarentfernung zu beginnen. Das Gerät beginnt erst zu arbeiten, wenn es Kontakt mit der Haut hat. Der violette Sensa-Light Technology™™ Kopf und die grüne Aktivierungs-LED leuchten, während das Gerät in Betrieb ist. Halten Sie das FT YES auf die Haut und gleiten Sie den Kopf des Geräts sanft in einem 45°-Winkel in entgegengesetzter Haarwuchsrichtung über die Haut (NICHT gerade nach oben und unten) (siehe Abbildung 4).

WÄHREND DER VERWENDUNG KEINEN ÜBERMÄSSIGEN DRUCK AUSÜBEN, um Haut- oder Geräteschäden zu vermeiden. Bei Hautreizungen die Anwendung abbrechen.

5. Wählen Sie für kurzes Haar, Stoppeln oder Ausbesserungen den Microfoil-Kopf (siehe Abbildung 5). Um optimale Ergebnisse mit dem Microfoil-Kopf zu erzielen, halten Sie das Gerät gerade nach oben und unten (NICHT in einem 45°-Winkel) und üben Sie LEICHTEN Druck aus (siehe Abbildung 6).

6. FT YES schaltet sich nach ca. 6 Sekunden aus. Die grüne LED blinkt wieder. Das Gerät schaltet sich automatisch wieder ein, wenn es mit der Haut in Kontakt kommt.

7. Wenn Sie Ihr FT Yes nicht mehr brauchen, schalten Sie den Schalter auf die Position „OFF“ (vom Kopf weg), decken Sie es ab und bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Ersatz- und Mikrofolienköpfe

Um die Köpfe zu wechseln/austauschen, legen Sie Ihre Daumen auf die Rückseite des Geräts. Drücken Sie vorsichtig in Pfeilrichtung nach vorne und nach oben. Der Kopf wird sich vom Körper lösen. (Bild 7)

Richten Sie den neuen Kopf am Pfeil auf der Rückseite des Geräts aus und drücken Sie. Der Kopf rastet ein. (Bild 8)

