


MICRO- DERMABRASION MACHINE

BEDIENUNGSANLEITUNG

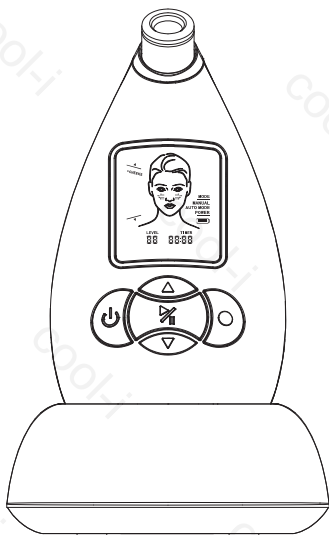

Finden Sie selbst einen besseren


KATALOG






1. TECHNISCHE DATEN	01
2. PACKUNGSINHALT/	01
GERÄTETEILE	
3. SICHERHEIT	02
3.1 Korrekte Nutzung	02
3.2 SICHERHEITSHINWEISE	02
4 AUFLADEN	03
5 BETRIEB	04
5.1 BEHANDLUNGSTIPPS	04
5.2 ANBRINGEN DER SPITZE	04
5.3 BETRIEB IM AUTOMODUS	05
5.4 BETRIEB IM MANUELLEN MODUS	05
6 REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG	06
6.1 REINIGUNG DER SPITZE	06
6.2 AUSTAUSCH DES FILTERS	06
6.3 AUSTAUSCH DER DICHTUNG	06
7 GARANTIE	07

1 Technische Daten

Modell: ND-9001
Leistungsaufnahme: 100–240 V, ~50/60 Hz, 0.2 A
Schutzklasse: -Device: III -USB adapter: II
Leistung: 5 V DC, 0.5 A
Abmessung (H × B × T) - Gerät: 90*90*145mm
Einheitsgewicht (einschließlich Farbkasten): 750 g

2 Verpackungsinhalt/Geräteteile

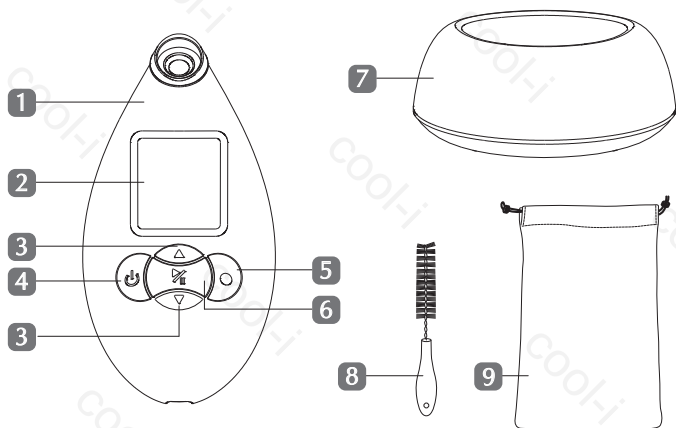

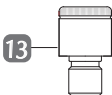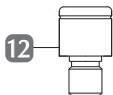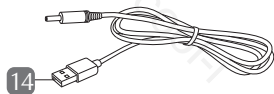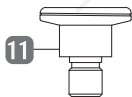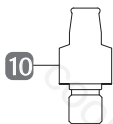

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Gerät | 9 Beutel |
| 2 LCD Bildschirm | 10 Feine Diamantspitze |
| 3 Steuertasten | 11 Körperdiamantspitze (optional) |
| 4 Power-Taste | 12 Massagespitze (optional) |
| 5 Modus-Taste | 13 Standard-Diamantspitze |
| 6 Start/Pause-Taste | 14 USB Kabel |
| 7 Stehen/Laden Base | 15 Filter×20 |
| 8 Reinigungsbürste | 16 Dichtungen×2 |

3 Sicherheit

3.1 Korrekte Nutzung

Das Gerät wurde ausschließlich entwickelt, um Ihre Haut zu peelen und zu stimulieren Wachstum gesunder neuer Zellen und stimulieren die Durchblutung der Haut für a glatter und frischer Teint. Mit hervorragendem Heben und Reparieren Funktion, es strafft die elastischen Fasern und reduziert die feinen Äderchen, um die hautstraff, feuchtigkeitsspendend und brillant.

3.2 Sicherheitshinweise

Vermeiden Sie die Verwendung, wenn es eine Wunde im Gesicht gibt. Halten Sie die Tipps in Bewegung die Haut. Bleiben Sie nicht länger als zwei Sekunden an einem Ort. Dieses Produkt ist für den persönlichen Gebrauch und wird nicht zum Teilen empfohlen. Schlagen Sie vor, es einmal zu verwenden pro Woche, höchstens zweimal.

4 Laden

Option 1:

1. Stellen Sie das Gerät auf die Ladestation Basis, indem Sie das Loch in seinem Boden anbringen den Stift der Ladestation.

2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Ladestation und verbinden Sie es mit Ihrem USB-Adapter.

3. Schließen Sie Ihren USB-Adapter an eine Steckdose an Steckdose.


Option 2:

1. Schließen Sie das Loch an der Unterseite an der


Gerät mit USB-Kabel

2. Schließen Sie das USB-Kabel an Ihren USB an Adapter.


3. Schließen Sie Ihren USB-Adapter an eine Steckdose an Steckdose

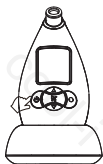


Schalter ausschalten

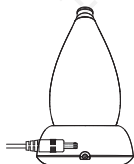

Legen Sie das USB-Kabel ein zum Loch

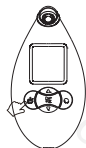

Schalter ausschalten

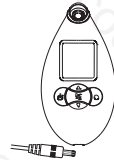

Legen Sie das USB-Kabel ein zum Loch

5 Betrieb

5.1 Behandlungstipps

SELECT A SUITABLE TIP FOR YOUR TREATMENTS:



Standard: Feine Diamantspitze: Die feinere Behandlungsspitze für die empfindliche und schwer zugängliche Bereiche des Gesichts, wie Augen, Nase und Mund.



Standard: Standard-Diamantspitze: Die Standard-Behandlungsspitze für alle Hauttypen zum Entfernen abgestorbener Hautzellen und Stimulieren der Zelle Nachwachsen und die Durchblutung. Für Gesicht und Hals geeignet.



Optional: Massagespitze: Zum Massieren der Haut und Stimulieren der Haut Blutkreislauf. Für alle Hauttypen geeignet.



Optional: Body Diamond Tip: die größere Behandlungsspitze für Körperpartien wie Arme und Beine.

5.2 Anbringen der Spitze

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie oder anschließen Spitze wechseln.
 - Stellen Sie immer sicher, dass ein Filter und eine Dichtung vorhanden sind . Siehe Kapitel „Ersetzen des Filters“ oder „Ersetzen der Dichtung“ für den Austausch, falls erforderlich.
1. Bringen Sie die passende Spitze am Gerät an.
 2. Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass die Spitze fest sitzt.

5.3 Betrieb im Auto-Modus

Der Auto-Modus ist nur für Gesichtsbehandlungen.

1. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die Modus-Taste, um „Auto-Modus“ auszuwählen.
3. Drücken Sie die Steuertasten, um die gewünschte Intensitätsstufe auszuwählen.

Stufe 1 ist die niedrigste Stufe; während Stufe 3 die höchste Stufe ist.

4. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um mit der Behandlung zu beginnen.

5.4 Betrieb im manuellen Modus

Der manuelle Modus eignet sich sowohl für Gesichts- als auch für Körperbehandlungen. Dieser Modus ermöglicht es Ihnen

Befolgen Sie Ihr eigenes Behandlungsschema. Es wird Sie nicht über die Behandlung informieren

Zeiten, Gebiete oder geben Ihnen Anweisungen zur Verwendung. Der Timer wird jedoch

Verfolgen Sie die vergangene Behandlungszeit.

1. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die Modustaste, um „Manuell“ auszuwählen.
3. Drücken Sie die Steuertasten, um die gewünschte Intensitätsstufe auszuwählen. Stufe 1 ist die niedrigste Stufe; während Stufe 3 die höchste Stufe ist.
4. Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um mit der Behandlung zu beginnen.

6 Reinigung und Instandhaltung

6.1 Spitze reinigen

1. Entfernen Sie die Spitze von der Maschine und reinigen Sie vorsichtig ihre Innenseite mit dem

Bürsten Sie nach jedem Gebrauch, um abgestorbene Hautzellen und Ablagerungen zu entfernen.

2. Wischen Sie die Außenseite der Spitzen gründlich mit einem feuchten Tuch ab.

3. Lassen Sie es vollständig trocknen.

6.2 Austausch des Filters

Für optimale Ergebnisse sollte der Filter regelmäßig ausgetauscht werden. Stellen Sie immer sicher, dass der Filter vorhanden ist, um Partikel wie abgestorbene Hautzellen oder Ablagerungen zu verhindern nicht in den Motor eindringen.

1. Entfernen Sie vorsichtig die Spitze und entsorgen Sie den Filter.

2. Setzen Sie einen neuen Filter ein und setzen Sie die Spitze wieder ein.

6.3 Austausch der Dichtung

Die Dichtung sollte nur ausgetauscht werden, wenn sie beschädigt oder verschlissen ist. Stellen Sie immer sicher, dass die Dichtung vorhanden ist, sonst funktioniert das Gerät nicht richtig.

1. Entfernen Sie vorsichtig die Spitze und entsorgen Sie die Dichtung.

2. Ersetzen Sie sie durch eine neue Dichtung und setzen Sie die Spitze wieder ein

7 Garantie

Vielen Dank, dass Sie sich für das Mikrodermabrasionsgerät entschieden haben. Ab dem Zeitpunkt der Kauf, können Sie 1 Jahr Garantieservice genießen. Während der Garantiezeit. Bei technischen Defekten wird das Produkt kostenlos repariert. Ausfälle durch unsachgemäßen Gebrauch, Selbstreparatur, unsachgemäßen Transport usw. verursacht wurden, sind es nicht von der Garantie abgedeckt.



Lyunhing GmbH

George-Washington-Str.181,
68309 Mannheim Germany
info@cool-i.de



FC CE RoHS