



# SONIC THERMO FACIAL BRUSH & FACE-LIFTER | 8 IN 1

 Skin Scan & Personal Routine Guide

 SmartSonic Pulsation Technology

 MicroCurrent Face-lift Technology

 Ultra-Gentle Contouring & Firming Spheres

 Pore-Opening Deep Warming Technology

 Youthful Glow Massage Technology

 Ultra Hygienic Deep Cleansing

 Eye-Nose Area Targeted Design

**Pro Level**  
Reinigung mit Wärme  
Straffung  
Lifting



**Create your personal Skincare Routine**  
and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH  
Leipziger Platz 18  
10117 Berlin Germany  
info@geske.com, www.geske.com



## DAS SOLLTEST DU WISSEN

**TIPP 1**

Nutze immer unser feuchtigkeitsspendendes MicroCurrent Gel, um den Effekt Deiner Session zu intensivieren. Nur bei Verwendung unseres MicroCurrent Gels bei allen Lifting-Anwendungen, ist sichergestellt, dass Du die bestmöglichen Ergebnisse erzielst.

**TIPP 2**

Im Reinigungsmodus zeigt Dir ein Impuls alle 15 Sekunden an, dass es an der Zeit ist, zum nächsten Bereich zu wechseln.

**TIPP 3**

Reinige Dein Gerät nach jedem Gebrauch mit einem GESKE-Gerätereiniger.



**Tiefenwärmeperlen**

Wärmende Reinigung




**Ein/Aus**

1-2 Sekunden gedrückt halten



**Sonic Pulsations**

18 Intensitätsstufen

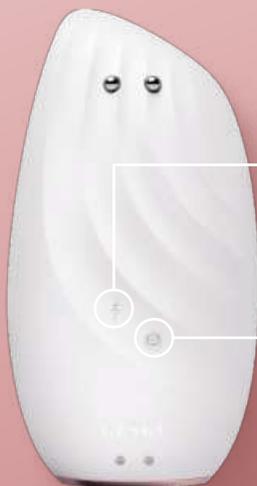

**Mikrostrom**

5 Intensitätsstufen



**Wärmetechnologie**

Porenöffnend

## DIE ERSTEN SCHRITTE

Ausgestattet mit der MicroCurrent Face-Lift Technology ist unsere SmartAppGuided™ Sonic Thermo Facial Brush & Face-Lifter | 8 in 1 auf eine ganzheitliche und hochwirksame Hautpflege zugeschnitten.



### WÄRMENDE GESICHTSREINIGUNG

#### VORBEREITUNG

Befeuchte Dein Gesicht mit Wasser und trage einen GESKE-Reiniger auf die Haut oder die Bürste auf. GESKE-Reiniger entfernen sanft alle Ablagerungen aus den Tiefen der Poren.

#### EINSCHALTEN

Aktiviere die SmartSonic Pulsation Technology, indem Du den Powerknopf 2 Sekunden lang gedrückt hältst. Wähle die gewünschte Intensität mit den +/- Tasten. Drücke dann auf das Sonnensymbol, um die 12 Thermo Deep Warming Pearls einzuschalten.

#### REINIGUNG

Bewege die Bürste in sanft kreisenden Bewegungen über Wangen, Nase, Augenpartie, Stirn und Kinn und nimm Dir 15 Sekunden Zeit, um jeden Bereich zu reinigen. Achte auf den Haaransatz, um dort festsitzende Schmutzpartikel und Schweiß gründlich zu entfernen.

#### AUSSCHALTEN

Schalte das Gerät aus, indem Du den Powerknopf 2 Sekunden lang gedrückt hältst. Spüle Dein Gesicht und das Gerät mit Wasser ab. Reinige das Gerät nach jedem Gebrauch mit einem GESKE-Gerätereiniger.



### GESICHTSLIFTING

#### VORBEREITUNG

Starte mit gereinigter Haut. Trage unser speziell formuliertes feuchtigkeitsspendendes MicroCurrent Gel auf.

#### EINSCHALTEN

Schalte die SmartSonic Pulsation Technology ein, indem Du den Powerknopf 2 Sekunden lang gedrückt hältst. Wähle die gewünschte Intensität mit den +/- Tasten. Aktiviere anschließend die MicroCurrent Face-Lift-Technologie, indem Du auf das Blitzsymbol drückst.

#### REINIGUNG

Platziere die Ultra-Gentle Contouring & Firming Spheres neben der Nase, direkt unter den Augen. Gleite mit dem Gerät um die Augen, über die Lachfalten und entlang der Kieferlinie und wiederhole jede Bewegung mehrmals auf beiden Seiten Deines Gesichts.

#### AUSSCHALTEN

Schalte das Gerät aus, indem Du den Powerknopf 2 Sekunden lang gedrückt hältst, und spüle es dann mit Wasser ab. Reinige Dein Gerät nach jedem Gebrauch mit einem GESKE-Gerätereiniger.

### Erstelle Deine persönliche Hautpflegeroutine

und downloade die GESKE App



Innovative  
App



Video  
Guided



KI-gestützter  
Skin Scan



Experten  
Tipps



Personalisierte  
Routine



In App  
Belohnungen



## WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN. VOR GEBRAUCH LESEN.

Lies vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitsinformationen. Bewahre beide Gebrauchsanweisungen auf.

### Dein Produkt auf einen Blick

Dein Produkt ist eine multifunktionale Gesichtsbürste. Sie kann sicher bis zu 3 Mal täglich verwendet werden. Bitte nicht häufiger verwenden. Bitte verwende die MicroCurrent-Lifting-Modi nicht mehr als einmal täglich. Befolge für maximale Sicherheit und optimale Ergebnisse immer Deine personalisierte Hautpflegeroutine, die von der GESKE App erstellt wurde.

### Verwendungshinweise

Bevor Du das Gerät zum ersten Mal benutzt, solltest Du diese Sicherheitsbrochüre und die Schnellstartanleitung vollständig lesen. Beide Handbücher sollten aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen zum sicheren Gebrauch sowie zu technischen und rechtlichen Informationen enthalten. Das Gerät ist ein Hautpflegeprodukt für Erwachsene, kein Medizinprodukt und kein Produkt mit medizinischen oder sonstigen heilenden Eigenschaften. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Beachtung der Kurzanleitung, der hier aufgeführten Warnhinweise und der personalisierten Anwendungsempfehlungen der GESKE App. Das Gerät ist wiederaufladbar und ermöglicht einen bequemen und kabellosen Betrieb. Es muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Alles, was Du dazu benötigst, ist das mitgelieferte USB-Ladekabel. Das erste Aufladen kann bis zu acht Stunden dauern. Das Kabel muss mit den beiden magnetischen Kontakten an den dafür vorgesehenen Metallkontaktstellen des Geräts andocken. Wenn sich das Ladekabel nicht von selbst verbindet, schließe es an das Stromnetz an und warte. Dadurch wird die magnetische Wirkung reaktiviert und die Kontakte verbinden sich automatisch. Achte darauf, dass die Magnetkontakte nur an den Kontaktpunkten des Geräts anliegen und nicht an anderen metallischen Oberflächen.

### Verwendungszweck

Verwendungszweck: Unser Geske Sonic Thermo Facial Brush & Face-Lifter Gerät ist ein rezeptfreies Gerät für den Heimgebrauch, das für die thermische Gesichtereinigung von Schmutzpartikeln, überschüssigem Talg und abgestorbener Haut und die Stimulation der Gesichtshaut mit MicroCurrent Technologie bestimmt ist.

### Technische Daten

**Materialien:** ABS, Silikon, Aluminiumlegierung, Messing | **Lagertemperatur:** -5 +60 °C/23-140 °F | **Batterie:** Li-Ion 3.7V | **Batteriekapazität:** 1200 mAh | **Maximaler Ladestrom:** 440 mA | **Ladespannung:** 5V | **Ladezeit:** ca. 4 Stunden | **Betriebszeit** variiert je nach aktivierten Technologien & Intensitäten. | **Schnittstelle:** USB | **Programm:** Vibration: 18 Intensitätsstufen, Heizung, MicroCurrent: 5 Intensitätsstufen

## Das Produkt ist nicht für die Verwendung unter den folgenden Bedingungen geeignet:

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Hitze (z. B. Hitze-Urtikaria). Wenn während der Anwendung ein (zu) starkes Hitzegefühl auftritt, muss die Anwendung sofort abgebrochen werden. Wenn Du ein implantiertes medizinisches Gerät oder ein anderes elektronisches Gerät wie z. B. einen Herzschrittmacher trägst, nach einer Laserbehandlung oder einem chemischen Peeling und nach kosmetischen Eingriffen im Gesicht.

## In den folgenden Fällen ist eine Rücksprache mit einem Arzt erforderlich, um zu klären, ob das Produkt für Dich geeignet ist:

Wenn Du eine Herzerkrankung hast oder schwanger bist. Die Sicherheit der Anwendung während der Schwangerschaft ist nicht erwiesen.

### Weitere Informationen zur Anwendung:

Vor der Anwendung der Microcurrent Face-Lift Technology muss das Produkt vollständig trocken sein. Verwende die Microcurrent Face-Lift Technology nur in Kombination mit dem GESKE Hydrating MicroCurrent Gel. Verwenden die Microcurrent-Funktion nicht im Brustbereich, zu dicht an den Augen, in der Mitte des Halses, im Genital- und Leistenbereich sowie auf geröteter und entzündeter Haut, über Muttermalen und vergrößerten Blutgefäßen. Über die Langzeitwirkungen des Mikrostroms ist nichts bekannt. Als Folge der Stimulation des Sehnerve kann während der Anwendung ein Blinken wahrgenommen werden. Wenn dies auch nach der Anwendung des Produkts auftritt, solltest Du einen Arzt aufsuchen. Während der Anwendung kann ein leichtes Kribbeln auftreten. Verringere die Intensität des Mikrostroms, um das Kribbeln zu reduzieren oder komplett zu beenden. Elektronische Überwachungsgeräte funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß, während das Gerät in Gebrauch ist. Verwende das Produkt nicht beim Autofahren oder beim Bedienen schwerer Maschinen. Stecke keine scharfen Gegenstände in die Öffnungen des Geräts. Das Produkt darf nur mit einem Schutzkleinspannungsadapter (SELV) verwendet werden. Wir empfehlen die Verwendung von Standard-Netzteilen nach IEC60335 zum Aufladen des Geräts. Verwende das Produkt nicht auf gereizter oder verletzter Haut oder auf offenen Wunden (nach jeder Art von Verletzung), bei bakteriellen oder viralen Infektionen der Haut (sowohl im Anwendungsbereich als auch anderswo). Dieses Produkt ist nicht zur Behandlung von Hautkrankheiten oder -beschwerden bestimmt. Wenn Du unter Hautkrankheiten leidest, konsultiere Deinen Hautarzt, bevor Du dieses Produkt nutzt. Verwende das Produkt nicht, wenn es 1) untypisch warm, 2) mechanisch beschädigt oder verformt, 3) verformt ist. Wenn während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, brich die Anwendung ab und suche einen Arzt auf. Die Augenpartie ist sehr empfindlich. Sei in diesem Bereich besonders vorsichtig und vermeide jeden Kontakt des Produkts mit den Augenlidern oder dem Auge selbst. Verwende das Produkt nur wie in Deiner persönlichen Routine empfohlen. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir Dir, Dein Produkt nicht mit anderen Personen zu teilen. Das Produkt ist für die kosmetische Anwendung auf Gesicht, Hals und Dekolleté bestimmt. GESKE übernimmt keine Haftung für schädliche Folgen, die sich aus der Anwendung an anderen Körperstellen oder sonstigem unsachgemäßen Gebrauch, Anschluss an ungeeignete Spannungsquellen, verunreinigte Leitfähigkeit oder Kugeln ergeben. Verweissere Dich vor dem Aufladen immer, dass Stecker und Steckdose vollständig trocken sind. Andernfalls kann es zu elektrischen Schlägen, einem Kurzschluss oder einem Brand kommen. Das Produkt darf nicht verwendet werden, während es an die Steckdose angeschlossen ist.

### Warnhinweise

- Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Verwendung!**  
Verwende das Produkt nur wie im Quick Start Guide und den Videoanleitungen beschrieben. Solltest Du noch offene Fragen haben, wende Dich an unseren Kundensupport unter support@geske.com.
- Verletzungsgefahr durch Brand/Entzündung!**  
Lösche das Produkt nicht mit Wasser. Wirf das Produkt nicht ins Feuer.
- Verletzungsgefahr durch defekte Akkus!**  
Durch unsachgemäße Behandlung können Akkus unkontrolliert exotherm reagieren. Entsorge das vollständige Produkt in einem solchen Fall sofort sachgerecht.
- Verletzungsgefahr bei Kindern!**  
Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verletzungsgefahr durch Stromschlag!**  
Flüssigkeit kann am Ladekreislauf Beschädigungen herbeiführen und Deine Gesundheit gefährden. Trenne das Produkt während der Reinigung vom Ladekabel/Stromkreis.
- Beschädigungsgefahr durch Magnetfelder!**  
Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z. B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwende das Produkt nicht direkt über dem Herzschrittmacher. Kontaktiere für weitere Informationen Deinen behandelnden Arzt. Bringe keine Karten mit Magnetstreifen (z. B. Kreditkarten) in die Nähe des Produktes, da diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können.
- Beschädigungsgefahr durch wechselnde Umgebungstemperaturen!**  
Wechselnde Umgebungstemperaturen (z. B. nach Transport) können zu Kondenswasserbildung führen. Nimm in diesem Fall das Produkt erst in Betrieb, wenn es sich an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat. Setze Dein Produkt nie direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze oder kochendem Wasser aus.
- Sichere Nutzung bis zu einer Umgebungstemperatur von 50°C/122 °F.**  
Beschädigungsgefahr durch zu langes Laden!
- Trenne nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromkreis.**
- Sicheres Laden bis zu einer Umgebungstemperatur von 45°C/113 °F.**
- \*Hersteller-Informationen nach § 18 Abs. 4 ElektroG. Nach dem deutschen Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) informieren wir Dich hiermit im Zusammenhang mit einem zukünftigen Recycling des vorliegenden Elektrogeräts wie folgt:**  
1. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll  
Erreicht das erworbene Produkt einmal das Ende der Betriebslebensdauer, so ist es als Altgerät nicht im Hausmüll zu entsorgen, sondern einem separaten Sammel- und Rückgabesystem zuzuführen.

- 2. Batterien, Akkus und Lampen  
Herausnehmbare Batterien oder Akkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vorher zerstörungsfrei zu entfernen und entsprechend der geltenden Recyclingvorschriften getrennt zu entsorgen. Dies gilt nicht für Altgeräte, welche einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

- 3. Möglichkeit der Rückgabe von Altgeräten  
Möglichkeit der Rückgabe von Altgeräten Du kannst Altgeräte unentgeltlich bei kommunalen Sammelstellen, dem Verkäufer des Produktes oder dem Hersteller abgeben. Zur Rücknahme verpflichtet sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte sowie Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei einem Online-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen. Verkäufer haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Verkäufern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Online-Vertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Verkäufer unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart pro Rückgabe. Als Hersteller sind wir an das Rücknahmesystem des Anbieters „take-e-back“ angeschlossen. Passende Rücknahmestellen findest du unter folgender URL: <https://www.take-e-back.de>

- 4. Datenschutz  
Soweit personenbezogene Daten auf dem Altgerät vorhanden sind, raten wir dazu, die Daten vor der Entsorgung zu löschen.

- 5. Bedeutung des Symbols der „durchgestrichenen Mülltonne“  
Das auf dem zu entsorgenden Elektro- und Elektronikgerät abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Produktlebensdauer nicht in den Hausmüll gehört, sondern getrennt eine Entsorgung für Elektro- und Elektronikgeräte zuzuführen ist.  
Hinweise zum Batteriegelsetz:  
Sichere Nutzung bis zu einer Umgebungstemperatur von 50°C/122 °F.  
Beschädigungsgefahr durch zu langes Laden!  
Trenne nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromkreis.  
Sicheres Laden bis zu einer Umgebungstemperatur von 45°C/113 °F.



**Hersteller-Informationen nach § 18 Abs. 4 ElektroG. Nach dem deutschen Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) informieren wir Dich hiermit im Zusammenhang mit einem zukünftigen Recycling des vorliegenden Elektrogeräts wie folgt:**

- 1. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll  
Erreicht das erworbene Produkt einmal das Ende der Betriebslebensdauer, so ist es als Altgerät nicht im Hausmüll zu entsorgen, sondern einem separaten Sammel- und Rückgabesystem zuzuführen.

- 2. Batterien, Akkus und Lampen  
Herausnehmbare Batterien oder Akkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vorher zerstörungsfrei zu entfernen und entsprechend der geltenden Recyclingvorschriften getrennt zu entsorgen. Dies gilt nicht für Altgeräte, welche einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

- 3. Möglichkeit der Rückgabe von Altgeräten  
Möglichkeit der Rückgabe von Altgeräten Du kannst Altgeräte unentgeltlich bei kommunalen Sammelstellen, dem Verkäufer des Produktes oder dem Hersteller abgeben. Zur Rücknahme verpflichtet sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte sowie Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei einem Online-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen. Verkäufer haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Verkäufern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Online-Vertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Verkäufer unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart pro Rückgabe. Als Hersteller sind wir an das Rücknahmesystem des Anbieters „take-e-back“ angeschlossen. Passende Rücknahmestellen findest du unter folgender URL: <https://www.take-e-back.de>

- 4. Datenschutz  
Soweit personenbezogene Daten auf dem Altgerät vorhanden sind, raten wir dazu, die Daten vor der Entsorgung zu löschen.

- 5. Bedeutung des Symbols der „durchgestrichenen Mülltonne“  
Das auf dem zu entsorgenden Elektro- und Elektronikgerät abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Produktlebensdauer nicht in den Hausmüll gehört, sondern getrennt eine Entsorgung für Elektro- und Elektronikgeräte zuzuführen ist.

### Hinweise zum Batteriegelsetz:

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Händler verpflichtet, Dich als Verbraucher auf folgendes hinzuweisen: Du bist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus zurückzugeben. Du kannst diese nach Gebrauch an uns zurücksenden, in einer kommunalen Sammelstelle oder unentgeltlich im Handel vor Ort zurückgeben. Die durchgestrichenen Mülltonnen bedeuten, dass eine Entsorgung von Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll erfolgen darf. Das chemische Zeichen darunter bedeutet im Einzelnen: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.



Die durchgestrichenen Mülltonnen bedeuten, dass eine Entsorgung von Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll erfolgen darf. Das chemische Zeichen darunter bedeutet im Einzelnen:

Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.

### Ergänzende Hinweise zu Lithiumbatterien/Akkus:

Lithium Batterien oder Akkus erkennst Du am chemischen Zeichen "Li" Bitte achte darauf, dass bei der Rücksendung von Lithiumbatterien oder -akkus oder der Abgabe an Sammelgefäße für Altbatterien beim Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern die Batterien oder Akkus vollständig entladen sind und die mit den Zeichen „+“ und „-“ gekennzeichneten Kontaktfächen mit Klebeband von Dir isoliert werden, um jegliche Brandgefahr zu vermeiden.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin erklärt, dass alle elektronischen Produkte im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der anwendbaren europäischen Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU stehen.