

Dr. pen



®

Auto Microneedle System: 



Benutzerhandbuch M8S 

Bitte lesen Sie vor Gebrauch das Handbuch



Beschreibung des Produkts	2
Name der Teile	3
Einführung in den drahtlosen Modus.....	4
So laden Sie den Akku auf	4
Anbringen der Nadelpatrone	5
Einstellen der Nadellänge	6
Visualizzazione e regolazione di velocità	6
Anzeige und Einstellung der Drehzahl	7
Einführung der Nadelpatrone	8
Referenztabelle	8
Vorkehrungen	9
Garantie	10



Das Gerät besteht aus einem elektrischen Microneedling-Stift und Einweg-Nadelpatronen. In dieser Anleitung wird die Verwendung der einzelnen Komponenten im Detail erklärt.

Das Gerät wird verwendet, um das Erscheinungsbild der Haut zu verbessern und Zeichen der Hautalterung zu reduzieren. Es dient dazu, die Haut mit Mikronadeln zur Kollagen- und Elastinproduktion zu stimulieren. Die Mikrokanäle, die das Gerät in der oberflächlichen Haut erzeugt, helfen auch bei der Aufnahme von Hautseren.

Es gibt 7 verschiedene Arten von Nadelkassetten für das Gerät. Diese Patronen können für die Micro-Needling-Behandlung und die Nano-Needling-Behandlung verwendet werden.





Dieses Gerät wird durch eine eingebaute Batterie betrieben. Es kann kabellos arbeiten. Das Netzkabel und der Adapter werden zum Aufladen des Geräts verwendet, wenn der Akku leer ist.




So laden Sie den Akku auf


Schließen Sie das Stromkabel mit einem Adapter an die Stromschnittstelle des Geräts an und schließen Sie den Adapter an eine Live -Wechselstromauslass, um das Gerät aufzuladen. Das Laden wird etwa 2 Stunden abgeschlossen sein.


Die Anzahl der Geschwindigkeit blinkt langsam, wenn die Batteriekapazität 10% verlassen wird.

Der Stift schaltet sich nach 1 Minute automatisch aus, während die Anzahl der Geschwindigkeiten schnell blinkt.




Der Stift zeigt "  " nach dem Neustart, wenn er aufgrund eines niedrigen Akkus automatisch ausgeschaltet wird.

Die Stiftausstellung spinnt "  " beim Laden

Die Stiftausstellung "  " wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.




1. Nehmen Sie die Nadelpatrone aus der sterilisierten Verpackung.
(Fig1)

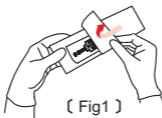

2. Suchen Sie die "U"-förmige Aussparung an der Patrone, richten Sie die Aussparung an dem Punkt auf der Unterseite des Geräts aus und drücken Sie die Patrone leicht in das Gerät.

(Fig2)

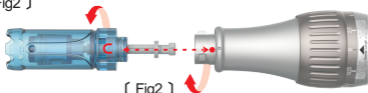

3. Verriegeln Sie die Nadelpatrone am Gerät, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.
4. Drehen Sie die Nadelpatrone gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie heraus, wenn Sie die Patrone entfernen möchten.
5. Nehmen Sie das Gerät nur in Betrieb, wenn die Nadelpatrone korrekt montiert ist. Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.

Vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbau oder der Demontage der Nadelpatrone, dass die U-förmige Spitze der Nadelpatrone mit der Spitze des Handstücks ausgerichtet ist.

Die Nadelpatrone ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Entsorgen Sie die gebrauchten Nadelpatronen in einem Abfallbehälter. Wenn die Nadelpatrone während der Installation versehentlich verunreinigt wird (z. B. auf den Boden gefallen, Verpackung geöffnet/beschädigt. Die Nadelpatrone kann verunreinigt sein). Bitte entsorgen Sie sie und besorgen Sie eine neue Nadelpatrone.



Einstellen der Nadellänge

6

DE

Verwenden Sie eine geeignete Nadelgröße je nach Behandlungsbereichen und Hautproblemen

Stellen Sie die Tiefe der Nadel durch Drehen des Skaleneinstellrings ein. Die Nadeltiefe sollte nach der Inbetriebnahme des Stiftes eingestellt werden. Die Skalenummer, die mit dem Skaleneinstellring übereinstimmt, zeigt die aktuelle Nadeltiefe an.

[Fig3]

Im Uhrzeigersinn

Die Tiefe wird
kürzer sein



Gegen den
Uhrzeigersinn

Die Tiefe wird
länger sein



[Fig3]



Geschwindigkeitsanzeige und-einstellung

Geschwindigkeitsanzeige



6 Geschwindigkeitsanpassung

Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Nach dem Starten des Geräts ändert sich die Geschwindigkeit bei jedem Drücken der Einschalttaste einmal.



Verfügbare Nadelkassetten



12 Nadeln



24 Nadeln



36 Nadeln



42 Nadeln

R NANO
NadelnS NANO
Nadeln

18 Nadeln



Achtung

Die Nadelpatrone ist ein Einwegartikel.

Die Nadelpatrone ist nur für den Dr.pen M8S bestimmt.

Bitte sterilisieren Sie die Nadelpatrone vor dem Gebrauch für einige Minuten mit 75%igem Alkohol.

Bitte entsorgen Sie die gebrauchte Nadelpatrone in den Müllcontainer.





REGION	NADELTIEFE (mm)
Stirn	0.25 - 0.5
Zwischen den Augenbrauen	0.25 - 0.5
Nase	0.25
Rund um den Orbitalrand	0.25
Wange und Kinn	0.5 - 1.0
Chirurgische und Narbe Maximum	2.5



Spezifikation

Produktname:

Auto-Stempel Motorisierte Meso-Maschine

Modellname: Dr.pen M8S

Adapter

Eingang: 100-240V 50-60HZ Ausgang: 5V \approx 1A

Gewicht der Verpackung: 390 g

Verpackungsgröße: 169*123*56 mm

Packliste

Artikel	Menge
Handstück	1 Stück
Adapter	1 Stück
Handbuch	1 Stück
Stromkabel	1 Stück
Nadelpatrone	10 Stück



	Bitte lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch und befolgen Sie sie wie beschrieben.		
	Wenden Sie es nicht auf die Person wie folgt: 1. die akute Krankheit oder blutige Krankheit über 38 hat . 2. wer eine Allergie und Hämophilie hat . 3. wer Melanose im Gesicht hat . 4. wer eine hohe innere Hitze hat . 5. wer regelmäßig ins Krankenhaus muss . 6. wer Medikamente einnimmt . 7. wer unter 12 Jahre alt ist .		
	Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer anderen Spannung als AC 220V. Dies kann zu Bränden oder Fehlfunktionen führen.		
	Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Orten mit hohen Temperaturen, Staub oder Feuchtigkeit (in der Nähe des Luftbefeuchters). Dies kann zu Fehlfunktionen führen.		
	Reparieren, zerlegen oder verändern Sie das Steuergerät und das Gehäuse nicht. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.		
	Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen und lösen Sie die Netzkabel nicht. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen.		
	Verwenden Sie keine abisolierten oder überstehenden Kabel. Dies kann zu Bränden führen (ersetzen Sie es durch ein anderes).		
	Verwenden Sie kein überstehendes Kabel, das Risse oder Narben aufweist. Es kann zu Schrammen auf der Haut führen.		
	Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.		
	Lassen Sie das Gerät auf jeden Fall überprüfen. Wenn ein Problem festgestellt wird, lassen Sie es reparieren.		
	Niemand außer dem Bediener darf das Gerät berühren. Dies kann zu Unfällen oder Fehlfunktionen führen.		
	Wechselstrom		Seriennummer
	Gleichstrom		Hersteller
	Datum der Herstellung		CE-Zeichen
	Achtung, Begleitdokumente beachten		Gebrauchsanweisung beachten



Die Garantiezeit für das Gerät beträgt 12 Monate. Wir bieten Reparaturservice ab dem Kaufdatum. Wenn eines unserer Produkte Schäden oder natürliche Probleme hat, bieten wir Ersatz oder Reparaturservice. Die Verwendung von Fremdpatronen kann zu Schäden am Gerät führen. Dies kann zum Erlöschen der Garantie führen.

Allgemeine Wartung

Überprüfen Sie das Gerät und den Adapter vor dem Gebrauch.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht benutzt wird. Wischen Sie seine Oberfläche mit einem Desinfektionstuch ab.

Achten Sie auf saubere Bereiche wie Ritzen, Nähte und Bereiche, in denen die Nadelpatrone am Gerät befestigt ist.

Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit.

Überlassen Sie das Messen, Reparieren oder Ändern des Geräts nicht dem nicht-professionellen Personal.

Wenn Sie das Gerät verwenden, das längere Zeit nicht benutzt wurde, überprüfen Sie, ob es ordnungsgemäß und sicher funktioniert.

Dr. pen



M8S Benutzerhandbuch