

Kurzanleitung



Cellulite-Massagegerät F1

Entfernen von hartnäckigem Fett und Dehnungsstreifen

■ Vielen Dank für die Verwendung des Cellulite-Massagegerätes F1. Bitte lesen Sie die Kurzanleitung und befolgen Sie die Anweisungen.

■ Um dieses Produkt sicher zu verwenden, lesen Sie bitte die "Wichtige Sicherheitstipps" in der Kurzanleitung sorgfältig durch.

■ Bewahren Sie das Handbuch nach dem Lesen zum Nachschlagen an einem sicheren Ort auf jederzeit.

■ Bitte für Kinder unzugänglich aufbewahren.

■ Dieses Produkt ist ein nichtmedizinisches Gerät.

Wichtige Sicherheitshinweise

Tipps	
Benutzer deaktiviert	<ul style="list-style-type: none"> • Patienten mit Herzschrittmachern oder schweren Herzrhythmusstörungen. • Patienten mit kognitiver Beeinträchtigung und sensorischer Lähmung der Haut. • Säuglinge, Schwangere, Wöchnerinnen (60 Tage nach der Operation).
Teile Verboten	<ul style="list-style-type: none"> • Implantatwerkstoffe wie Metall und Kunststoff. • Hautgeschwüre. • Das Herz, die beiden Halsschlagadern und der vordere Teil des Rachens.
Verbotene Handlung	<ul style="list-style-type: none"> • Produkt nicht in Wasser tauchen. • Es ist verboten, während des Betriebs der anderen Maschine oder während des Fahrens mit der anderen Maschine zu arbeiten. • Es ist verboten, das Produkt selbst zu zerlegen, zu verändern oder zu reparieren.
Anweisung - en befolgt	<ul style="list-style-type: none"> • Dieses Produkt sollte nicht in der Nähe von starken Magneten aufbewahrt werden. • Nicht über längere Zeit am selben Körperteil anwenden, da dies zu Hautentzündungen führen kann. • Das Ladekabel kann nicht selbst ausgewechselt werden.

Gebrauchsanweisung

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, wenn Sie das Programm zum ersten Mal verwenden:


1. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Elektrodenblatt und vom Handgriff des Geräts.
2. Zuerst mit einem feuchten Papiertuch den restlichen Klebstoff auf dem Elektrodenpad und den Schutzfilm auf dem Handgriff abwischen, dann mit einem trockenen Papiertuch die Wasserflecken entfernen.
3. Schalten Sie das Gerät ein und prüfen Sie, ob jede Funktionstaste normal funktioniert.

Tipps:

Bitte entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht wahllos. Die eingebaute Batterie kann umweltschädliche Stoffe enthalten. Bitte entsorgen Sie das Produkt in den örtlichen Sammelstellen und achten Sie darauf, dass die interne Batterie entladen ist. Batterie erschöpft ist.

Hersteller: Dongguan HeMS Electronic Technology Co., Ltd.
 Adresse: Tech Park of Hongxin, 2nd Industrial Zone, Jiaoshe Village, Dongken Town, Dongguan
 Product Certification: CE RoHS FCC
 Product Quality Management System Certification: ISO 13485:2016

Gebrauchsanweisung

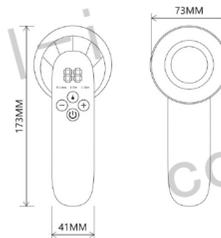


Batteriekapazität	3,7 V/1200 mAh	Stromversorgung	AC220V/50HZ
Aufladung	5V/2A	HF-Frequenz	1M HZ
Biowellen Frequenz	30-300HZ	Rote Wellenlänge	630(±10)nm
Temperaturkontrolle	37-42 C	Material	ABS, PC, Edelstahl
Produktgewicht	160g	Paketgewicht	230g

Details zum Zubehör



Gerät	USB-Ladekabel
1	1

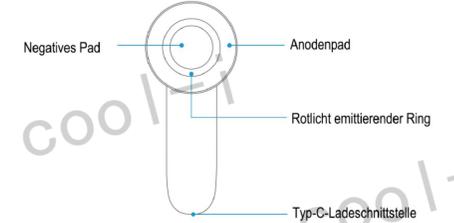

Aufladung

• Bitte verbrauchen Sie die Restkapazität des Gerätes vor dem ersten Aufladen und verwenden Sie das Gerät erst, wenn es vollständig aufgeladen ist. Für den späteren Gebrauch können Sie nach Bedarf nachladen. Es wird jedoch empfohlen, den Akku einmal im Monat vollständig zu entladen. Dadurch kann die Lebensdauer des Akkus verlängert werden.

• Wenn Sie das Gerät länger als 6 Monate nicht benutzt haben, laden Sie es bitte 10-12 Stunden auf, bevor Sie es benutzen.

• Stecken Sie den mit dem Gerät gelieferten Typ-C-Stecker in die Ladebuchse des Geräts, dann den USB-Stecker in einen Adapter mit maximal 5 V 2 A und schließlich den Adapter in eine 220 V-Steckdose.

• Während des Ladevorgangs zeigt die Ladeanzeige ein dynamisches weißes Rechteck. Nach vollständiger Ladung wird „Full“ angezeigt.

Wartung

Reinigen Sie das Elektrodenpad


• Nach Gebrauch das restliche Hydrogel auf dem Elektrodenpad mit einem feuchten Papiertuch abwischen und anschließend die Wasserflecken mit einem trockenen Papiertuch entfernen.

• Wischen Sie nicht mit rauen Gegenständen, um ein Verkratzen der Elektrodenpads zu vermeiden.

• Wenn das Hydrogel zwischen dem roten Leuchtring und der Elektrodenfolie nicht sauber gewischt werden kann, wischen Sie es mit einem Wattestäbchen und dann mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser.

• Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser.

Komponente Funktion

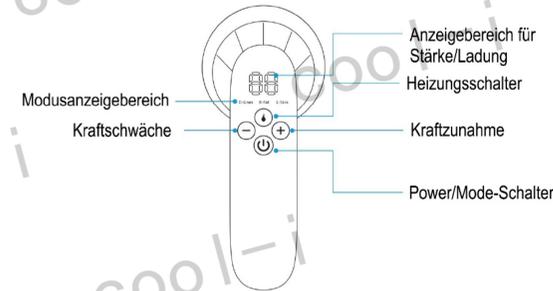

Rumpf reinigen

- Das Gerät mit einem Taschentuch oder einem weichen Tuch abwischen.
- Zur Reinigung nicht in Wasser tauchen.

• Nicht mit schmutzigen Tüchern reinigen, um Kratzer am Rumpf zu vermeiden.

Arbeitsmechanismus

4 Art der Technologie

- Bio-Wave-Technologie (30-300 Hz)

Die Bio-Wave-Penetrations-Technologie ist wie ein wöchentliches Hauttraining, das hilft, die Haut zu straffen und zu festigen, während die Hautfeuchtigkeit erhalten bleibt und die Kollagen- und Elastinproduktion drastisch stimuliert wird.

- HF-Technik (1 MHz)

Die HF-Wellen dringen in die Dermis ein und wandeln elektrische Energie in Wärmeenergie um, wodurch sich die Temperatur in der Haut erhöht. Dadurch wird Fett verbrannt, die Haut gestrafft und Kollagen regeneriert.

- Rotlichttechnologie (630(±10)nm)

Es kann die Durchblutung fördern und die Haut verjüngen, die Hautelastizität wiederherstellen und feine Linien, Falten und Dehnungsstreifen minimieren.

- Konstanttemperaturtechnik (37-42°C)

Die Konstanttemperaturtechnologie erhöht schnell die Temperatur des aktiven Teils und verbessert Technologien.

3 Arten von Arbeitsverfahren

- Modus „Linien auflösen“.

Verwenden Sie 200 Hz Bio-Wave und 630 (±10) nm Rotlicht, um Schwangerschaftsstreifen, feine Linien und Narben zu entfernen. Der aktive Teil fühlt sich nach außen gezogen an.

- Fettverbrennungsmodus

Verwenden Sie 30 Hz Bio-Wave, 1 MHz RF und 630 (±10) nm Rotlicht, um hartnäckiges Fett an verschiedenen Stellen des Körpers zu entfernen. Es gibt ein Gefühl des Hämmerns und der Hitze im Wirkungsbereich.

Lift Skin Mode

Use 300Hz Bio-Wave and 630(±10)nm red light for lifting and tightening loose muscles in various parts of the body. The action part has a feeling of pulling inward.

Intensity Levels

Each mode is designed with 10 intensity levels, suitable for different parts of the body (do not use it on the face).

Heating Function

The heating function can be turned on and off by the heating switch key according to needs. When the heating function is turned on, the mode is in red, when the heating function is turned off, the mode is in white.

Operating Hours

The working time is 15 minutes for each operation, and then the device automatically shuts down (the working mode and switching intensity will not affect the working time after the startup).

Arbeitsschritte

Schritt	Symbol	Aktion/Hinweise
Hydrogel		Drücken Sie das Hydrogel aus der Flasche und platzieren Sie es in der Mitte des mittleren Elektrodenpads. Halten Sie dann den Griff fest, um das Hydrogel gleichmäßig zu verteilen. ※ Es ist verboten, ätherische Öle zu verwenden. ※ Das Hydrogel sollte nicht zu stark verschmiert werden, nur die Größe des Heizungsschalterknopfes.
Hochfahren		Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis die Intensitäts- und Modusanzeige aufleuchtet, und lassen Sie die Taste dann los.
Auswahlmodus		Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um den Bedarfsmodus auszuwählen. ※ Aufgrund der Größenbeschränkung der Anzeigestelle sind die auf dem Gerät angezeigten Modusnamen alle Abkürzungen. Die entsprechende Erklärung lautet wie folgt: D-Lines - Dispel-Linien B-Fat - Fett verbrennen L-Skin - Haut anheben

Zahnrad auswählen		Drücken Sie kurz die Tasten "+" und "-", um die gewünschte Intensität auszuwählen. ※ Da verschiedene Teile unterschiedliche Wahrnehmungen haben, wählen Sie bitte die erforderliche Intensität entsprechend Ihren Bedürfnissen.
Massage		Halten Sie den Griff, legen Sie die Elektrodenpads nahe an die Massagestelle und bewegen Sie sie sanft und wiederholt, nachdem Sie die entsprechende Stärke gespürt haben. ※ Es ist nicht ratsam, während der Massage kräftig zu drücken, und die Elektrodenpads sollten eng an der Haut anliegen, um Hautreizungen zu verursachen. ※ Die Intensität kann während der Massage jederzeit angepasst werden, um den Komfort zu gewährleisten. ※ Wenn Sie während der Massage eine erhöhte Reibung, eine schwächere Reizung oder ein Kribbeln verspüren, schmier Sie bitte die entsprechende Menge Hydrogel ein.
Schalter/Heizfunktion		Drücken Sie kurz die Heizungstaste, um die Heizfunktion einzuschalten, dann wird der Modus rot angezeigt; Drücken Sie kurz die Heizeiste, um die Heizfunktion auszuschalten, dann wird der Modus in Weiß angezeigt.
Abschalten		Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis alle Anzeigen ausgeschaltet sind.
Sauber		Wischen Sie die Elektrodenoberfläche, auf der das Hydrogel verschmiert ist, mit einem feuchten Papiertuch ab, bis das restliche Hydrogel sauber gewischt ist, und wischen Sie dann Wasserflecken mit einem trockenen Papiertuch ab. Wischen Sie das auf dem Körper verschmierte Hydrogel mit einem feuchten Tuch oder einem anderen sauberen Gegenstand ab.

Im Zweifel

Anomalien	Grund	Handhabungsmethode
Bootet nicht	Batterie ist leer	Aufladung
Kann nicht aufgeladen werden	Das Ladekabel ist defekt Der Ladeanschluss ist nicht erfolgreich verbunden	Tauschen Sie das Ladekabel aus Verbinden Sie sich erneut
Keine Wirkung oder Wirkung ist nicht offensichtlich	Unangepasste Intensität	Verwenden Sie einen hohen Gang
Keine Wirkung oder Wirkung ist nicht offensichtlich	Übermäßiger Hautwiderstand Geräteausfall	Hydrogel auftragen Wenden Sie sich an den Kundendienst
Starke Reizung oder Kribbeln	Trockene Haut	Hydrogel auftragen
	Wirkt auf Hautgeschwüre	Ersetzen Sie das aktive Teil
	Verwenden einen hohen Gang	Niedrigerer Gang
	Die kontinuierliche Nutzungsdauer ist zu lang	Hör auf zu benutzen

Lyuning GmbH

George-washington-Str.181
 68309 Mannheim Germany
 cool-ishop.com
 info@cool-i.de

