


# 7MAGIC

Elektrische Schallzahnbürste

D36

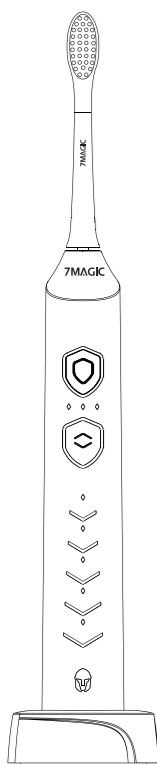

### Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

## Angelegenheiten brauchen Aufmerksamkeit

### Verbieten

- Laden Sie nicht im Badezimmer auf. Platzieren Sie das Ladegerät nicht in einem Wasserbehälter, über oder in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens usw.
- Der Akku kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden, sondern nur von autorisiertem Personal durch unser firmeneigenes Kundendienstzentrum. Der Austausch des Produkts durch Laien ist nicht gestattet.

### Warnung

- Um die Sicherheit zu gewährleisten, verwenden Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren mit Behinderungen, geistigen oder sensorischen Beeinträchtigungen oder mangelnder einschlägiger Erfahrung und Kenntnissen dieses Produkt unter Aufsicht oder Anleitung. Erlauben Sie Kindern nicht, unbeaufsichtigt Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchzuführen. Das Produkt und seine Kabel sollten außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahrt werden.

1

### Beachten

- Bei der ersten Verwendung dieses Produkts kommt es bei manchen Menschen aufgrund der Hochgeschwindigkeitsvibration der Borsten zu Zahnreizungen oder Kribbeln, und sogar am Zahnfleisch kann es gelegentlich zu leichten Blutungen oder Beschwerden kommen, was ein normales Phänomen ist. Sollte dieser Zustand nach zweiwöchiger kontinuierlicher Anwendung immer noch auftreten, stellen Sie bitte die Verwendung dieses Produkts ein und wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.

- Wenn Sie sich kürzlich einer Mund- oder Zahnfleischoperation unterzogen haben, an Zahnproblemen leiden oder zwei Monate lang eine ausgedehnte orale Behandlung hatten, konsultieren Sie bitte Ihren Zahnarzt, bevor Sie das Produkt verwenden.

- Wenn Sie Schmerzen verspüren, beenden Sie bitte die Verwendung dieses Produkts und wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.

- Wenn die Zahnbürste längere Zeit nicht benutzt wird, leuchtet die Ladekontrollleuchte beim erneuten Laden der Zahnbürste nicht auf. Bitte warten Sie 6–10 Minuten geduldig, bis der Normalzustand zurückkehrt.

2

- Beim Laden fühlt sich der Griff der Zahnbürste leicht heiß an, was ein normales Phänomen ist; Wenn es sich heiß anfühlt, schalten Sie bitte sofort den Strom aus und wenden Sie sich an unseren Kundendienst.


- Dieses Produkt ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt und nicht für die Verwendung in einer Zahnarztpraxis oder bei mehreren Patienten bestimmt.

- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Setzen Sie die Zahnbürste nicht direkt dem Sonnenlicht aus. Sie sollte bei Raumtemperatur oder an einem trockenen, belüfteten Ort gelagert werden.

3



Bürstenkopf

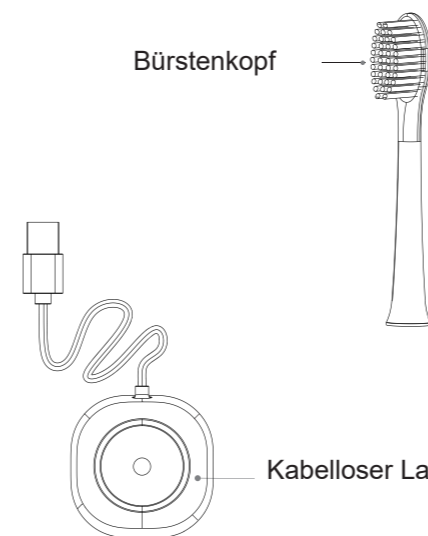


Kabelloser Ladeständer


4

## GEBRAUCHSANLEITUNG

Schritt 1: Stellen Sie sicher, dass Bürstenkopf und Griff richtig zusammengebaut sind.

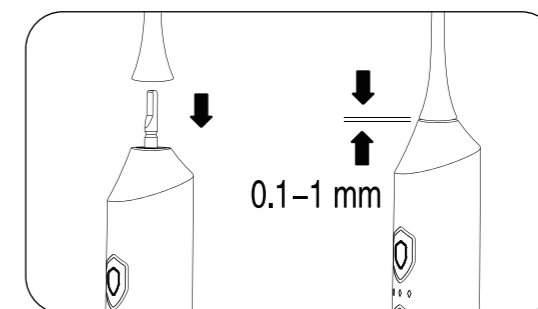

Schritt 2: Befeuchten Sie den Bürstenkopf und drücken Sie die Zahnpasta auf die Borsten.

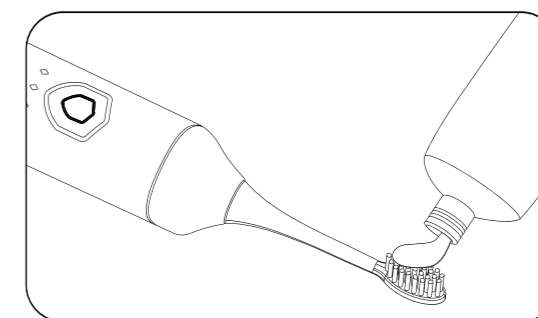

5

Schritt 3: Einschalten / Modus & Intensitätsumschaltung / Ausschalten.


- Einschalten: Drücken Sie die Ein/Aus Taste;
- Modusschalter: Wenn das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist, drücken Sie die Modustaste und die Zahnbürste wechselt der Reihe nach zwischen den verschiedenen Putzmodi.

- Umschaltung der Intensitätsstufe: Halten Sie die Modustaste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um zwischen drei Intensitäten zu wechseln: niedrig, mittel und stark;

Wählen Sie Ihren bevorzugten Putzmodus:

Diese Zahnbürste verfügt über 5 Putzmodi (jeder Modus mit drei Intensitäten: stark, mittel, niedrig).

6

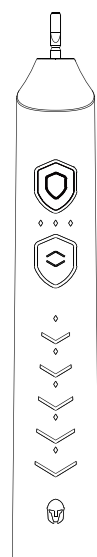

- Sauber: für die meisten Menschen geeignet
- Weiß: geeignet für Rauchflecken, Teeflecken und andere durch schwarze und gelbe Pigmente verursachte Zahnverfärbungen;
- Politur: geeignet für Menschen mit Zahnstein und Zahnstein
- Zahnfleischpflege: geeignet für Menschen mit Zahnfleischbluten
- Empfindlich: Geeignet für zahnfleisch- und zahnempfindliche Personen

### Ausschalten

- Drücken Sie im Betriebszustand leicht den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten.


- Speicherfunktion: Nach 3 Sekunden Einschalten merkt sich die Zahnbürste beim Ausschalten den Modus und die Leistungsstufe, die vor dem Ausschalten verwendet wurde, als Standardputzmodus nach dem nächsten Einschalten.

- Nach jedem Herunterfahren wird die verbleibende Leistung angezeigt, indem die Kontrollleuchte jedes Modus 2 Sekunden lang leuchtet.

7


### Schritt 4: Zähne richtig putzen

- Platzieren Sie die Borsten in einem 45-Grad-Winkel zum Zahnfleischrand, beginnen Sie in einem Kreis, bewegen Sie sich langsam und reiben Sie die Zahnbürste vorsichtig an der Stelle zwischen Zahnwurzel und Zähnen.

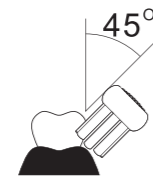

- Bewegen Sie den Bürstenkopf weiter, um den gesamten Zahn zu reinigen.

- Während des Putzens macht der Vibrationseffekt der Zahnbürste alle 30 Sekunden kurze Pausen und fordert Sie auf, die Putzposition zu ändern.

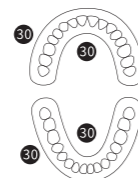


- 2-3 Minuten ist die beste Zeit zum Zähneputzen. Die Zahnbürste schaltet sich nach 2 Minuten Putzen automatisch aus; Wenn Sie dennoch Ihre Zähne putzen müssen, können Sie es einschalten und weiter verwenden.

8

### Schritt 5: Reinigen Sie den Bürstenkopf.

- Reinigen Sie nach dem Zähneputzen die Borsten des Bürstenkopfes unter fließendem, klarem Wasser.
- Nach der Reinigung des Bürstenkopfes stellen Sie die elektrische Zahnbürste bitte an einen trockenen und kühlen Ort.

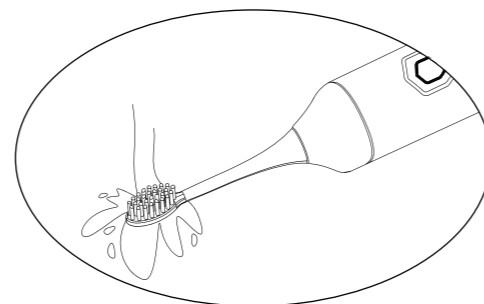

- Der Zahnarzt empfiehlt, den Bürstenkopf alle drei Monate zu wechseln.


### Leitfaden zur Wartung

### Aufladen

Das rote Blinken der Ladeanzeige der Zahnbürste zeigt an, dass die Zahnbürste nicht ausreichend aufgeladen ist. Bitte

9

### Lademethode wie unten dargestellt

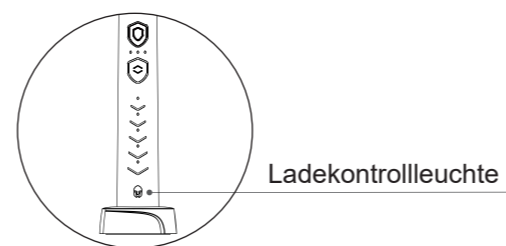

- Ladeanzeige grün atmend blinkend: Laden;
- Die Ladeanzeige leuchtet grün und der Akku ist vollständig geladen.

- Wenn der Akku fast leer ist (die Ladeanzeige blinkt rot oder lässt sich nicht einschalten), stellen Sie die elektrische Schallzahnbürste auf den kabellosen Ladeständer und schließen Sie sie an die Stromversorgung an, um sie etwa 12 Stunden lang vollständig aufzuladen. Der originale kabellose Ladesitz ist für das Laden der akustischen elektrischen Zahnbürste D36 vorgesehen und unterstützt kein Schnellladen für andere Geräte

10

### Grundinformationen

Produktname: Sonic elektrische Zahnbürste

Modell:D36

Kabelloser Ladeständer

Kabelloser Ladeständer

Nenneingangsspannung: 5V

Nennausgangsleistung: 2W

Die Zahnbürste

Nennspannung: 3,7 V

Nennleistung: 2W

Ladezeit: ca. 12 Stunden

Wasserdichter Grad der Zahnbürste: IPX7

Herkunft: China

### Garantie und Kundendienst

- Für unsere elektrische Zahnbürste gilt eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum. Sollten während des Gebrauchs Probleme auftreten, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Wir werden Ihnen eine zufriedenstellende Lösung anbieten.

- Der Ladeständer kann nicht gewaschen oder mit Wasser eingewischt werden.



11

### Fehlerbehebung

Problem	Mögliche	Ursache Lösung
Nicht möglich zu starten	Geringer Strom	Laden Sie Ihre elektrische Zahnbürste auf
BH kann den Griff nicht einfügen	Fremdmaterial im Einsteckloch des Bürstenkopfes	Entfernen Sie das Fremdmaterial
	Behandeln Sie die Antriebswelle mit Fremdkörpern	Fremdmaterial entfernen
Kurze Servicezeit	Unpassende Zahnbürstenköpfe	Kaufen Sie den offiziellen passenden Bürstenkopf
	Übernutzung	Aufladen an die Zahnbürste
Die Vibration des Bürstenkopfes ist weniger stark	Bürstenkopf und Griff sind nicht ordnungsgemäß montiert	Entfernen Sie das Fremdmaterial, setzen Sie den Bürstenkopf wieder zusammen.
	Niedrige Batterieleistung	Aufladen an die Zahnbürste

12



@7magic\_club

@7MagicClub

US: +1 909 808 1006

EU: +4921042865085

www.7magic.de

inktoner\_center@163.com