

Gefahr

- Bitte verwenden Sie das Produkt niemals mit den folgenden medizinischen elektronischen Geräten:
 1. Herzschrittmacher und andere implantierbare medizinische elektronische Geräte;
 2. künstliches Herz und künstliche Lunge und andere lebenserhaltende medizinische elektronische Geräte;
 3. Elektrokardiographen und andere medizinische elektronische Geräte;
 - * Diese medizinischen elektronischen Geräte können Fehlfunktionen verursachen und lebensbedrohlich sein.
 4. An Tankstellen, in Werkstätten mit hohem Staubanfall, in Gas- und anderen brennbaren und leicht explosiven Bereichen ist die Verwendung verboten.

Warnung

- Wenn der Patient gleichzeitig ein Hochfrequenz-Chirurgiegerät und das Produkt am Körper anwendet, kann die Elektrode des Produkts Verbrennungen und Schäden am Produkt verursachen.
- Wenn das Produkt in der Nähe (1M) eines Kurzwellen- oder Mikrowellen-Therapiegeräts verwendet wird, kann die Leistung des Produkts instabil sein.
- Die Elektrode sollte während der Behandlung keinen Kontakt mit Wunden und Narben haben.
- Wenn Sie das Produkt verwenden, sollten Sie die Elektrode nicht in der Nähe des Brustherzens platzieren.
- Das Produkt ist für die Verwendung durch einen Benutzer empfohlen. Wenn es von verschiedenen Anwendern verwendet wird, reinigen Sie die Elektrode am Produkt, bevor Sie es verwenden.
- Wenn Sie das Produkt verwenden, kleben Sie die Elektrode fest und gleichmäßig auf die Haut.
- Die Elektrode dieses Produkts hat eine wärmeerzeugende Funktion. Wenn die Wärmekompressionsfunktion über einen längeren Zeitraum (mehr als 15 Minuten) auf dieselbe Stelle angewendet wird, kann es zu Verbrennungen bei niedrigen Temperaturen kommen.
- Wenn Sie sich während oder nach der Verwendung unwohl fühlen, beenden Sie die Verwendung und suchen Sie einen Arzt auf.
- Dieses Produkt enthält eine Lithiumbatterie. Zerlegen Sie das Produkt nicht, modifizieren Sie es nicht, überfluten Sie es nicht und werfen Sie es nicht ins Feuer, andernfalls kann es zu Produktschäden und Explosionen kommen.

- In den folgenden Fällen sollten Sie vor der Verwendung einen Arzt aufsuchen, da es sonst zu Unfällen oder körperlichen Beschwerden kommen kann:
 1. Patienten, die sich in medizinischer Behandlung befinden und Unwohlsein verspüren.
 2. Patienten mit abnormalen Herz- und Hirnnerven.
 3. Patienten, deren Körpertemperatur 38 Grad übersteigt (Fieberperiode).
 4. Patienten mit Infektionskrankheiten.
 5. Patienten mit Hautwahrnehmungsstörungen oder Hautanomalien.
 6. Patienten unter Medikamenteneinfluss
 7. Patienten mit abnormalem Blutdruck.
 8. Patienten, die nicht in der Lage sind, ihre Wünsche zu äußern.
 9. Patienten mit sensorischen Beeinträchtigungen aufgrund von hohen peripheren Durchblutungsstörungen wie Diabetes.
 10. Patienten mit Hautallergien gegen Edelmetallelektroden.

- Die Verwendung unter den folgenden Bedingungen ist verboten:

1. Patienten mit bösartigen Tumoren
2. Patienten mit Blutungsneigung
3. Schwangere Frauen, Wöchnerinnen
4. Patienten mit akuten unterstützenden Entzündungen
5. Träger von Herzschrittmachern
6. Patienten mit Metallimplantaten
7. In der Nähe des Herzens

- Verwenden Sie es nicht in der Nähe des Herzens, über dem Hals, dem Kopf, dem Mund, den Genitalien oder bei Hauterkrankungen und behandeln Sie nicht gleichzeitig die Fußsohlen. Außerdem sollten Sie bei der Anwendung die inneren Organe nicht komprimieren.

- Verwenden Sie das Gerät nicht zusammen mit anderen medizinischen Geräten oder mit mehr als 2 Produkten.

- Verwenden Sie die Elektrode nicht für andere als die in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zwecke.

- Verwenden Sie die Elektrode nicht mit einer abgesplitterten oder beschädigten Oberfläche.


- Demontieren, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung.

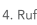
I Betriebsverfahren

1. Bei niedrigem Batteriestand wechselt die Anzeige der Einschalttaste von Blau auf Gelb und es ertönt ein akustisches Signal "Niedriger Batteriestand" als Hinweis. Sie können das USB-Kabel an den Adapter anschließen (Ausgangsbereich: 5V, I-2a), der den aktuellen Standards für Haushaltsgeräte entspricht. Sie können das Gerät zum Laden auch an die

USB-Schnittstelle eines Computers anschließen. Beim Laden blinkt der Netzschalter gelb, bei voller Ladung blau. Vier Stunden ist für eine volle Ladung erforderlich, und jede volle Ladung kann 3-4 Stunden Leistung liefern.

2. Befeuchten Sie vor dem Gebrauch zunächst die Haut der Halswirbelsäule mit einem feuchten Handtuch, und legen Sie dann das Produkt um den Hals. Legen Sie die Elektrode nahe an die Haut der Halswirbelsäule und stellen Sie die Position des Produkts ein. Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie die gewünschte Massageintensität und den Modus ein.

3. Drücken Sie die Taste "Host"  zwei Sekunden lang, um den Host einzuschalten (es ertönt ein akustisches Signal "Hi SKG, Daily mode(Tagesmodus)", und eine Kontrollleuchte leuchtet auf).

4. Rufen Sie den Tagesmodus mit der Standardeinstellung (0) auf. Durch Drücken der Taste "" wird der Modus bei jedem Drücken in einen anderen Modus umgeschaltet. Die drei Modi können zyklisch umgeschaltet werden, was durch ein akustisches Signal für jeden Modus angezeigt wird. (Hinweis: Tagesmodus, Spannungsmodus, Trainingsmodus). Jedes Mal, wenn ein Modus umgeschaltet wird, kehrt die Intensität auf die Standardstufe (0) zurück. Wenn Sie bei eingeschaltetem Gerät die Host-Taste "" zwei Sekunden lang gedrückt halten, schaltet sich das Gerät mit einem hörbaren "Bye"-Ton aus.

5. Die "+"-Taste ist die Taste zur Erhöhung der Intensität. Nach jedem Drücken ertönt ein Ton und das Gerät schaltet in einen höheren Modus. Die Intensität ist in 15 Stufen unterteilt (0,1, 2 ... 14, Max). Wenn die Intensität auf Stufe 14 steht, ertönt beim Drücken von "+" ein hörbarer "Max"-Ton. Wird die "+" Taste erneut gedrückt, wird erneut ein "Max"-Ton mit der gleichen Intensität auf der "Max"-Stufe ausgegeben.

6. Die "-"-Taste ist die Taste zum Verringern der Intensität. Nach jedem Drücken wird ein Ton ausgegeben und auf einen niedrigeren Modus umgeschaltet. Die Intensität ist in 15 Stufen unterteilt (14,13,12 ... 1, Min). Wenn die Intensität auf Stufe 1 steht, ertönt beim Drücken der Taste "-" ein hörbarer "Min" Ton. Wird die "-" Taste erneut gedrückt, wird erneut ein "Min"-Ton mit der gleichen Intensität auf der "Min"-Stufe ausgegeben.

7. Die Taste "" ist die Heizungstaste. Drücken Sie die Heiztaste, um die Heizfunktion zu starten, was durch einen hörbaren Ton "Start heating" angezeigt wird. Die beiden Elektroden werden auf Temperaturen zwischen 37°C-43°C aufgeheizt. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die Heizfunktion ausgeschaltet, was durch ein hörbares "Stop heating"-Geräusch angezeigt wird.

8. Der Host schaltet sich nach 15 Minuten Betrieb automatisch aus, was durch ein hörbares "Bye"-Geräusch angezeigt wird. Wenn das Gerät eingeschaltet ist und nicht richtig benutzt wird oder die Heiz- und Massagefunktionen nicht aktiviert sind, schaltet sich das Gerät nach 30+/-10 Sekunden automatisch aus und gibt ein akustisches "Bye"-Geräusch von sich.

9. Bei niedrigem Batteriestand ertönt ein akustisches "Low Battery"-Geräusch, bei zu niedriger Batteriespannung ertönt ein akustisches "Bye"-Geräusch und der Host schaltet sich automatisch ab.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung versorgt werden, die der Kennzeichnung auf dem Gerät entspricht.
- Setzen Sie das Gerät oder den Akku nicht zu hohen Temperaturen aus.
- Dieses Gerät enthält Akkus, die nicht austauschbar sind. Wenn der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Hitzeempfindliche Personen müssen bei der Verwendung des Geräts vorsichtig sein.