

ALLE -ROUND 360°

Elektrische Zahnbürste für Kinder



Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Um dieses Produkt sicher und effektiv zu verwenden,
lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch.

Produktfunktionen

1. USB-Ladung:

Schnellladung in weniger als 120 Minuten, einmal aufladen für über eine Woche langanhaltende Nutzung, energiesparend und umweltfreundlich.

2. Einfache Bedienung:

Ein-Knopf-Bedienung, fünf Modi zur Auswahl: 1. Massage-Modus, 2. Sanfter Modus, 3. Reinigungsmodus, 4. Zahnfleischschutz-Modus, 5. Tiefenreinigungsmodus.

3. Rundum-Zahnpflege:

Nach dem Einschalten können Sie innerhalb von 50 Sekunden eine 360-Grad-Rundum-Zahnbürstbewegung abschließen. Schnell und bequem (automatische Abschaltung nach 50 Sekunden).

4. Automatische Speicherfunktion:

Intelligentes Speichern der Benutzergewohnheiten für eine effiziente und bequeme Nutzung.


5. Dreifach-Funktion:

Zahnbürsten, Massage und Zahnaufhellung.

Produktmerkmale

1. Das Produkt ist mit einem rundum wasserdichten Versiegelungsdesign ausgestattet (IPX7), praktisch, langlebig und leicht zu reinigen.
2. Das U-förmige Bürstenkopf-Design verwendet antibakterielles Silikonmaterial für Lebensmittelqualität und ermöglicht einen 360-Grad-Kontakt mit dem Zahnfleisch und den Zähnen. Jedes Zähneputzen bietet eine schnelle und komfortable Erfahrung für Ihre Mundgesundheit.
3. Die Verwendung dieses Produkts kann Zahnfleischschwund vorbeugen, die Durchblutung des Zahnfleisches fördern und das Auftreten von Parodontalerkrankungen reduzieren.
4. Die Oberseite ist mit einer LED-Farblichtanzeige ausgestattet, die je nach Modus in unterschiedlichen Farben leuchtet.

Produktzubehör Einführung

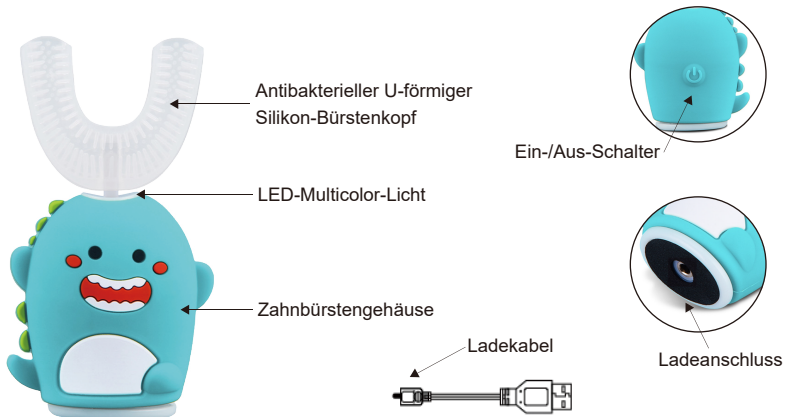

Ladeanleitung

Schließen Sie zunächst ein Ende des USB-Datenkabels an den Steckplatz des Ladegeräts an und das andere Ende an den USB-Stromanschluss zum Aufladen.

Wenn die Kontakte des Geräts gut mit dem Ladegerät verbunden sind, leuchtet die Ladeanzeige auf. Wenn die LED am Gerät nicht leuchtet oder blinkt, bedeutet dies, dass das Gerät nicht richtig platziert ist. Bitte überprüfen Sie die Position.

Während des Ladevorgangs leuchtet die LED am Gerät auf und bleibt konstant, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Produktinformationen

Produktgröße:	108x45x33mm	Produktgewicht:	64g ±10g
Nennspannung:	3,2-3,7V	Nennleistung:	<5W
Betriebsstrom:	<1,6A	Ladezeit:	<120 Minuten

Nutzungsschritte

【Schritt 1】

Richten Sie das Zahnfleischloch parallel zum Gerät aus und drücken Sie es fest auf die Metallachse, bis es an Ort und Stelle sitzt.

【Schritt 2】

Dieses Produkt kann mit Flüssigzahnpaste, Schaumzahnpaste oder herkömmlicher Zahnpaste verwendet werden.

【Schritt 3】

Bei Verwendung von herkömmlicher Zahnpaste befeuchten Sie das Zahnfleischloch und legen Sie es dann in den Mund. Schließen Sie die oberen und unteren Zähne sanft auf dem Zahnfleisch ab und starten Sie den Schalter. Bewegen Sie Ihre Hand links und rechts, um die seitlichen großen Zähne zu erreichen. Die optimale Frequenz beträgt 63 Mal pro Minute. In 50 Sekunden kann ein angenehmer und schneller Reinigungsprozess für die Zähne abgeschlossen werden.

【Schritt 4】

Reinigen Sie die Halterung und das Gerät, spülen Sie die Halterung mit klarem Wasser ab, trocknen Sie sie ab und wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab.



Zahnfleischloch kann je nach persönlicher Vorliebe auf die gewünschte Länge angepasst werden

1. Die normale Betriebstemperatur des Produkts beträgt 0°C-50°C.
2. Beim Aufladen des Produkts bitte aufgrund der Produktmerkmale bei Raumtemperatur aufladen.
3. Wenn das Produkt für längere Zeit nicht verwendet oder gelagert wird, wird empfohlen, es alle drei Monate aufzuladen und zu entladen.
4. Das Produkt sollte an einem trockenen und kühlen Ort gelagert werden, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
5. Nach dem Zähneputzen bitte die auf der Geräteoberfläche vorhandene Feuchtigkeit und stehendes Wasser mit einem feuchten Tuch abwischen und möglichst vermeiden, dass das Gerät in Wasser eingetaucht wird.
6. Das Produkt hat eine hohe Ausgangsleistung und sollte nicht lange Zeit verwendet werden. In der Regel weniger als 10 Minuten.
7. Halten Sie das Gerät während des Ladevorgangs trocken. Verwenden Sie ein Ladekabel mit einer Stromstärke von 5V0.5A bis 5V1A.
8. Die Verpackungsbilder dienen nur zur Referenz. Das tatsächliche Produkt kann davon abweichen.