



# Gebrauchsanleitung

## Handmassagegerät

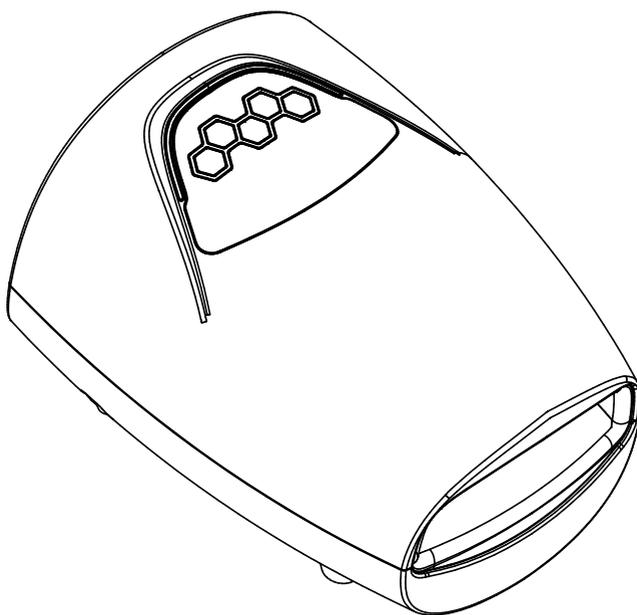


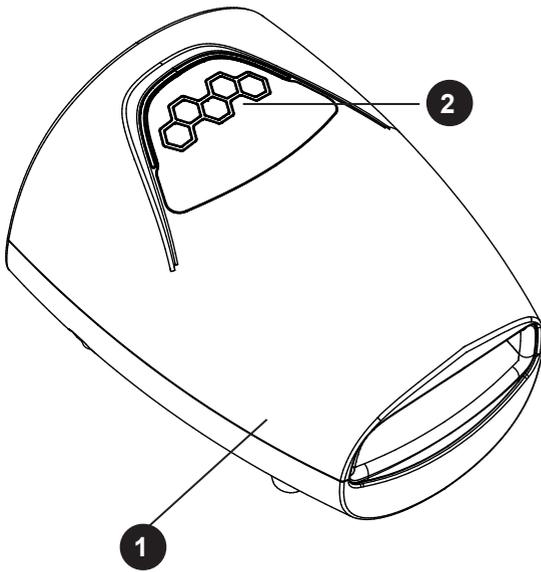

## Produktkomponenten

- 1 Hauptgerät
- 2 Bedienfeld
- 3 An-/Aus-Taste
- 4 Massage der Finger
- 5 Massage der Handfläche
- 6 Wärmefunktion
- 7 Automatischer Modus
- 8 Ladekabel

## Bedienfeld Funktionen

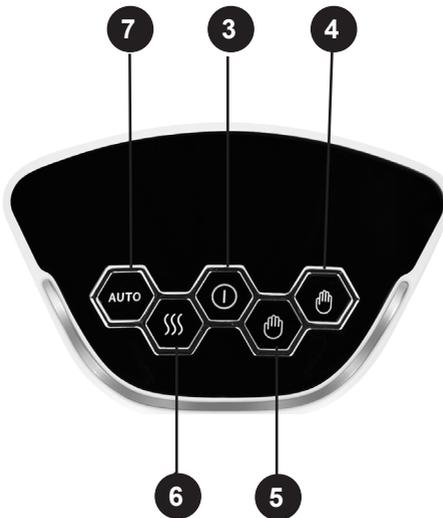

## Inhaltsverzeichnis

Produktkomponenten .....	2
Lieferumfang .....	3
Sicherheits- und Warnhinweise.....	3
Symbolerklärung .....	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	4
Anwendungsbeschränkungen .....	4
Sicherheitshinweise .....	6
Hinweise zum Umgang mit Akkus .....	6
Inbetriebnahme .....	7
Anwendung .....	8
Reinigung und Pflege.....	8
Fehlerbehebung.....	9
Entsorgung .....	10
Technische Daten .....	10
Kundenservice .....	10

### Lieferumfang

- 1 x Handmassagegerät
- 1 x USB-C Ladekabel
- 1 x Gebrauchsanleitung

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf, machen Sie sie anderen Nutzern des Produktes zugänglich und beachten Sie die Sicherheits- und Anwendungshinweise.

### Sicherheits- und Warnhinweise

#### SYMBOLERKLÄRUNG



**WARNUNG!**

**Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.**



**VORSICHT!**

Sie können verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.



**ACHTUNG!**

Es könnten Sachschäden entstehen.

**WARNUNG!**

- Das Gerät ist nur für die Verwendung im privaten Umfeld vorgesehen. Es ist nicht für gewerblichen oder industriellen Einsatz bestimmt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn das Netzkabel des Gerätes beschädigt ist, muss es durch ein Netzkabel des gleichen Typs ersetzt werden.
- Sie dürfen das Gerät keinesfalls öffnen oder reparieren, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

- Das Handmassagegerät ist kein medizinisches Gerät, sondern ein Entspannungsgerät. Es ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Es darf nur für die angegebenen Zwecke und auf die in der Gebrauchsanleitung beschriebene Art und Weise verwendet werden. Jede unsachgemäße Anwendung kann gefährlich sein. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch verursacht wurden.

**Anwendungsbeschränkungen****VORSICHT!**

- Verwenden Sie das Gerät NICHT bei einer krankhaften Veränderung oder Verletzung im Bereich der Hände (z.B. Schwellungen, Entzündungen, starke Arthritis, Osteoporose, Bindegewebserkrankungen).

- Verwenden Sie das Gerät NICHT bei akut oder chronisch erkrankter, verletzter oder entzündeter Haut (z.B. offene Wunden, Thrombosen, Rötungen, Hautausschläge, Krampfadern, Allergien, Verbrennungen).
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Schlaf, beim Führen eines Fahrzeuges oder gleichzeitigem Bedienen von Maschinen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT nach einem Herzinfarkt.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT länger als 30 Minuten.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT nach der Einnahme von Substanzen, welche die Wahrnehmungsfähigkeit beeinträchtigen (z.B. Schmerzmittel, Schlafmittel, Alkohol)
- Verwenden Sie das Gerät NICHT während der Schwangerschaft.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT bei zu Blutungen neigendem Gewebe.
- Befragen Sie vor der Benutzung des Gerätes Ihren Arzt,
  - wenn Sie unsicher sind, ob das Gerät für Sie geeignet ist
  - wenn Sie an einer schweren Krankheit leiden oder eine Operation an der Hand hinter sich haben
  - wenn Sie an einer schweren Krankheit leiden oder eine Operation an der Hand hinter sich haben
  - wenn Sie unter Schmerzen ungeklärter Ursache leiden
- Die Anwendung muss zu jeder Zeit angenehm sein. Wenn Sie sich während der Nutzung unwohl fühlen, schalten Sie das Gerät sofort ab und kontaktieren Sie ggf. Ihren Arzt.
- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass weder Gerät noch Zubehör sichtbare Schäden aufweisen. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder die angegebene Kundendienstadresse.

**Sicherheitshinweise****WARNUNG!**

- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass weder Gerät noch Zubehör sichtbare Schäden aufweisen. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder die angegebene Kundendienstadresse.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn es heruntergefallen ist oder andere Schäden davongetragen hat.
- Halten Sie Netzteil, Kabel und Gerät von Wasser fern.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit trockenen Händen.

**ACHTUNG!**

- Tragen Sie während der Anwendung keinen Schmuck (Ringe, Armbänder, Uhren), um Verletzungen und Beschädigungen des Geräteinnenraums zu vermeiden.
- Decken Sie das Produkt während der Verwendung nicht ab.
- Verwenden Sie zum Aufladen ein Netzteil, welches den angegebenen Spezifikationen entspricht.
- Halten Sie das Gerät von scharfen oder spitzen Gegenständen fern.
- Schützen Sie das Gerät vor Staub, Stößen, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen und großer Hitze (Ofen, Heizkörper, offenes Feuer).

**Hinweise zum Umgang mit Akkus****WARNUNG!**

- Wenn Flüssigkeit aus einer Akkuzelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Wenn ein Akku ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen, um das Gerät zu entsorgen.

- Schützen Sie Akkus vor übermäßiger Wärme.
- Explosionsgefahr! Keine Akkus ins Feuer werfen.
- Akkus nicht zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
- Nur in der Gebrauchsanleitung aufgeführte Ladegeräte verwenden.
- Akkus müssen vor dem Gebrauch korrekt geladen werden. Die Hinweise des Herstellers bzw. die Angaben in der Gebrauchsanleitung für das korrekte Laden sind stets einzuhalten.

## Inbetriebnahme


### HINWEIS

- Bevor Sie das Handmassagegerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, müssen Sie den Akku vollständig aufladen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

### Handmassagegerät laden:

- Nutzen Sie zum Aufladen des Gerätes ein handelsübliches Smartphone-Netzteil (DC5V / 1-2,5A). Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Verbinden Sie das Gerät mit dem Ladekabel und einem Netzteil mit einer geeigneten Steckdose.
- Alternativ können Sie das Handmassagegerät auch mit dem Ladekabel über den USB-Anschluss Ihres Computers / Laptops aufladen.
- Während des Ladevorgangs blinkt die Leuchtanzeige am unteren Rand des Displays.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Leuchtanzeige dauerhaft. Trennen Sie das Gerät nun vom Stromnetz.

## Aufladen

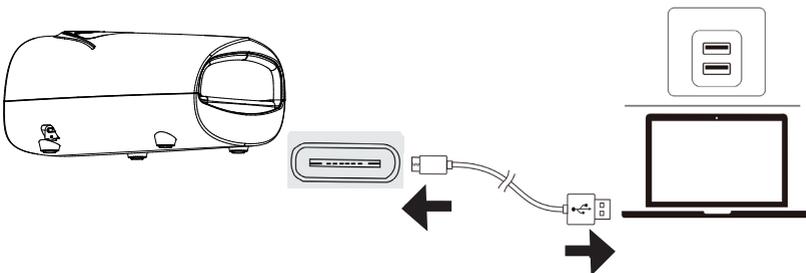

### HINWEIS

- Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

## Anwendung

- Legen Sie Ihre Hand mit dem Handrücken nach oben in das Gerät.
- Die Handfläche ruht dabei auf der runden Erhebung in der Mitte des unteren Massagekissens.
- Halten Sie die An-/Aus-Taste in der Mitte des Displays gedrückt um das Gerät zu starten. Es startet im automatischen Modus.
- Dabei werden die Handflächen und Finger gleichmäßig massiert. Durch Drücken der entsprechenden Taste, können Sie den zu massierenden Bereich sowie die jeweilige Intensität anpassen.
- Sie können die Massage-Intensität jeweils durch mehrfaches Drücken der jeweiligen Taste wählen.
  - 1x drücken → Symbol leuchtet grün → sanfte Massage
  - 2x drücken → Symbol leuchtet orange → beruhigende Massage
  - 3x drücken → Symbol leuchtet rot → kräftige Massage
- Zusätzlich können Sie die Wärmefunktion durch Drücken der entsprechenden Taste  aktivieren.
  - 1x drücken → Symbol leuchtet grün → Stufe 1
  - 2x drücken → Symbol leuchtet orange → Stufe 2
  - 3x drücken → Symbol leuchtet rot → Stufe 3
- Durch erneutes Halten der An-/Aus-Taste können Sie die Massage jederzeit anhalten.
- Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch ab.

### Anwendungstipp

Für schöne, gepflegte Hände cremen Sie Ihre Hand vor der Massage großzügig ein und ziehen Sie einen Einmalhandschuh über. Lassen Sie die Creme vom Handmassagegerät einmassieren.

## Reinigung und Pflege



**WARNUNG!**

### Stromschlaggefahr

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Benutzerwartung aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Gerät niemals unter fließendes Wasser halten und nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen

- Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen, vor Sonne geschütztem Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren.

- Für eine möglichst lange Akku-Lebensdauer laden Sie den Akku mind. 2x im Jahr vollständig auf.

## Fehlerbehebung

Wenn ein Fehler bei der Benutzung auftritt, schauen Sie sich bitte zunächst die Tabelle unten an.

Wenn die Störung nicht behoben werden kann oder das Produkt immer noch nicht funktioniert, schalten Sie bitte das Gerät aus und kontaktieren Sie das Produkt-Service-Center zur Wartung des Geräts.

Demontieren Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht es selbst zu reparieren.

Standardfehler	Mögliche Ursachen	Maßnahmen zur Problemlösung
Das Gerät lässt sich nicht anschalten	Untersuchen Sie den verbliebenen Akku der Batterie. Der Akku ist möglicherweise zu schwach.	Laden Sie das Gerät auf.
Das Gerät kann nicht geladen werden.	Ist der Netzanschluss richtig mit dem Ladekabel verbunden?	Stecken Sie den Stecker wieder ein, bis die Leuchtanzeige blinkt.
	Sind das Ladekabel und das Netzteil intakt?	Überprüfen Sie die Steckdose und das Ladekabel. Wenn Schäden aufgetreten sind, kontaktieren Sie bitte den Hersteller.
	Stimmen die Spezifikationen der Steckdose und des Ladekabels mit den Betriebsanforderungen des Geräts überein?	Sehen Sie sich die Spezifikationen an und prüfen Sie die technischen Parameter, wie in der Gebrauchsanweisung gegeben.
Das Gerät kann angeschaltet werden, aber funktioniert nicht.	Der verbliebene Akku der Batterie könnte zu schwach sein.	Laden Sie das Gerät auf.

## Entsorgung

### Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

### Elektrogeräte



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte bitte über Ihr örtliches Rücknahmesystem. Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling dieses Gerätes erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsbetrieben, dem Geschäft in dem Sie das Produkt gekauft haben oder beim Hersteller.



Akkus und Batterien sind vor der Entsorgung des Gerätes zu entnehmen und getrennt vom Gerät zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zu gesonderten Entsorgung von Akkus und Batterien.

## Technische Daten

GERÄT	Handmassagegerät
Modell	ZM-H014
Größe	21,8 x 16,5 x 11,8 cm
Leistung	8 W
Akku	3.7 V / 7.4 Wh Li-Akku
Akkukapazität	2.000 mAh
Akkuladedauer	3-4 Stunden
Betriebsdauer	1,5 – 2 Stunden (je nach Programm)
Sicherheit	Gerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus
<b>NETZTEIL</b>	<b>(nicht im Lieferumfang enthalten)</b>
Spannungsversorgung	
In:	100 – 240 V ~50/60 Hz
Out:	5 V DC / 1 – 2,5 A

## Kundenservice

Einfach den QR-Code scannen und alle Service-Informationen auf einen Blick erhalten!

Alternativ können Sie sich auch telefonisch an den Kundenservice wenden:

**+49 (0) 6431 9 21 96 00**





