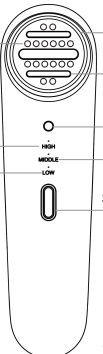


Ein bedienungsanleitung. Ein radiofrequenz-gerät. 	Verehrte kunden. Danke für den kauf des radiofrequenzgerätes. Bevor sie dies tun, lesen sie bitte gründlich die nutzeranleitung und befolgen sie die richtigen anweisungen Wichtigste produkte Mit ihrer firearm können sie hautprobleme wie falten, dunklere, fettige, hängende, muskulöse behandeln. Radiofrequenztherapie ist eine harmlose hautentherapie mit geringen nebenwirkungen. Durch elektrische erhitzung unterstützt sie die regeneration Von kollagen und verringert falten. Zudem fördern nanolid-leuchten den haut-stoffwechsel, erhöhen die zellaktivität und erhöhen die haut-elastizität. Die beide zusammen helfen, die haut zu beleben und sie jünger aussehen zu lassen. Wenn sie regelmäßig mit radiofrequenz-geräten umgehen, werden sie jünger und länger!	Warnung. Dieses gerät ist nicht wasserdicht. Halt es vom wasser fern. Auf Oder in der nähe Von badewanne, waschbecken, waschbecken etc. Tausche den gerät nicht in wasser Oder andere flüssigkeit ein. Präventivmaßnahme 1. Sind im körper herzschrtrittmacher, defibrillator Oder ein anderes aktives implantat implantiert, ist die geräte zu verwenden. 2. Gerät nicht verwenden, wenn ständige implantate (wie beispielsweise metallplatten Oder schrauben), silikon-implantate Oder chemikalien in die behandlungszone injiziert werden. 3. Verwenden sie das gerät nicht, wenn bei ihnen krebs Oder eine potenzielle schwere krankheit diagnostiziert wurde. 4. Wenn sie innerhalb der letzten drei monate chemotherapie Oder elektrotherapie erhalten haben, lassen sie diese gerät außer kraft.	5. Wenn sie schwanger sind Oder stillen, dürfen sie das gerät nicht benutzen. 6. Verwenden sie das gerät nicht, wenn sie eine aktuelle hitzegeschichte haben wie etwa wiederherpes in der betroffenen region. 7. Benutzen sie das gerät nicht bei epilepsie. 8. Wer eine lichtempfindliche erkrankung hat, sollte diese ausrüstung nicht benutzen. 9. Meiden sie die geräte, wenn es andere symptome gibt und ihr arzt meint, sie sind nicht sicher, 10. Bitte verwenden sie das gerät nicht, wenn sie ein bestimmtes medikament im letzten halben jahr auf der haut benutzt haben. 11. Benutzen sie diese ausrüstung nicht, wenn sie hautkrankheiten wie ausschlag, ausschlag, dermatisse Oder ausschlag haben. 12. Benutzen sie die ausrüstung nicht, wenn sie während der vergangenen drei monate einen eingriff im behandlungsbereich durchgeführt haben. 13. Diese einrichtung darf weder genutzt noch außer kraft gesetzt werden	Benutzen sie andere teile in der verpackung Die verbindung zum aufladen, ein beschädigtes ladekabel Das gerät qualmt Oder hat einen verbrannten geruch - wenn die anlage ausfällt Oder beschädigt werden kann 1 die hülle des geräts zerbricht Oder ausreißt Das gerät ist nass Zusammenfassung der erzeugnisse LED glühlbirnen.  Hohes niveau. Niedriges niveau. Mein therapeut. Elektroden. Anzeigen. Mitte. Schalter für strom. Sowie den ladezport.	Beschaffenheit nach produkten Rf-+ led-licht: aufgrund direkter effekte auf den homo habilis und fördert die regeneration Von kollagen 3 elektroden: polypolares funkgerät mit hoher energie, gleichmäß iger und regelmäßiger ladung Die behandlung wird auf eine niedrige, mittlere und high festgelegt Hochwertiges material: wirkt nicht auf die haut, geeignet für die meisten haut Zwei funktionen: er löst verschiedene haut-probleme mit nudeln, dunklen flächen und hängung Temperaturanzeige: die temperatur der haut im sicheren bereich halten Hautsensoren: die leuchten automatisch, wenn drei elektroden mit der haut in berührung kommen Schwache leistung: geben sie einen hinweis, wann sie aufgeladen werden können, wenn der akku Leer ist Klein Oder gut: einfach zu hause Oder zum verreisen	Aufladen. Achtung: bei einem Langen transport können die batterien Leer sein. Bitte füllt das gerät, bevor ihr das erste mal anruft. 1. Wenn der akku Leer ist, leuchten die lampen rot und erinnern sie, das gerät zu laden. 2. Die verbindung mit dem type c ist mit dem 5V/ a angelschnur (ohne ausnahme) verbunden. Du hast den stecker gezogen. Beim aufladen die anzeigen rot halten und nach abschluss blau anlegen. Anmerkung: die ausrüstung ist beim aufladen verfügbar. 3. Oft dauert es etwa zweieinhalb stunden, bis man einen kräftigen strom hat. Die anlage kann für eine sitzung etwa 120 minuten laden.
--	---	---	---	--	---	--

Die angewandten methoden.  1 Dann trocknet sie sich ab. 2 Eine dünne schicht gel wird auf die wunde Achtung: das gel in der verpackung (Oder andere wasserlösliches gel) kann dem gerät helfen, sich gleichmäßig über der haut zu bewegen und als leitmittel zu dienen. Zur sicherheit und wirksamkeit wird immer eine gel (Oder gegebenenfalls noch mehr) in den bereich zur behandlung aufgetragen.	 3 Der schalter hat 2 sekunden. Die standard - anzeige für ein Low mount-dings läuft entsprechend an. 4 Drück den schalter für strom, um eine ebene auszuwählen Die ausgewählten ebenen leuchten an	Rf-licht ist an allen frequenzen hell, 15 sekunden an rf-15 und 15 sekunden an radiowellen Rf-licht ist an. 15 sekunden an rf-15 sekunden und lösen sich dann aus Höhe: rot ist an, 15 sekunden radiowellen auf 15 sekunden radiowellen und sich fortschleichen Anmerkung: die energievorsorgung nimmt Von niedrig, mittel - und hoch in der reihenfolge zu. Bitte verwenden sie zunächst die unteren ebenen und dann die anderen ebenen. Empfehlen sie eine leichtere energie, auch wenn diese wahrscheinlich eine bessere wirkung hat.  5 Legen sie den kopf vorsichtig auf die haut. Langsam und vorsichtig die haut abmassieren. So wird es auf dem folgenden bild dargestellt. So bleiben sie warm und gemütlich in der behandlung. Achtung: achten sie darauf, dass die drei elektroden während der gesamten behandlung der haut voll ausgesetzt sind.	Schritt und funktion einer behandlung  1. Die stirn fester körper 2. Auf die rechte wange: tätowierung reduzieren; Und füllt die haut 3. Die linke wange: tätowierung reduzieren; Und füllt die haut 4. Die über der oberlippe straff die haut; Und gegen die falten. 5. Das kinn: knallhart; Und an die v-gesichtsform 6. Hals glatt 6 Ist jedes mal mindestens 15 minuten lang verbraucht. Wenn die radiostrahlung freigesetzt wird und die intensität der energie steigt, werden sie während der behandlung in dem bereich erwärmt, und die haut wird leicht rot.	Energie-stärke, sie wärmen sich in dem bereich auf und während der behandlung wird ihre haut leicht rot. Achtung: sie können die geräte langsam Oder schnell bewegen, bevor sie genutzt werden, um den behandlungsrhythmus bzw. die geschwindigkeit zu finden, die sie mögen. Die anmerkung: wenn das gerät nach 5 minuten nicht betriebsbereit ist, schaltet es sich automatisch aus, um energie zu sparen.  7 Nach gebrauch wird die creme über die wunde Lagerung und pflege 1. Turn off the device after each use and clean its surface With clean dry cloth. Use a tissue paper or towel to Gently wipe off the gel left on the therapy head. You can	Zum reinigen wurden reinigungsmittel mit einem alkoholgehalt Von 70 prozent verwendet. Um anlagen zu schützen, sollte man auf verboten sein, reinigungsmittel mit eton Oder anderen gemahlen zu verwenden. 2. Gehen sie dann bitte in den urbehälter und legen sie das gerät in den schatten, damit es weder sonne noch hitze ausgesetzt ist. 3. Dieses gerät ist nicht wasserdicht. Halten sie sich bitte Von wasser fern und lassen sie keinen teil der anlage untertauchen 4. Das gerät hat eine batterie im inneren. Ist die batterie vorübergehend nicht verfügbar, kannst du alle drei monate aufladen, damit die batterie so lange wie möglich hält. 5. Versuchen sie nie, ein gerät neu zu starten Oder zu reparieren.	Steven Buchstabieren sie das mal Material :ABS+PC+ metall Der anteil :5v / 1 Ostwand :eine wand mit 30 proprost; Max12W Stacy: "das interview" : 1.600 mah. Speicherkapazität: 0000 mah CMS: nm / 20nm / 20nm Wellenlänge: blau -4nm / 4nm / 20nm Suchen sie sich einen gelben ohren-nm / 20nm Gradzahl: 30 ° C. 35 ° C In ron - 40 ° C 40 ° C Relativ luftfeuchtigkeit: 0,35 bis 0,80 rH Speicherkapazität: 10 bis 90 proproent Handßer: 167 45 43 millimeter. Mein ßer Der inhalt. William: 1 * radiofriseure Lähmungslinie 1 * c 1 valium 1. Bedienungsanleitung
---	--	--	---	---	---	---