


SKG

Massage-Faszienpistole F7



Einschalten und genießen

Produkt

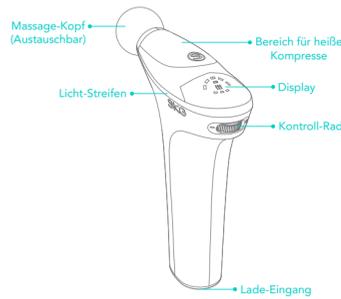

Bedienungsanleitung



Ein- und Ausschalten
Drücken und halten Sie das Kontroll-Rad, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
Power Ein/Aus
Stoß-Modus: je höher die Geschwindigkeit-Stufe, desto schneller bewegt sich die Licht-Anzeige
Modus-Wechsel
Nachdem die gewünschte Modus aktiviert wurde, verwenden Sie das Kontroll-Rad, um die Massage-Geschwindigkeit einzustellen. Verringern Sie die Geschwindigkeit, indem Sie das Kontroll-Rad nach links drehen, und erhöhen Sie die Geschwindigkeit, indem Sie das Kontroll-Rad nach rechts drehen. Den Standby-Modus erreichen Sie, wenn Sie das Kontroll-Rad vollständig nach links gedreht haben (neutral).
Level-Wechsel
Nachdem die gewünschte Modus aktiviert wurde, verwenden Sie das Kontroll-Rad, um die Massage-Geschwindigkeit einzustellen. Verringern Sie die Geschwindigkeit, indem Sie das Kontroll-Rad nach links drehen, und erhöhen Sie die Geschwindigkeit, indem Sie das Kontroll-Rad nach rechts drehen. Den Standby-Modus erreichen Sie, wenn Sie das Kontroll-Rad vollständig nach links gedreht haben (neutral).

Table with 4 columns: Massage-Aufsatz, Bezeichnung, Vibrations-Intensität, Beschreibung. Rows include Kellkopf, Kugelkopf, Kegelfopf, and Flachkopf.

Bedienungsanleitung

Table with 3 columns: Indikator, Status, Beschreibung. Rows include Licht-Streifen and Status-LED.

Wartungshinweise



Entsorgungshinweise

Bitte leisten Sie Ihren Beitrag zum Recycling der wiederaufladbaren Batterien (Lithium-Ionen-Batterien).
GEFAHR: Die Batterie in diesem Produkt ist eine spezielle, wiederaufladbare Batterie, die nicht für andere Produkte bestimmt ist. Bitte laden Sie einen deinstallierten Akku nicht auf.
WURDEN: Bewahren Sie den entnommenen Akku außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern auf, um versehentliche Verschlucken zu vermeiden.

Technische Daten

Table with 3 columns: Produkt Name, Akku, Aufnahmelistung, Auflademethode, Modell, Abmessungen, Nennabspannung, Gewicht des Hauptgeräts.

Table with 2 columns: Stoß-Funktion, Heißkompressen-Funktion. Rows include Level 1-5 with corresponding temperature and speed values.



Wear Future Technologies Co., Ltd.
Address: 23AF, Building III, Zhongke R&D Park, 009 High-tech South Avenue I, High-tech Zone Community, Yuehai Sub-district Office, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province
Website: www.skg.com

Ich bin immer der erste Nutzer eines jeden Produkts

Zusammen mit SKG
"Genießen Sie jeden Tag"



Sicherheitshinweise

- Gegenanzeigen (Kontraindikation)
• Kröpfspatien ist die Verwendung dieses Produkts unteragt.
• Patienten mit innerer Fixierung durch Metallteile dürfen dieses Produkt nicht verwenden.
Anwendungsbereiche
• Entspannung vor und nach körperlichen Trainingseinheiten
• Rehabilitationstraining
• Linderung von Muskelschmerzen und Fazienentzündung

GEFAHR
Nicht während des Aufladens verwenden

Vorsichtsmaßnahmen für heiße Kompressen

- Warnung (heiße Kompresse):
Niedrige Temperatur: Eine kontinuierliche, heiße Kompresse auf ein und demselben Körperteil für mehr als 30 Minuten kann zu Niedertemperatur-Verbrennungen führen.
Mäßige Temperatur: Kontinuierliche heiße Kompresse auf demselben Körperteil für mehr als 10 Minuten kann zu Niedertemperatur-Verbrennungen führen.
Hohe Temperatur: Kontinuierlicher heißer Druck auf dasselbe Körperteil für mehr als 1 Minute kann zu Niedertemperatur-Verbrennungen führen.
Unter den folgenden Umständen ist Vorsicht geboten oder die Verwendung verboten (heiße Kompressen):
1. Bei Patienten mit Geschwüren, Verbrennungen oder bestimmten Hautkrankheiten auf der Haut sind heiße Kompressen streng verboten.

Sicherheitshinweise

- Es wird nicht empfohlen, die Hautoberfläche direkt mit diesem Produkt zu massieren, um Verletzungen der Haut zu vermeiden.
Bei Schmerzen und Unwohlsein können Sie nur die Weichteile des Körpers mit hoher Geschwindigkeit und hohem Druck massieren, jedoch nicht auf Kopf und Knochen ausüben.
Dauerndes Verwenden mit hoher Geschwindigkeit und hohem Druck auf ein und dieselbe Stelle führt zu Abschürfungen; beachten Sie die Anwendung sofort, wenn Sie Schmerzen und Unbehagen verspüren.

Sicherheitshinweise

- Vorsicht
Vergewissern Sie sich beim Starten des Geräts, dass der Massagekopf nicht blockiert ist; andernfalls wird das Gerät vorübergehend angehalten und versucht dann, erneut zu starten.
Dieses Gerät ist nicht wasserdicht, setzen Sie es keinem Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
Nehmen Sie nicht das gesamte Gerät auseinander. Wenn Sie es zerlegen und dabei versehentlich einen Fehler verursachen, senden Sie es zur Reparatur ein.
Bei längerem Dauerbetrieb kann die Oberflächentemperatur des Motors ansteigen, daher ist dieses Produkt mit Vorsicht zu verwenden.



CE-Konformität
Wear Future Technologies Co., LTD (in der EU vertreten durch den Erstverkäufer) erklärt hiermit, dass sich dieses Produkt in Konformität mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU befindet.
Entsorgungshinweise
Dieses Gerät ist ausgezeichnet lt. Vorgabe der Europäischen Entsorgungsvorschrift 2012 / 19 / EC - WEEE.
Sie stellt sicher, dass das Produkt ordentlich entsorgt wird. Durch die umweltfreundliche Entsorgung stellen Sie sicher, dass eventuelle gesundheitliche Schäden durch Falschentsorgung vermieden werden.



SKG Massage fascia gun F7 ENTSORGEN (OHNE AKKU)
Die SKG Massage fascia gun F7 darf am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall gelangen.
AKKU ENTSORGEN
Akku gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zurückzugeben.
VERPACKUNGS-RECYCLING
Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffab Sammlung bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung die für Sie zuständige Entsorgungsstelle.

90*100mm 105g铜版纸, 印刷颜色3252C+CMYK
风琴6折

Pantone 3252 C