


Gebrauchsanweisung

Produktübersicht

1.1 Beschreibung der Tasten

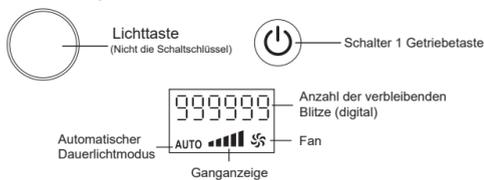


II. Prinzip der Exposition

Das Gerät verwendet die international fortschrittliche photonische kosmetische IPL-Technologie, die die Haut direkt mit stark gepulstem Licht bestrahlt, um den photochemischen Effekt zu erzeugen. Einerseits können sich die Kollagenfasern und die elastischen Fasern in der Haut regenerieren, die Elastizität der Haut wiederherstellen, die Mikrozirkulation im Gesicht verbessern und die Falten beseitigen oder aufhellen. Auf der anderen Seite kann starkes gepulstes Licht in die Haut eindringen und selektiv von der pigmentierten Masse und den Kapillaren im Gewebe absorbiert werden unter der Prämisse, dass normale Hautgewebe nicht zu zerstören, macht die Wärmeenergie die Blutgerinnung und die pigmentierte Masse durch thermische Zersetzung zerstört, um Kapillardilatation zu behandeln, Farbflcken zu entfernen und überschüssige Haare zu entfernen usw.

III. Tabu verwenden

Wichtige Sicherheitshinweise - bitte vor Gebrauch lesen

- Beachten Sie den Hauttyp auf Seite 2 [Kontrollbild der Hautfarbe]. Wenn Sie VI sind, verwenden Sie dieses Gerät nicht, da es sonst zu unerwünschten Hautreaktionen wie Pigmentierung und Depigmentierung, starken Rötungen und Schwellungen oder Brennen kommen kann.

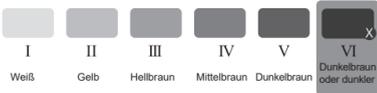

IV. Sicherheitsvorkehrungen

Besondere Aufmerksamkeit

- Tragen Sie vor dem Gebrauch keine Gele oder Pflegeprodukte (Aloe Vera Gel, etc.) auf und stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den Vorschriften in der Bedienungsanleitung montieren und benutzen.
- Bitte lesen Sie die "Gebrauchsanweisung" sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

GEFAHR: Verletzungsgefahr durch falsche Bedienung

⚠ **WARNUNG:** Gefährlicher Inhalt durch unsachgemäße Bedienung
⚠ **VORSICHT:** Inhalte, die bei unsachgemäßer Bedienung zu Personen- oder Sachschäden führen können
Warnsymbol Hinweis: Nicht in der Badewanne oder Dusche verwenden.

- **WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Duschbecken, Waschbecken oder anderen wasserhaltigen Utensilien. Bitte halten Sie dieses Produkt und das Netzteil trocken; Wenn das Produkt beschädigt ist, berühren Sie bitte keine inneren Teile, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden; Stecken Sie keine Gegenstände in das Produkt, und stellen Sie es nicht nach Belieben ab; Das Tragen einer Schutzbrille ist ein normaler Vorgang, der den Benutzer schützt. Wenn Sie in der Nähe Ihrer Augen arbeiten, kann die Schutzbrille die Energie nicht vollständig blockieren, und das Licht wird durch das Melanin der Iris in Ihren Augen aus nächster Nähe absorbiert. Obwohl das Licht Ihre Augen nicht direkt beeinträchtigt, kann hochfrequentes, blinkendes Licht Ihre Sicht beeinträchtigen;
- Wir empfehlen, dass Sie bei jeder Verwendung dieses Produkts eine Schutzbrille tragen. Für die Haarentfernung auf dem Rücken benötigen Sie möglicherweise einen Assistenten oder Partner, da wir befürchten, dass Sie bei der alleinigen Verwendung des Geräts einem Risiko ausgesetzt sind;
- Wir empfehlen, dass Sie bei jeder Verwendung dieses Produkts eine Schutzbrille tragen. Für die Haarentfernung auf dem Rücken benötigen Sie möglicherweise einen Assistenten oder Partner, da wir befürchten, dass Sie bei der alleinigen Verwendung des Geräts einem Risiko ausgesetzt sind;
- Wenn Ihr Haar länger als 1 mm ist, rasieren Sie es bitte zuerst. Wenn das überschüssige Haar Wärme auf der Hautoberfläche absorbiert, wird es Hautrötungen und Schwellungen verursachen, und das verbrannte Haar wird einen eigenartigen Geruch erzeugen, der Ihre Erfahrung mit dem Produkt beeinträchtigen wird;
- Wenn die Haut im bestrahlten Bereich nicht trocken oder sauber ist, beeinträchtigt dies den Gebrauchseffekt und kann dazu führen, dass das Produkt nicht blitzt oder versehentlich blitzt;
- Es liegen keine Daten über die Verwendung des Produkts bei Kindern unter 15 Jahren vor, daher empfehlen wir, dass Sie darauf achten, dass Kinder unter 15 Jahren nicht mit dem Produkt in Berührung kommen und dass Sie sich bei der Bedienung des Geräts von Kindern unter 15 Jahren fernhalten;
- Bitte verwenden Sie unterschiedliche Lichtintensitäten für die verschiedenen Körperteile, da diese einen unterschiedlichen Teint haben;

! Warnhinweise

- Verwenden Sie keine Antitranspiranten unmittelbar nach der Bestrahlung der Achselhöhlen; Überprüfen und reinigen Sie regelmäßig die Verschmutzung des Bestrahlungsportals, um Verbrühungen und Fehlfunktionen während des Gebrauchs zu vermeiden;
- Stellen Sie das Bestrahlungsportal nicht in der Nähe von Gegenständen auf, die leicht entmagnetisiert werden können, um Fehlfunktionen und Schäden zu vermeiden;
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Entlüftungsoffnung blockiert ist, da dies zu Rauch und Feuer führen kann;
- Richten Sie das Bestrahlungsportal nicht auf schwarze Gegenstände, um einen abnormalen Betrieb des Geräts zu vermeiden;
- Beleuchten Sie keine Kleidung, Haare oder andere Gegenstände, um Verbrennungen, Verfärbungen und Schäden zu vermeiden;
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Hauterkrankungen, um Verletzungen zu vermeiden;
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe Ihrer Augen, um Augenverletzungen zu vermeiden; Nach dem Gebrauch wischen Sie bitte die Haar- und Hauptpflegeprodukte ab, die mit der Haarentfernung verbunden sind, um Fehlfunktionen und Hautschäden zu vermeiden;
- Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Kindern. Die Haarentfernung strahlt starkes Licht aus und kann die Augen von Kindern verletzen.
- Bitte stellen Sie die Bestrahlungsintensität entsprechend Ihres Hautzustandes ein und verwenden Sie beim ersten Gebrauch die erste Stufe;
- Wenn die Haut nach dem Gebrauch leicht heiß und rot wird, ist das normal;
- Das Gerät darf nach dem Einschalten nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, bitte schalten Sie es nach dem Gebrauch sofort aus;
- Reinigen Sie die Haut, um sicherzustellen, dass sich keine Haaresteile auf der Hautoberfläche befinden, sie vollständig trocken und frei von öligen Substanzen und Flecken ist.
- Wenn die Umgebungstemperatur 20 Grad übersteigt (von niedriger Temperatur zu hoher Temperatur oder umgekehrt), schalten Sie das Gerät bitte aus und lassen Sie es stehen;
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren und explosiven Materialien (einschließlich Sprühdosen und Tankstellen), die Feuer und einen elektrischen Schlag verursachen können.
- Die Umgebungstemperatur für diese Haarentfernung ist 0 C-45 C, bitte bestätigen Sie die Raumtemperatur vor dem Gebrauch;
- Bitte vermeiden Sie innerhalb von 24 Stunden nach der Bestrahlung direkte UV-Strahlung;
- Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht oder ultravioletem Licht aus, da dies das Produkt ernsthaft beschädigen würde.
- Wenn das Gebälge nach dem Einschalten nicht funktioniert (es ist kein Rauschen zu hören), verwenden Sie es nicht, um Fehlfunktionen wie Rauch und Feuer zu vermeiden.

Die folgenden Personen und Situationen sind für die Verwendung dieses Produkts nicht geeignet

- Nicht geeignet für schwangere Frauen, stillende Frauen, Frauen während der Menstruation, Personen mit Körpernarben, Personen mit Diabetes, Personen mit empfindlicher Haut und Personen mit lichtempfindlicher Haut;
- Schwere Herzkrankheiten, mäßiger bis schwerer Bluthochdruck, bösartige Tumore, Fokulkulitis, infektiöse Hautkrankheiten, verbrannte Haut und Blutgerinnungsstörungen sind verboten;
- Nicht verwenden, wenn Sie einen anomalen Kollagenstoffwechsel haben, einschließlich Narben und schlechter Wundheilung;
- Patienten mit Gefäßerkrankungen wie Krampfadern und Gefäßverengungen an der Bestrahlungsstelle;
- Nicht anwenden, wenn Ihre Haut lichtempfindlich ist und zu Hautausschlägen oder Allergien neigt;
- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn Ihr bestrahlter Bereich infiziert ist, Patienten mit Herpes simplex, Hautläsionen und Hämatomen ist verboten;
- Die Unterdrückung von Immunreaktionskrankheiten (einschließlich HIV-Infektion, Lupus erythematodes, Porphyrie usw.) ist verboten;
- Alle Patienten mit Blutungsstörungen sind verboten, und diejenigen, die Isotretinoin, Fruchtsäure (AHA), Salicylsäure (BHA) oder Azelaensäure verwenden, sind verboten;
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht für diejenigen, die chemische Haarentfernung innerhalb von 30 Tagen, diejenigen, die Hautaufhellung Produkte in einer kurzen Zeit verwendet haben, oder diejenigen, die havs verwendet Vitamin A Zutatun;
- Nicht gleichzeitig mit ätherischen Ölprodukten verwenden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Haut im hellen Bereich sauber und trocken ist und keine Lötönen, Gleitmittel oder andere Kosmetika verwendet werden.
- Wenn die Hautoberfläche nicht sauber und trocken ist, kann dies die Anwendungserfahrung des Produkts beeinträchtigen und sogar das Produkt beschädigen;
- Verboten während der Einnahme von Aspirin Drogen, mit Immunsuppressive Drogen, Isotretinoin und andere drugs.The jüngsten Verwendung von lichtempfindlichen Drogen ist verboten (wie Tetracyclin und Sulfas)

Nicht für die folgenden Körperteile oder unter den folgenden Bedingungen verwenden:

tnra-oral, Genitalien, Schleimhäute, etc.	Kehlkopfknoten
Kopf	Tätowierung, Körperbemalung
Ohr	Innenseite des Nabels
Tätowierung, Körperbemalung	Plastische Chirurgie
Augapfel, Augenlid, um die Augen herum	Akne-Bereich
Augenbrauen, Haare	Brustwarze, Warzenhof
große Ader	

(Hinweis: Diese Liste ist nicht erschöpfend, und wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie dieses Produkt verwenden können, empfehlen wir Ihnen, zunächst Ihren Arzt zu konsultieren).

! Hinweise

1. Verwenden Sie das Gerät nicht mit natürlich dunkler Haut
2. Entblößen Sie sich nicht vor der Haarentfernung
3. Evor Sie sich rasieren, rasieren Sie sich bitte zuerst (verwenden Sie keine chemische Haarentfernungsmethode)
4. Bei der ersten Benutzung unbedingt im ersten Gang starten
5. Bei der Vorbereitung der Haarentfernung, stellen Sie sicher, dass die Haarentfernung Fenster ist in der Nähe der Haut und dann die Haarentfernung Betrieb.
6. Prohibited in dunkler Umgebung zu verwenden
7. Tragen Sie eine Schutzbrille bei der Verwendung
8. Verwenden Sie es nicht in direktem Sonnenlicht, um einen Maschinenausfall zu vermeiden.
9. Das Gerät nicht gewaltsam stoßen oder schüteln
10. Ziehen Sie den Stecker nicht direkt aus der Steckdose, ohne das Gerät auszuschalten, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Hinweis: Wenn Sie das Haarentferngsgerät während der Verwendung pausieren, stellen Sie bitte sicher, dass der Einlass nach oben und das LCD nach unten zeigt, was der Wärmeableitung zugute kommt.

V. Produktspezifikationen

Prinzip des Instruments		IPL Photon Beauty Technologie	
Nettogewicht des Geräts		260g	
Bestrahlungsfläche		3cm²	
Spektrum des Geräts		≥530nm	
Nennspannung		12V DC	
Eingangsleistung		24W	
Transport- und Lagerumgebung		Betriebsumgebung	
Lagertemperatur	-20 C -50 C	Arbeitstemperatur	5 C -40 C
Luftfeuchtigkeit	10%-90%RH	Luftfeuchtigkeit	10%-90%RH
Relativer Druck	700-1060hPa	Relativer Druck	700-1060hPa

VI Einführung in die Verwendung

6.1 Vorbereitung der Verwendung

1. Bitte entfernen Sie zuerst die Haare von der Hautoberfläche. Achten Sie darauf, das Haar nass zu machen, verwenden Sie die Methode des nassen Schabens, um eine gute Hautbehandlung im Voraus zu tun, so dass das Haar unter der Oberfläche der Haut in die Lichtquelle absorbiert werden kann, um die Wirkung des Verlaufs der Behandlung zu gewährleisten. Wenn das Haar nicht mehr als 2 mm, können Sie das Gerät ohne Rasur zu betreiben.
2. Reinigen Sie die Haut und vergewissern Sie sich, dass sich keine Haare auf der Hautoberfläche befinden, dass sie vollständig trocken und frei von fettigen Substanzen ist. Vor der Benutzung des Photonen-Depiators ist es strengstens untersagt, Kondensator, Aloe-Gel und andere Produkte aufzutragen, da sonst kein Licht entsteht (nur bei Großgeräten in Schönheitssalons, nicht aber für den Hausgebrauch).

6.2 Schritte zur Verwendung

1. Nehmen Sie das Gerät heraus, reinigen Sie bitte den Kopffilter des Geräts mit einem weichen Tuch.
2. Bevor Sie das Gerät zur Enthaarung verwenden, befeuchten Sie das Haar und schaben Sie es mit einem Rasiermesser ab.
3. Schließen Sie den Netzadapter an und auf dem Display des Geräts erscheint das Wort "OFF".
4. Drücken Sie die "Einschalttaste" so lange, bis sich der Bildschirm einschaltet (das Gerät ist eingeschaltet, wenn sich der Inhalt des Bildschirms ändert).
5. Wenn der Inhalt des Displays von "blinkend" auf "immer hell" wechselt, bedeutet dies, dass das Haarentferngsgerät bereit ist (der erste Blitz ist hell, die Augen können sich nicht daran gewöhnen, bitte tragen Sie eine Schutzbrille, um die Unannehmlichkeiten des Blitzes für die Augen zu verringern).
6. Der Inhalt des Bildschirms ist "immer an" und das Gerät befindet sich im Zustand "Wimperschlag bereit"; wenn sich der Inhalt des Bildschirms nicht geändert hat, versuchen Sie, den Netzstecker zu ziehen und das Gerät neu zu starten.
7. Drücken Sie den Epilierer senkrecht in einem Winkel von 90° auf die Haut, um sicherzustellen, dass die Haut vollständig berührt wird, und die Anzeige Nummer
8. Der Inhalt des Bildschirms ist "immer an" und das Gerät befindet sich im Zustand "Wimperschlag bereit"; wenn sich der Inhalt des Bildschirms nicht geändert hat, versuchen Sie, den Netzstecker zu ziehen und das Gerät neu zu starten.
7. Drücken Sie den Epilierer senkrecht in einem Winkel von 90° auf die Haut, um sicherzustellen, dass die Haut vollständig berührt wird, und die Anzeige Nummer
8. Nachdem die Maschine auf die Haut geklebt wird, drücken Sie leicht die "Blitz-Taste" des Gerätes, und das Gerät sendet einen Blitz aus, begleitet von einem klaren "Knistergeräusch", und Sie werden das warme Gefühl fühlen, das durch den Blitz zur gleichen Zeit produziert wird (wenn die Temperatur zu hoch ist, es bedeutet, dass der gc, den Sie gewählt haben, zu hoch ist, es wird empfohlen, vom ersten Gang zu sat).

9. Nach der Verwendung des Instruments, um einen Blitz zu senden, ändern Sie die Enthaarung Teil, wenn die Energie bereit ist die "Gang-Anzeige" im Display wird "immer auf", und Sie können die oben "Schritt 7" zu wiederholen.
10. Verwenden Sie den ersten Gang, um die Haut zu testen. Wenn es keine nachteilige Reaktion nach 24 Stunden, können Sie die Energie Gang durch die "Power-on-Taste", und die Energie Gang kann in 5 Gänge unterteilt werden.
11. Befolgen Sie diese Schritte, können Sie den Teil Ihrer Wahl zu enthaaren. Eine Haarentfernung Kurs ist in der Regel drei Mal beleuchtet. Zuerst nehmen Sie den ganzen Körper, und dann tun es für die zweite und dritte Mal.
12. Bitte blinken Sie so nah wie möglich an den letzten Blitz, um vollständig mit dem gewünschten Teil zu behandeln.
13. nach der Verwendung, drücken Sie bitte "Power on key" für eine lange Zeit, um abzuschalten (nach dem Herunterfahren, wird das Produkt den Countdown zum Herunterfahren eingeben), wird der Bildschirm das Wort "OFF" und schneiden Sie die Stromversorgung. Schließlich, der Kopf und Rumpf gereinigt werden.

Modell-Einführung

- Kontinuierlicher Spielmodus (für große Bereiche wie Arme, Beine): Legen Sie den Lichtauslass auf den zu behandelnden Bereich auf der Haut und vollständig fit the skin. At dieser Zeit wird die Haarentfernung Sensorlampe light up, indicating, dass der Lampenkopf in vollem Kontakt mit der Haut ist. Long drücken Sie die Flash-Taste, und sofort beginnen moving das Instrument langsam und gleichmäßig auf freshin, halten die Passform mit der Haut, und der Blitz wird in einem bestimmten Intervall emittiert werden. At dieser Zeit, halten Sie bitte die Haarentfernung bewegen, und schieben Sie das Haar hin und her zweimal in den Bereich, wo Haarentfernung benötigt wird, um sicherzustellen, dass die Haarentfernung Bereich gleichmäßig abgedeckt ist und zu vermeiden, fehlende Licht. Tipp: Die Bewegungsgeschwindigkeit der Haut kann entsprechend der Blitzgeschwindigkeit eingestellt werden, so dass die Abdeckung ist gleichmäßiger, die Blitzfrequenz ist schneller in den ersten Gang, die Blitzfrequenz ist langsamer in den zweiten Gang, arnd je höher die gear. the langsamer die Lichtleistung speed.
- Einzelspiel Modus (geeignet für kleine Bereiche wie Finger und Platz der Lichtauslass auf den Bereich auf der Haut behandelt werden und vollständig die Haut fit at dieser Zeit, die Haarentfernung Senser Lampe leuchtet auf, was darauf hindeutet, dass der Lampenkopf in vollem Kontakt mit der Haut. Short drücken Sie die Flash-Taste, um die Haarentfernung zu starten. Bewegen Sie den Lampenkopf zum nächsten Stück Haut, warten Sie, bis das weiße Licht der Haarentfernungssensorlampe aufleuchtet, und drücken Sie dann die Blitztaste, um den oben genannten Vorgang in der Reihenfolge zu wiederholen. Tipp: Zu jeder Zeit während des Haarentfernungsprozesses, wenn Ihre Haut anfängt, sich überhitzt zu fühlen, machen Sie einfach eine Pause für ein paar Sekunden, lassen Sie den Lichtauslass wieder abkühlen, und dann pertorm Haarentfernung.

Referenzabelle für den therapeutischen Zyklus

1-4 Wochen	5-6 Wochen	7-8 Wochen	Mehr als 8 Wochen
2-3 Mal pro Woche Mehr als 75 % der Haare beginnen auf natürliche Weise auszufallen.	Zweimal pro Woche Neues Haar fällt aus und hemmt das Wachstum.	Einmal pro WocheDas Haar wird dünner und weniger.nicht mehr wiederholt.	1-2 mal pro Woche verwenden Sie es selektiv nach dem Wachstumsstatus des Haares


VII Pflege nach der Anwendung

Vorsichtsmaßnahmen nach der Haarentfernung

- Es wird empfohlen, den Kontakt mit Wasser innerhalb von 6 Stunden nach der Haarentfernung zu vermeiden, und dann kann feuchtigkeitsspendendes Wasser verwendet werden, um den bestrahlten Bereich zu befeuchten. Verwenden Sie nach der Enthaarung keine Parfüms, Masken oder Kosmetika, die mattierte Perlen enthalten. Vermeiden Sie nach der Enthaarung 24 Stunden lang die Einwirkung von UV-Strahlen, und tragen Sie gegebenenfalls Sonnenschutzmittel auf.
- Ein Sonnenbad kann zu einer Verdunkelung der Haut oder zu einem Sonnenbrand führen, eine Bestrahlung zu diesem Zeitpunkt führt zu Rötungen, Schwellungen und Entzündungen. Achten Sie daher darauf, dass Sie sich während der Anwendung dieses Produkts nicht der Sonne aussetzen, und dass die Zeit zur Heilung des Sonnenbrands nicht weniger als 1 Woche beträgt. Oberflächliche Bräunung ist während der Haarentfernungsoperation nicht erlaubt.
- Wenn Sie nach der Haarentfernung eine plastische Operation benötigen (nur im Bereich der Haarentfernung), wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Wenn Sie sich unwohl fühlen, wenden Sie sich an Ihren Chirurgen.

Reinigung und Pflege

- Um die besten Ergebnisse und die längste Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten, reinigen Sie das Gerät bitte vor und nach jeder Epilation, um eine langfristige Ansammlung von Haaren und Staub zu vermeiden.
- Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, müssen Sie das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen, damit das Gerät sich setzen kann.
- Verwenden Sie ein weiches, sauberes und trockenes Tuch, um die Spiegelfläche des Lichtauslasses abzuwischen und zu reinigen.
- Legen Sie das Gerät in einer trockenen, staubfreien Umgebung bei 10-6°C.
- Waschen Sie das Gerät und das Zubehör niemals in Wasserhähnen oder Geschirrspüler.
- Verwenden Sie keine Stahlgugeln, Scheuermittel (Zahnpaste usw.) oder ätzende Flüssigkeiten (Benzin, Motoröl, Aceton usw.) zur Reinigung des Geräts.
- Hinweis: Wenn das Wasser nicht gut reinigt, können Sie einige Tropfen hochkonzentrierten Alkohol (nicht mehr als 96%) verwenden, um die oben genannten Teile zu reinigen.
- Schutz der Umwelt
- Wenn Sie das Produkt entsorgen, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es bei einem dafür vorgesehenen Recyclingzentrum ab, um die Umwelt zu schonen.

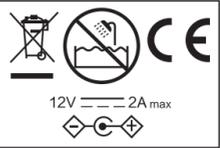

VIII. Fehlersuche

Fehlertyp	Mögliche Ursachen	Lösung
das Gerät/Netzteil wird während der Benutzung warm	Dies ist ein normales Phänomen	Es besteht keine Notwendigkeit, etwas zu unternehmen.
Ich setze den Epilierer auf die Haut und (die Zahl blinkt), aber das Kühlgebläse beginnt zu laufen.	Der Überhitzungsschutz wurde aktiviert.	Wenn der Überhitzungsschutz einsetzt, kühlt der Lüfter immer hoch ununterbrochen. Schalten Sie das Gerät nicht aus, sondern warten Sie mehr als 35 Minuten, bis es abgekühlt ist, bevor Sie es wieder benutzen.
[Blitzbereitschaft] blinkt, aber das Gerät blitzt nicht, wenn die Blitztaste gedrückt wird.	Das Gerät muss geresetert werden, das Gerät muss zurückgesetzt werden.	Setzen Sie das Gerät zurück, schalten Sie es aus und wieder ein.
Ich kann die Blitzintensität nicht erhöhen oder verringern.	Zubehör oder Filter sind zu stark verschmutzt.	Setzen Sie das Gerät zurück, schalten Sie es aus und wieder ein.
Es riecht schlecht, wenn ich das Gerät benutze.	Sie haben die Haare nicht vollständig von der Behandlungsscheibe entfernt. Diese Haare können verbrennen und einen unangenehmen Geruch erzeugen.	Bitte reinigen Sie das Zubehör sorgfältig; Entfernen Sie bitte die Haare auf der Hautoberfläche, bevor Sie das Gerät benutzen.
	Die eingestellte Lichtintensität ist zu hoch	Stellen Sie sicher, dass die richtige Lichtintensität eingestellt ist.
	Sie haben die Haare nicht vollständig von der Behandlungsstelle entfernt.	Bitte entfernen Sie die Haare auf der Hautoberfläche, bevor Sie dieses Gerät benutzen.
	Der Ultraviolettfilter am Ausgang ist beschädigt.	Wenn der UV-Filter beschädigt ist, dürfen Sie das Gerät nicht mehr verwenden. Verwenden Sie es nicht mehr.
	Sie verwenden das Gerät an einer Stelle, an der es nicht geeignet ist.	Verwenden Sie dieses Gerät nicht in den folgenden Bereichen: Brustwarze, Warzenhof, Jabi minor, Vagina, Anus, sowie in den Nasenlöchern und Ohren.
	Das Gerät ist nicht für Ihre Haut geeignet.	Der Hauttyp ist VI oder V. braun-schwarze oder dunkle Haut, bitte verwenden Sie dieses Gerät nicht.

IX Haftungsausschluss

- Ab dem Datum des Kaufs, die Garantie für die gesamte Maschine innerhalb von 12 Monaten eine der folgenden, kann es nicht als eine Garantie auch innerhalb der Garantiezeit behandelt werden:
1. die Nichteinhaltung der Anforderungen des Handbuchs, der Wartung und der Instandhaltung, die zu einer Beschädigung des Produkts führen
 2. Produktschäden, die durch Fehlbildung während des Gebrauchs verursacht wurden (Waschen, Eintauchen usw.)
 3. Produktschäden, die durch Überschreitung der zulässigen Betriebsumgebung verursacht wurden (z. B. hohe Temperaturen, Korrosion usw.)
 4. Produktschäden, die durch anormale äußere Kräfte verursacht wurden (Sturz, Extrusion, Schlag usw.)
 5. Produktschäden, die durch höhere Gewalt (Feuer, Überschwemmung, Blitzschlag usw.) verursacht werden.
 6. Schäden, die durch die Verwendung von fabrikfremden Teilen und Erweiterungen verursacht wurden. Bei Änderungen der oben genannten Punkte sind die von unserem Unternehmen neu formulierten Vorschriften oder die vom Staat aktualisierten Gesetze und Vorschriften maßgebend.