




tragbare elektrische Munddusche

Bedienungsanleitung




Haftungsausschluss: Wenn es aufgrund der Wiederholung des Produktaussehens Unterschiede zwischen dem Muster in diesem Handbuch und dem tatsächlichen Produktaussehen gibt, beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.

Produktstruktur

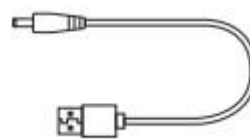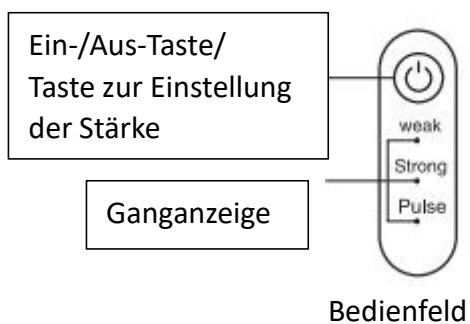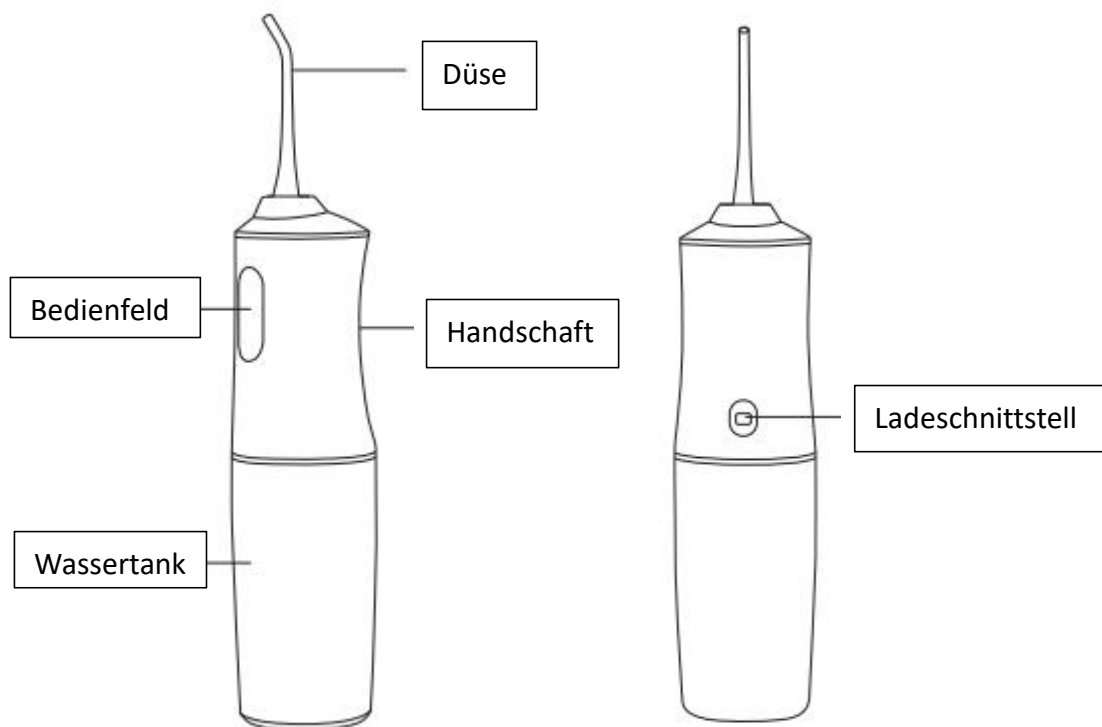

USB-Ladekabel


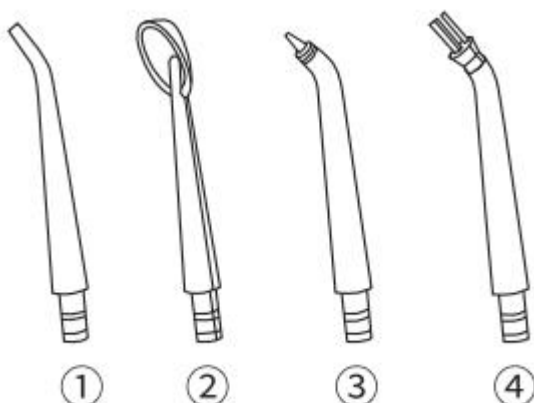


1. Standarddüsen sind für die tägliche Reinigung geeignet.
2. Parodontale Taschendüse. Speziell für die Reinigung von Parodontalbeuteln
3. Zungenbeschichtungsdüse. Speziell zur Reinigung des Zungenbelags.
4. Kieferorthopädische Düse. Geeignet für die Reinigung von Zahnbindern


Operationsmethode

- Drücken Sie die Ein-Aus-Taste, um die Maschine zu starten. Der standardmäßige Öffnungsmodus ist der schwache Modus. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf.
- Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Modus zu wechseln. Der Modus wird auf den starken Gang umgeschaltet und die Kontrollleuchte wird ebenfalls auf die entsprechende Kontrollleuchte umgeschaltet.
- Langes Drücken für 2 Sekunden, um den Modus auf Impulsang umzuschalten, und die Kontrollleuchte schaltet auch auf die entsprechende Kontrollleuchte um, um abwechselnd zu schalten.
- Drücken Sie die Taste, um das Gerät auszuschalten. Die Maschine schaltet sich nach 2 Minuten automatisch aus.
- Wenn der Akku des Instruments aufgeladen ist, blinken die drei Anzeigelampen abwechselnd. Wenn der Akku voll ist, leuchten die drei Kontrollleuchten lange.

Bedienschritte für die Mundspülung

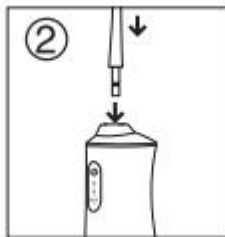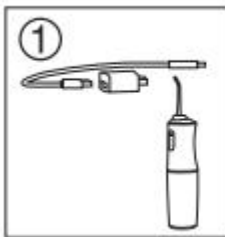

1. Bitte laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.
2. Stecken Sie die entsprechende Stirndüse in den Griff, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt und während des Gebrauchs kein Wasser austritt.
3. Drehen Sie den Wassertank vom Rumpf.

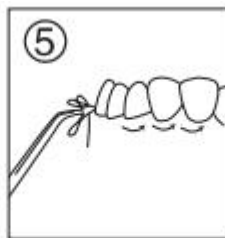


4. Geben Sie Wasser oder Mundwasser in den Tank. Die Wassermenge richtet sich nach dem Eigenverbrauch.
5. Stecken Sie die Düse in den Mund. An der zu spülenden Stelle ausrichten.
6. Öffnen Sie nach dem Gebrauch die hintere Abdeckung, um Restfeuchtigkeit zu entfernen.

So reinigen Sie Ihre Zähne richtig

Wählen Sie die richtige Ausrüstung. Es wird empfohlen, mit dem niedrigsten Gang zu beginnen und nach und nach den am besten geeigneten Gang zu finden. Führen Sie beim Zähneputzen die Düse in den Mund, richten Sie sie auf die Zahnücke oder das

Zahnfleisch und öffnen Sie den Mund leicht, damit das Wasser reibungslos abfließen kann. Richten Sie nach Auswahl des entsprechenden Gangs das Zahnfleisch aus und beginnen Sie am innersten Teil in derselben Richtung (z. B. 1 oder 4), bis das Zahnfleisch des letzten Zahns gereinigt ist. Drehen Sie dann die Düse um, richten Sie sie auf das Zahnfleisch und fahren Sie mit der Reinigung in derselben Richtung (z. B. 2 oder 3) fort, bis das Zahnfleisch des letzten Zahns gereinigt ist. Der Reinigungsablauf für die andere Zahnreihe ist derselbe wie oben.

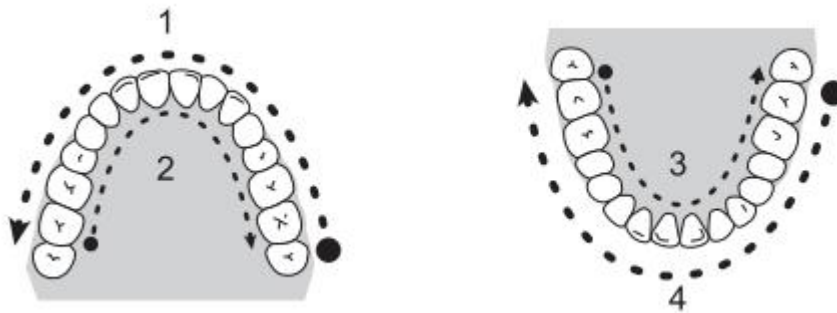

Warme Tipps

Zahnärzte empfehlen Erstanwendern, eine Woche lang den Soft-Modus zu verwenden und nach der Anpassung dann den Normalmodus zu verwenden.

Um es zu verwenden, drücken Sie die Umschalttaste. Achten Sie auf folgende Punkte:

- (a) Die Strömung erfolgt senkrecht zu den Zähnen oder dem Zahnfleisch.
- (b) Bewegen Sie sich langsam an den Zähnen entlang und reinigen Sie sie der Reihe nach.
- (c) Die Düse ist vertikal ausgerichtet.
- (d) Reinigen Sie die Zähne, Brackets, Kronen und Prothesen gründlich.

Zum ersten Mal kein Wasser direkt auf die Parodontaltasche sprühen. Bei langfristiger Anwendung, um Zahnfleischbeschwerden zu vermeiden.



richtige Demonstration



falsche Demonstration

Tipps zum Zähnestanzen: Stecken Sie die Düse in den Mund, bevor Sie den Schalter einschalten, damit das Wasser nicht überall spritzt. Im Gebrauch erhöhen sich die Gänge allmählich von schwach zu stark. Geben Sie dem Zahnfleisch eine Phase der Anpassung, um die richtige Ausrüstung zu finden, die ihm standhält.

Wartung

- A. Wenn Sie dieses Produkt reinigen müssen, wischen Sie es bitte mit Wasser oder einem feuchten Tuch ab und wischen Sie dann die Wasserflecken auf der Oberfläche mit einem trockenen Tuch oder einem anderen trockenen Papiertuch ab.
- B. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.
- C. Waschen Sie das Produkt nicht mit heißem Wasser über 50 °C.
- D. Biegen, dehnen oder verdrehen Sie das Düsenwasserrohr nicht
- E. Es wird empfohlen, die Düse alle drei Monate auszutauschen.
- F. Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht verwenden, entleeren Sie den Wassertank und stellen Sie ihn an einen kühlen und trockenen Ort.

Umwelttipps

Wenn Sie die recycelten Produkte entsorgen, werfen Sie diese bitte nicht in den allgemeinen Hausmüll, sondern geben Sie sie bei der dafür vorgesehenen Recyclingstelle ab. Jeder ist für den Schutz der Umwelt verantwortlich.

Entsorgung des Akkus

1. Der eingebaute wiederaufladbare Lithium-Akku dieses Produkts enthält Substanzen, die die Umwelt verschmutzen können. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, werfen Sie es bitte nicht in den normalen Hausmüll, sondern nehmen Sie die Batterie heraus.
2. Schalten Sie beim Zerlegen des Produkts unbedingt den Strom aus oder unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor Sie die Lithiumbatterie herausnehmen.
3. Um die Lithiumbatterie zu entfernen, hebeln Sie die Schnalle der Produktabdeckung auf, öffnen Sie die Produktabdeckung und entfernen Sie dann die Lithiumbatterie.
4. Die entnommenen Lithiumbatterien sollten sicher entsorgt und im Batterierecyclingzentrum abgegeben werden, was dem Umweltschutz zugute kommt.
Besondere Tipps: Nehmen Sie den Akku nur heraus, wenn Sie das Produkt entsorgen. Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku leer ist, bevor Sie ihn herausnehmen. Laien sollten es nicht entfernen.

Produktfunktion

- A. Stark pulsierendes Wasser kann Bakterien, Zahnflecken, Zahnstein und Speisereste in allen Teilen des Mundes entfernen.
- B. Ein superfeiner Wasserfluss kann Zahnfleischfurchen und tiefe Spalten barrierefrei reinigen und die Zahnfleischgesundheit verbessern.
- C. Schnelle Mundreinigung: Ob zu Hause oder beim Essen, es ist die effektivste Methode, um schnell wieder einen sauberen Mund zu erhalten.
- D. Bei kieferorthopädischen Zähnen und Zahnimplantaten hat die Reinigung von Zahnveneers eine gute Wirkung.
- E. Helfen Sie dabei, eine gesunde Gewohnheit der täglichen Zahnzwischenraumreinigung zu entwickeln, damit die Zähne immer sauber und sauber bleiben.

Fehlerdiagnose

| Häufiges Problem | Mögliche Ursachen | Lösung |
|--|--|--|
| Funktioniert nicht oder lässt sich nicht einschalten | Neu gekauft oder länger als drei Monate nicht genutzt | Bitte laden Sie das Gerät vor der Verwendung länger als 4 Stunden auf. |
| Der Wasserdruck ist am Arbeitsplatz sehr niedrig | In der Düse ist etwas verstopft oder die Düse ist verformt. | Wechseln Sie die Düse |
| Während des Ladevorgangs kann es nur für kurze Zeit verwendet werden | Die Batterie hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht | Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst. |
| | Unzureichende Ladezeit | Bitte laden Sie das Gerät vor der Verwendung länger als 4 Stunden auf. |
| Beim Laden leuchtet die Ladeanzeige nicht oder springt unregelmäßig. | Die Stromversorgung ist nicht an das Eigentum angeschlossen. | Bitte schließen Sie die Stromversorgung korrekt an. |
| | Adapter (Ladekopf) stimmt nicht überein | Ersetzen Sie den Adapter oder stecken Sie ihn direkt in die USB-Buchse. |
| | Der Produktschaltkreis ist fehlerhaft | Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst. |
| Beim Arbeiten kein Wasser versprühen | Neu gekauft oder längere Zeit unbenutzt | 1. Ziehen Sie das Düsenloch am Kopfwaschthema heraus. 2. Saugen Sie kräftig an der Düse |

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

GEFAHR

- A. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, um Verletzungen oder Schäden durch unsachgemäßen Betrieb zu vermeiden.
- B. Zerlegen Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung, um Produktschäden oder Stromschläge zu vermeiden.
- C. Verwenden Sie zum Spülen der Zähne im Wassertank kein Wasser über 40 °C, um Verbrühungen zu vermeiden.
- D. Wenn das Produkt beim Laden versehentlich ins Wasser fällt, ziehen Sie bitte zuerst den Netzstecker und nehmen Sie dann das Produkt heraus. Laden Sie es dann auf, nachdem die Wasserflecken vollständig getrocknet sind.
- E. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, tauschen Sie bitte das Netzteil aus.
- F. Vermeiden Sie es, das Produkt hohen Temperaturen auszusetzen. Setzen Sie das Produkt nicht ins Feuer. Die Batterie könnte explodieren.

Warnung

- A. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als die Mundreinigung.
- B. Drücken Sie die Düse nicht auf das Zahnfleisch oder Zahnfleisch, um eine Beschädigung des Zahnfleisches zu vermeiden.
- C. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser, um Produktfehler zu vermeiden.
- D. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
- E. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, verwenden Sie es bitte nicht weiter.

Achtung

- A. Verwenden Sie dieses Produkt nicht ohne installierte Düse.
- B. Einige funktionelle Mundwässer können ätzend sein. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung die Zusammensetzung der Mundspülungen. Benutzen Sie sie nicht wahllos.
- C. Wenn Kinder, ältere Menschen oder Bediener dieses Produkt verwenden möchten, stellen Sie bitte sicher, dass jemand den Benutzer beaufsichtigt und anweist.
- D. Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Kleinkindern auf und verwenden Sie es nicht als Spielzeug.
- E. Patienten mit Parodontitis oder solche, die sich in den letzten 2 Monaten einer oralen Operation unterzogen haben oder unter Mundproblemen leiden, konsultieren bitte zuerst den Arzt und verwenden es nach Bestätigung.

Achtung

- A. Waschen Sie das beschädigte Zahnfleisch nicht ständig mit starker Ausrüstung, da dies zu Zahnfleischbluten oder Zahnfleiscentzündungen führen kann.
- B. Bitte passen Sie die Reinigungsintensität des gepulsten Wassers in Echtzeit an Ihren Mundzustand an.

Achtung

- A: Tauchen Sie nicht die gesamte Maschine in Wasser, da dies zu Produktausfällen oder vollständigen Schäden führen kann.
- B: Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass der Wassertank trocken und wasserfrei ist, und lagern Sie ihn dann, um das Wachstum von Bakterien zu verhindern.

Produktparameter

Artikel-Nr.: 6886

Ladespannung: 5V

Nettogewicht: 249 g

Ladestrom: 1A

Fassungsvermögen des Wassertanks: 220 ml

Nennspannung: 3,7 V

Nennleistung: 3,5 W