


DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEISE

- Nicht geeignet für die Nutzung im Straßenverkehr
- Nicht geeignet für direkten Blick in die Sonne
- Kein Schutz vor künstlichen Lichtquellen
- Nicht als Schutzbrille geeignet
- Nutzung bei Beschwerden unterbrechen
- Nicht als Ersatz für Brillen mit Sehstärke geeignet
- Kein Spielzeug
- Nur für Lesen und kurze Distanzen geeignet
- Nicht geeignet für größere Distanzen

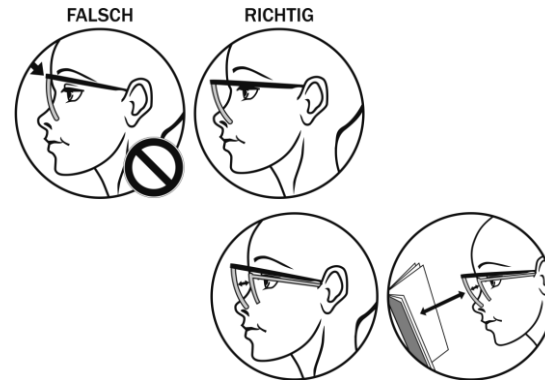

REINIGUNG UND PFLEGE

- Zur Reinigung der Vergrößerungsbrille keine Lösungen oder Alkohol benutzen
- Zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken den mitgelieferten Reinigungsbeutel oder ein weiches Brillenreinigungstuch nutzen
- Für stark verschmutzte Gläser Wasser oder neutrale oder weiche Reinigungsmittel nutzen
- Zur Reinigung der Gläser keine zu große Kraft aufwenden, da dies Kratzer verursachen könnte

NUTZUNGSHINWEISE

Die Vergrößerungsbrille kann einzeln oder über Brillen mit Sehstärke oder Kontaktlinsen getragen werden. Die Vergrößerungsbrille sollte an der Nasenspitze getragen werden, **NICHT** in derselben Position, wie Sie normale Brillen tragen würden.

TRAGEN ÜBER BRILLEN

Lassen Sie beim Tragen der Vergrößerungsbrille über Brillen mit Sehstärke oder Sonnenbrillen Platz zwischen der Vergrößerungsbrille und ihrer Brille um Ihre beste Fokussierung zu finden


FOKUS FINDEN

Halten Sie einen Gegenstand 30 bis 40 cm von der Vergrößerungsbrille entfernt. Variieren Sie die Entfernung, bis der Gegenstand im Fokus ist.

ENGLISCH

SAFETY ADVICE

- not suitable for use in traffic
- not suitable for direct look into the sun
- no protection for artificial light sources
- not suitable for use as safety glasses
- interrupt use if signs of discomfort occur
- not suitable as replacement for glasses with corrective lenses
- no toy
- not suitable for long distances
- only suitable for reading and short distances

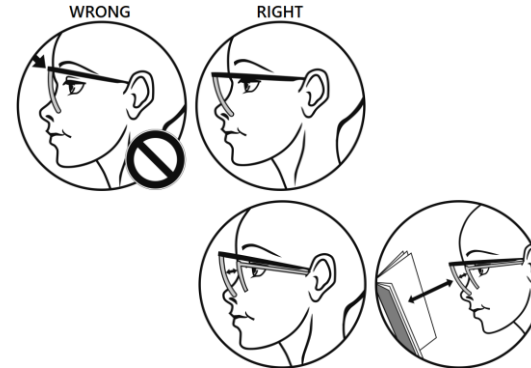

MAINTENANCE & CLEANING

- Do not clean using solvents or alcohol
- To remove dirt or fingerprints use the included cleaning bag or a soft cloth
- To remove persistent dirt from the glasses use water, a neutral or soft detergent
- Applying too much force during cleaning may cause scratches

WEAR OVER GLASSES

Magnifying glasses can be used separately or over glasses with corrective lenses or contact lenses. The magnifying glasses should be worn on the tip of the nose and **NOT** in the same position as normal glasses.

USAGE OVER GLASSES

To find your best focus leave some space between the magnifying glasses and your sunglasses or glasses with corrective lenses.

FINDING FOCUS

Hold an object in 30 to 40 cm (approx. 12 to 16 inches) distance to the magnifying glasses. Vary the difference until you can see the object in focus.