



Nasivent Tube Plus - Einfach Besser Atmen!

Nasivent Tube Plus ist ein Nasendilatator der neusten Generation zur Verbesserung der Nasenatmung und gegen Schnarchen. Bei richtiger Anwendung und Pflege, werden Sie lange Freude an diesem Produkt haben.

Nasivent Tube wird vor dem Schlafen in die Nase eingeführt. Auf sanfte Weise dehnt es die äußeren Nasenwände und erleichtert somit die Nasenatmung. Eine verbesserte Nasenatmung vermindert die Neigung durch den Mund zu atmen und somit auch das Risiko zu schnarchen. Eine gute Sauerstoffversorgung trägt dazu bei, dass der Schlaf ruhiger und erholsamer verläuft.

Nasivent bietet ein angenehmes Tragegefühl. Durch die Flexibilität und Weichheit, sowie den 5 verschiedenen Größen, passt sich Nasivent den unterschiedlichen Nasenformen ausgezeichnet an. Die Zapfen auf der Oberseite der Röhrchen verbessern den Halt in der Nase.

Einsatzbereiche:

Zur Anwendung als Mittel gegen Schnarchen; zur Verbesserung der Nasenatmung; zur Optimierung der Sauerstoffzufuhr beim Sport; bei verstopfter Nase; als Alternative zu Nasenspray

Material: Hochqualitatives Silikon; BPA-frei

Sicherheitshinweis: Schneiden Sie den Verbindungssteg der Tubes nicht auseinander!
Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren.



Reinigen Sie die Nasivent Tubes vor der Anwendung mit Wasser und Seife.



Führen Sie die Nasivent Tubes komplett in die Nase ein und achten Sie darauf, dass die Haltezapfen nach oben zeigen.



Sollten die Nasivent Tubes zu lang sein, so können Sie diese einfach mit einer Schere kürzen.



Nasivent Tube Plus - Simply breathe better!

Nasivent Tube is a high-quality silicone nasal dilator to improve nasal breathing and prevent snoring. With proper use and care, you will enjoy this product for a long time.

Nasivent Tube Plus is inserted into the nose before sleeping. It gently stretches the outer nasal walls and thus facilitates nasal breathing. Improved nasal breathing reduces the tendency to breathe through the mouth and therefore the risk of snoring. A good oxygen supply contributes to a more peaceful and restful sleep.


Nasivent offers a pleasant wearing sensation. Due to its flexibility and softness, as well as the 5 different sizes, Nasivent adapts excellently to the different shapes of the nose. The cones on the top of the tubes improve the hold in the nose.

Areas of use:

For use as a remedy for snoring; to improve nasal breathing; to optimise oxygen supply during sports; for blocked nose; as an alternative to nasal spray

Material: High-quality silicone; BPA-free

Safety note: Do not cut the connecting bar of the tubes! Not suitable for children under 6 years of age.

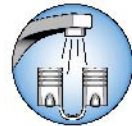

Clean the Nasivent Tubes with soap and water before use.



Insert the Nasivent Tubes completely into the nose, making sure that the retaining pins point upwards.



If the Nasivent tubes are too long, you can simply shorten them with scissors.



Nasivent Tube Plus - ¡Simplemente respire mejor!

Nasivent Tube es un dilatador nasal de silicona de alta calidad para mejorar la respiración nasal y evitar los ronquidos. Con un uso y cuidado adecuados, disfrutará de este producto durante mucho tiempo.

Nasivent Tube Plus se introduce en la nariz antes de dormir. Estira suavemente las paredes exteriores de la nariz, facilitando la respiración nasal. La mejora de la respiración nasal reduce la tendencia a respirar por la boca y, por tanto, el riesgo de roncar. Un buen suministro de oxígeno contribuye a un sueño más tranquilo y reparador.

Nasivent ofrece una agradable sensación de uso. Gracias a su flexibilidad y suavidad, así como a los 5 tamaños diferentes, Nasivent se adapta excelentemente a las diferentes formas de la nariz. Los conos en la parte superior de los tubos mejoran la sujeción en la nariz.

Áreas de uso:

Para su uso como remedio para los ronquidos; para mejorar la respiración nasal; para optimizar la oxigenación durante el deporte; para la congestión nasal; como alternativa al spray nasal

Material: Silicona de alta calidad; sin BPA

Nota de seguridad: ¡No cortar la barra de unión de los tubos! No apto para niños menores de 6 años.



Limpie los tubos Nasivent con agua y jabón antes de usarlos.



Inserte los tubos Nasivent completamente en la nariz, asegurándose de que los pasadores de retención apunten hacia arriba.



If the Nasivent tubes are too long, you can simply shorten them with scissors.



Nasivent - Respirez mieux, tout simplement !

Nasivent Tube est un dilataateur nasal en silicone de haute qualité qui améliore la respiration nasale et prévient le ronflement. Avec une utilisation et un entretien appropriés, vous profiterez longtemps de ce produit.

Le Nasivent Tube Plus est inséré dans le nez avant de dormir. Il étire doucement les parois extérieures du nez, ce qui permet de respirer plus facilement par le nez. L'amélioration de la respiration nasale réduit la tendance à respirer par la bouche et donc le risque de ronflement. Un bon apport en oxygène contribue à un sommeil plus paisible et plus reposant.

Nasivent offre une agréable sensation de port. Grâce à sa souplesse et à sa douceur, ainsi qu'à ses 5 tailles différentes, Nasivent s'adapte parfaitement aux différentes formes du nez. Les cônes sur le dessus des tubes améliorent la tenue dans le nez.

Domaines d'utilisation :

À utiliser comme remède contre le ronflement ; pour améliorer la respiration nasale ; pour optimiser l'oxygénation pendant le sport ; pour la congestion nasale; comme alternative au spray nasal

Matériau: silicone de haute qualité, sans BPA

Consigne de sécurité : ne pas couper la barre de connexion des tubes! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.



Nettoyez les tubes Nasivent avec de l'eau et du savon avant de les utiliser.



Insérez les tubes Nasivent complètement dans le nez, en vous assurant que les goupilles de retenue sont dirigées vers le haut.



Si les tubes Nasivent sont trop longs, vous pouvez simplement les raccourcir avec des ciseaux.



Nasivent Tube Plus - Semplicemente respira meglio!

Nasivent Tube è un dilatatore nasale in silicone di alta qualità per migliorare la respirazione nasale e prevenire il russamento. Con un uso e una cura adeguati, potrete godere di questo prodotto per molto tempo.

Nasivent Tube Plus viene inserito nel naso prima di dormire. Allunga delicatamente le pareti esterne del naso, rendendo più facile la respirazione attraverso il naso. Una migliore respirazione nasale riduce la tendenza a respirare attraverso la bocca e quindi il rischio di russare. Un buon apporto di ossigeno contribuisce a un sonno più tranquillo e riposante.

Nasivent offre una piacevole sensazione di indossare. Grazie alla flessibilità e alla morbidezza, nonché alle 5 diverse misure, Nasivent si adatta in modo eccellente alle diverse forme del naso. I coni in cima ai tubi migliorano la tenuta nel naso.

Aree di utilizzo:

Da usare come rimedio per il russare; per migliorare la respirazione nasale; per ottimizzare l'ossigenazione durante lo sport; per la congestione nasale; come alternativa allo spray nasale

Materiale: silicone di alta qualità; senza BPA

Nota di sicurezza: non tagliare la barra di collegamento dei tubi! Non adatto a bambini di età inferiore a 6 anni.



Pulire i tubi nasali con acqua e sapone prima dell'uso..



Inserire completamente i tubi Nasivent nel naso, assicurandosi che i perni di fissaggio siano rivolti verso l'alto.



Als de Nasiventbuisjes te lang zijn, kan je ze gewoon inkorten met een schaar.



Nasivent Tube Plus - Sadece daha iyi nefes al!

Nasivent Tube Plus, nazal solunum ve horlamayı geliştirmek için en son neslin burun tüpüdür. Uygun uygulama ve özenle, bu ürünün uzunluğundaki tadını çıkaracaksınız.

Uyumadan önce nazil tüp burnuna tanıtıldı. Nazikçe, dış burun duvarlarını uzatır ve böylece burun solunumunu kolaylaştırır. Geliştirilmiş burun solunumu, ağızdan nefes alma eğilimini azaltır ve böylece riski holurur. İyi bir oksijen kaynağı sessizce ve daha rahatlatıcı uyumaya yardımcı olur.

Nasivent giymek hoş. Esneklik ve yumuşaklık nedeniyle, 5 farklı boyutta, Nasivent farklı nazal şekillere mükemmel uyum sağlar. Tüplerin üstündeki pimler burundaki durmayı iyileştirir.

Uygulama kapsamı:

Horlama için bir çare olarak; burun solunumunu iyileştirmek için; spor sırasında oksijen tedarikini optimize etmek için; burun tıkanıklığı için; burun spreyine alternatif olarak kullanılır.

Malzeme: yüksek kaliteli silikon; BPA içermez



Su ve sabunla kullanmadan önce nazaver tüplerini temizleyin.



Nasivent tüplerini tamamen burnuna yerleştirin ve tutma pinlerinin yukarı doğru geldiğinden emin olun.



Eğer nazil tüpler çok uzun olmalıdır, böylece onları makasla kolayca kesebilirsiniz.