




Smart Visual Ohrenpinsel Bedienungsanleitung




① Suchen Sie die JesHome APP im Apple Store / Google Play / App Store oder scannen Sie den QR-Code, um direkt herunterzuladen und zu installieren.

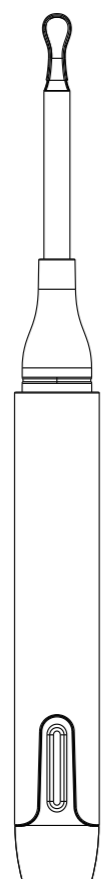


② Die Power-Taste gedrückt halten, um hochzufahren.




③ Die APP öffnen und auf 'Hinzufügen' klicken.



④ Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Ohrenpinsel-Wi-Fi, wählen Sie 'JesHome-P5-XXXX' aus und verbinden Sie sich.

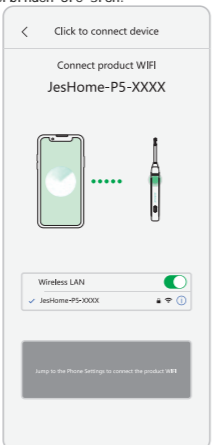

⑤ Zurück zur APP, klicken Sie auf 'Verwenden starten'.

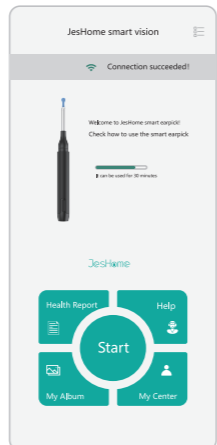

Produktparameter

Produktname: Smart Visual Earpick	Netzwerkstandard: IEEE 802.11 b/g/n
Produktmodell: P5	Betriebsfrequenz: 2.4GHz
Umgebungstemperatur: -10° C ~ +50° C	Bildsensor: CMOS
Batteriekapazität: 250mAh	Linse Durchmesser: 3,5mm
Ladungszeit: 60 Minuten	Bildübertragungspixel: 10MP
Betriebszeit: 90 Minuten	Bildübertragungsrate: 30FPS
Arbeitsspannung: 3.7V ~ 4.2V	Schwerkraftsensor: 3-Achsen G-Sensor
Eingangsspannung: 5V = 1A	Produktoberfläche: Ø14mm * H150mm
Ausgangsleistung: 0.5W	Produktgewicht: 16,2g
	Ladeanschluss: Type-C

Produktzubehör

Hauptgerät	1	Ohrenschmalz-Clip	1
Type-C-Ladekabel	1	Ohrenöffelkopf	1
Bedienungsanleitung	1	Ohrenschaufelkopf	1
Zubehör-Eimer	1	Ohrenhakenkopf	1
Silikon-Earpick-Hülle	6		

Anleitung zur Unterstützung von Mobiltelefonsystemen

1. Für Android-Telefone: Unterstützung ab Version 5.0.
2. Für iPhone: Unterstützung ab Version 10.0.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Es wird empfohlen, die Linse sorgfältig mit einem Wattestäbchen zu reinigen.
2. Bitte überprüfen Sie die Umgebung vor der Benutzung, verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, in denen es mit sich bewegenden Personen oder Tieren in Kontakt kommen könnte, nicht in einem sich bewegenden Fahrzeug oder in anderen instabilen Umgebungen. Halten Sie Ihren Körper bei der Benutzung stabil.
3. Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
4. Um Verletzungen zu vermeiden, ist es Kindern untersagt, dieses Produkt allein zu verwenden.
5. Legen Sie das Gerät nicht für lange Zeit in einer feuchten Umgebung auf, oder tauchen Sie das gesamte Gerät in Flüssigkeit.
6. Das Produkt enthält einen eingebauten Polymerbatterie, die einmal im Monat aufgeladen werden muss, wenn das Produkt nicht häufig verwendet wird.
7. Bitte laden Sie das Gerät mit einem 5V-Ladegerät. Es ist verboten, das Gerät im Ladestatus zu verwenden.
8. Das Produkt sollte nicht direkt Sonnenlicht ausgesetzt werden.
9. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
10. Während der Benutzung wird die Temperatur des Produkts leicht ansteigen (bis zu etwa 35°), was normal ist.
11. Reinigen Sie das Produkt nicht mit Wasser, um Schäden zu vermeiden.

Fehlerbehebung

S/N	Fehler	Lösung
1	Keine Reaktion nach dem Start	Bitte mit dem gelieferten Ladekabel laden. Die Ladedauer beträgt 60 Minuten
2	Kamera-Indikator leuchtet nicht auf	Herunterfahren und neu starten oder neu mit Wi-Fi verbinden
3	APP crasht	Die bestehende APP deinstallieren und den QR-Code erneut scannen, um die neueste Version der APP zu installieren
4	Silikon-Hülle ist lose	Silikon-Hülle entfernen und den Ohrenpinsel langsam neu einsetzen, oder die Silikon-Hülle ersetzen
5	Blaues Indikator blinkt schnell	Niedriger Akku, bitte das Produkt mit dem gelieferten Ladekabel laden
6	Unstabile Verbindung es ist leicht, sich zu trennen oder zu einfrieren bei der Benutzung	Den Ohrenpinsel neu starten und mit der APP neu verbinden
7	Nach der Verbindung des Produkts mit der APP kann das Bild nicht normal angezeigt werden	Das Telefon vom WiFi des Ohrenpinsels trennen, den Ohrenpinsel neu starten und mit WiFi neu verbinden

Wenn die oben genannten Maßnahmen das Problem nicht lösen, bitte unseren Kundenservice-Mitarbeiter kontaktieren. Wir werden Ihnen im APP-Personlichen Center-FAQ weitere praktische Lösungen anbieten.

Komponentenname	Eingeschränkte Stoffe und ihre chemischen Symbole					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Leiterplatte	○	○	○	○	○	○
Gehäuse	○	○	○	○	○	○
Drähte	○	○	○	○	○	○
Kunststoff-Silikon-Zubehör	○	○	○	○	○	○

Hinweis: "○" bedeutet, dass der prozentuale Gehalt dieses gefährlichen Stoffes das Standard nicht überschreitet.