



## USER MANUAL

### Verwendungszweck

Vielen Dank für den Kauf unseres Hörgeräts

Verstärker Wenn Sie es schwierig finden, sehr zu hören

Nun, von anderen kann Ihnen ein Hörverstärker helfen

Gewinnen Sie Ihr Gehör zurück, damit Sie das Leben leben können, das Sie sind gewöhnt an

Das Tragen eines Hörverstärkers bedeutet Neuentdeckung

das Vergnügen, mit Freunden und Familie zusammenzukommen


Sich bei der Arbeit sicherer fühlen und Spaß haben

Filme, Musik und Fernsehprogramme.

### 01/Specification

- 1、Max sound output:  $125\pm 4\text{dB}$
- 2、Sound gain:  $\geq 30\text{dB}$
- 3、Total harmonic wave distortion:  $\leq 10\%$
- 4、Frequency range:  $450\text{Hz}\sim 4000\text{Hz}$
- 5、Input noise:  $\leq 30\text{dB}$
- 6、Voltage: D.C.3.7V
- 7.Current:  $\leq 2\text{mA}$

### 02/Device Structure

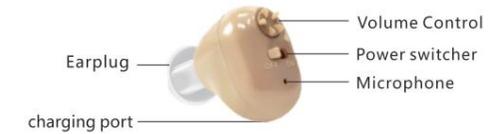

Label, label interpretation:

"N" --- is power on.  
"O" --- is power off.

" " --- is volume grade.

### 03/Charger Structure



- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| ① charge holder      | ③ Charging interface |
| ② Charging indicator |                      |

### 04/Replace The Earbuds

Wählen Sie die richtige Größe für den Benutzer und schließen Sie dann das Softgel an den Haupthörverstärker an, der mit Ohrstöpseln in vier verschiedenen Größen ausgestattet ist.



Notiz:

Bitte versuchen Sie, die passenden Ohrhörer zu finden fest im Ohr, wenn das Pfeifen zu hören ist passiert

### 05/Replace Earplugs

Achten Sie beim Anbringen eines Ohrhörers darauf, dass Sie ihn mit so viel Kraft drücken, dass Sie ein Knacken oder Klicken spüren wenn es eine Verbindung herstellt. Überprüfen Sie, ob das Ohr sicher ist

Der Ohrhörer wird nicht flach gegen den Hörverstärker gedrückt, da dies den Schallempfänger blockieren kann. Der Ohrhörer sitzt fest und rastet ein, lässt aber immer noch etwas Platz zwischen der Spitze des Hörverstärkers

und der Ohrhörer selbst.



### 06/Volume Control

Stellen Sie die Lautstärke mit einem Schraubenzieher ein:

1. Erhöhen Sie die Lautstärke durch Drehen im Uhrzeigersinn
2. Drehen Sie die Lautstärke gegen den Uhrzeigersinn herunter


Hinweis: Halten Sie die Lautstärke beim ersten Tragen auf einem niedrigen Pegel. Anschließend können Sie die Lautstärke langsam erhöhen, um den besten Lautstärkepegel zu finden



## 07/Power Switch

Um Ihr Gerät auszuschalten, betätigen Sie den Netzschalter an der Seite mit der Aufschrift „O.“

Um Ihr Gerät einzuschalten, betätigen Sie den Netzschalter an der Seite mit der Aufschrift „N.“

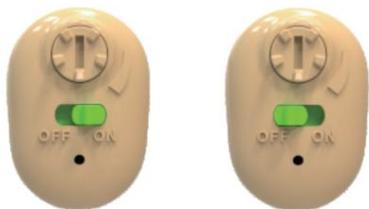

ON

OFF

## 08/Inserting Into Ear

Das Gerät verfügt nicht über eine rechte oder linke Seite, sondern ist austauschbar. Halten Sie den Hörverstärker einfach aufrecht und führen Sie ihn dann so tief wie möglich ins Ohr ein.



## 09/Charging The Hearing Device

1. Wenn die Gerätelautstärke heruntergeregelt ist oder nicht funktioniert gut, möglicherweise ist der Stromverbrauch niedrig. Bitte laden Sie rechtzeitig auf.
2. Bitte schalten Sie das Gerät vor dem Laden auf „AUS“, stecken Sie das Gerät in das Ladegerät (Abbildung 1,2) und schließen Sie die Ladebox.
3. Stellen Sie sicher, dass das Hauptgerät im Gerät platziert ist Ladebox (Abbildung 2)



## 10/Charging The Hearing Device

1. Schließen Sie die kleinere USB-Seite an die Ladebox an (Abbildung 3), schließen Sie das Netzteil an und schließen Sie es an eine 220-V-Steckdose an.
2. Schalten Sie das blaue Licht ein, wenn die Ladebox an die Stromversorgung angeschlossen ist (Abbildung 4).
3. Schalten Sie beim Laden das rote Licht ein (Abbildung 5).
4. Schalten Sie das grüne Licht ein, wenn es voll ist (Abbildung 6).



## 11/Cleaning Hearing Device

Nehmen Sie die Reinigungsbürste aus dem Zubehör Kasten. Entfernen Sie die Ohrmuschel von Ihrem Gerät. Benutzen Sie die Reinigungsbürste, um Wachs, Schmutz, oder jegliche Rückstände sowohl von der Ohrmuschel als auch vom Gerät selbst. Die Ohrmuschel darf unterfahren werden warmes Wasser, aber achten Sie darauf, dass die Ohrmuscheln sauber sind vollständig trocknen, bevor Sie es wieder anbringen Gerät.



## 12/Remove The Hearing Device

Halten Sie den Hörverstärker mit Daumen und Zeigefinger des Finger und ziehen Sie ihn vorsichtig aus dem Gehörgang.



1. Während Sie den Hörverstärker entfernen, öffnen Sie und Schließen Sie den Mund und ziehen Sie die Ohrmuschel mit dem zurück Andererseits erleichtert dies das Entfernen des Gehörs Verstärker.
2. Das Tragen und Entfernen eines Hörverstärkers erfordert viel Aufwand üben. Hörverstärker sind sehr empfindlich Gegenstände. Ein Herunterfallen kann zu Schäden am Hörverstärker führen Daher ist es am besten, den Hörverstärker in einem zu tragen und zu entfernen weiche Umgebung auf der Oberfläche.

## 13/Important Note

1. Bitte verwenden Sie den Hörverstärker nicht bei einem hohe Lautstärke für lange Zeit. Es wird Schaden anrichten Ihr Gehör.
2. Bitte warten Sie das Produkt ständig um den Ohrstöpsel und das Mikrofon zu vermeiden Öffnung wird durch äußere Gegenstände blockiert.
3. Bitte nicht beim Duschen oder Schwimmen verwenden. Mining, Regen oder nasse Umgebung, bitte nicht Setzen Sie den Hörverstärker nicht der Sonne aus Gehen Sie nicht in die Nähe eines Ofens oder einer anderen Wärmequelle.
4. Bitte schützen Sie den Hörverstärker sorgfältig. Liw und vermeiden Sie es, es auf den Boden fallen zu lassen.

5. Bitte verwenden Sie den angegebenen Akku und das angegebene Ladegerät exklusiv für den Hörverstärker entwickelt.
6. Zerlegen oder modifizieren Sie das Gehör nicht Verstärker.
7. Halten Sie den Hörverstärker von Ihnen fern Kinder