


Elektrische Brustpumpe zum Anziehen

BENUTZERHANDBUCH

QY-102



Produkt-Einführung >>>

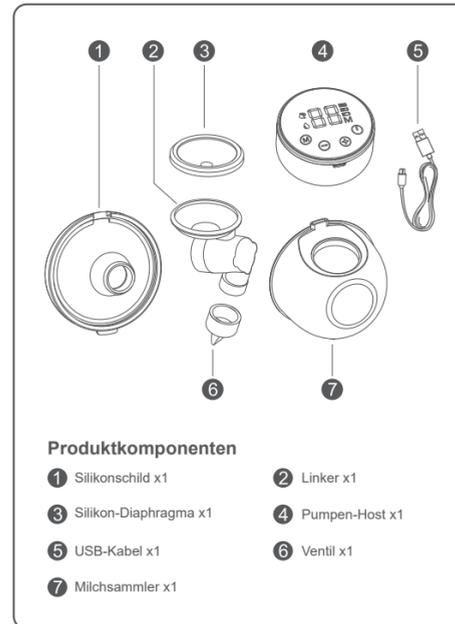


Produktkomponenten

- 1 Silikonschild x1
- 2 Linker x1
- 3 Silikon-Diaphragma x1
- 4 Pumpen-Host x1
- 5 USB-Kabel x1
- 6 Ventil x1
- 7 Milchsammler x1

-01-

Bedienfeld >>>

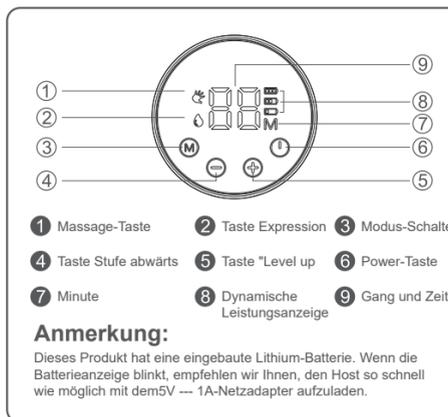

- 1 Massage-Taste
- 2 Taste Expression
- 3 Modus-Schalter
- 4 Taste Stufe abwärts
- 5 Taste "Level up"
- 6 Power-Taste
- 7 Minute
- 8 Dynamische Leistungsanzeige
- 9 Gang und Zeit

Anmerkung:

Dieses Produkt hat eine eingebaute Lithium-Batterie. Wenn die Batterieanzeige blinkt, empfehlen wir Ihnen, den Host so schnell wie möglich mit dem 5V -- 1A-Netzadapter aufzuladen.

Reinigung und Desinfektion >>>

- Vor dem ersten Gebrauch der Milchpumpe und vor jedem weiteren Gebrauch müssen Sie alle Teile, die mit der Muttermilch in Berührung kommen, abnehmen und reinigen.
- Für die Reinigung wird Trinkwasser empfohlen.
- Um Bakterien zu vermeiden, entfernen und reinigen Sie bitte alle Teile nach jedem Gebrauch.

-02-

Warnung >>>

- Bitte achten Sie darauf, dass das Hauptgerät und das USB-Ladekabel nicht mit Wasser in Berührung kommen. Sie können sie mit einem weichen Tuch reinigen.
- Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Entenschnabelventil und die Silikonmembran reinigen, das Gerät wird nicht richtig funktionieren, wenn eines der Teile gebrochen ist.
- Reinigen Sie das Entenschnabelventil, reiben Sie es nicht, führen Sie nichts ein, sonst kann es Schäden verursachen.

Informationen zur Batterie >>>

Lichtperle blinkend	Schwache Batterie, bitte aufladen
Drei Leuchtperlen blinken	Aufladen
Licht an	Vollständig aufgeladen

Note: The maximum charging time is up to 24 hours, otherwise the battery could be damaged.

Zusammenbau >>>

Gehen Sie wie folgt vor, um die elektrische Brustklammer zusammenzubauen


- Legen Sie die Silikonmembran in das T-Stück und drücken Sie mit der Hand, so dass die Ränder gut befestigt sind und die Membran vollständig verschlossen bleibt.




-03-

Zusammenbau >>>

- Setzen Sie das Entenschnabelventil in den Boden des T-Stücks ein und achten Sie darauf, dass es in der richtigen Richtung belastet wird.

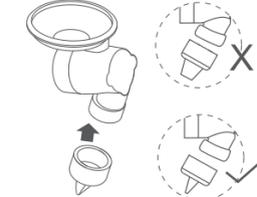


- Setzen Sie das zusammengebaute T-Stück in den Auffangbehälter ein und richten Sie das "Ohrtel des T-Stücks mit dem Auffangbehälter aus. Drücken Sie das Scheibenteil des T-Stücks mit beiden Händen, um die Kante fest zu befestigen, um die Sicherheit und Abdichtung zu gewährleisten.

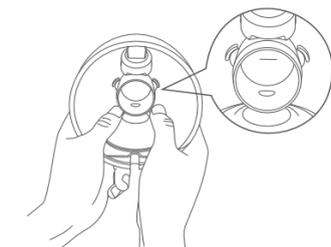


-04-

Zusammenbau >>>

- Setzen Sie das Silikon-Horn auf den BH und richten Sie die Führungsrille am Horn auf die Führungsrille am BH aus.

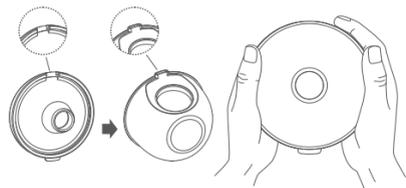


- Drücken Sie die Hauptmaschine der Milchpumpe auf den Auffang-BH, um sicherzugehen, dass sie mit dem Auffang-BH an der richtigen Stelle sitzt.

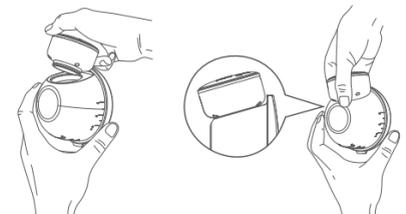

-05-

Zusammenbau >>>

- Lösen Sie den Staubstecker und schließen Sie das USB-Ladekabel an den Host an.

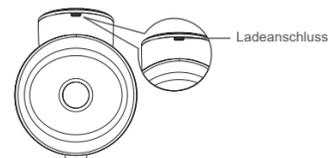

Zur Erinnerung:

Der Netzadapter ist ein marktübliches Standardzubehör. Dieses Produkt ist nicht erhältlich. Sie können es separat kaufen, wenn Sie es brauchen. Poweradapter Spezifikation: 5V-- 1A

Verwendung der elektrischen Milchpumpe >>>

- Halten Sie das Silikonhorn der Milchpumpe nah an der Brust ohne Lücken und stellen Sie sicher, dass Ihre Brustwarze sauber ist. Center, halten Sie es aufrecht, achten Sie darauf, die Position des Produkts und der Brust nicht zu verzerren, andernfalls wird die Milchpumpe beschädigt werden. Es wird nicht gesaugt werden.




-06-

Verwendung der elektrischen Milchpumpe >>>

- Drücken Sie vorsichtig die Einschalttaste "I", um die Milchpumpe zu starten.



- Sie können den Massage-Modus durch sanftes Drücken der Taste "M" wählen. Es gibt 9 Gänge in diesem Modus. Sie können durch Drücken "Up" und "Down" leicht, um die Absaugung zu wählen, die Sie am bequemsten finden. Am Beginn der postpartalen Periode, die Patienten werertransfused. Der Milchgang ist nicht leicht zu leiten, so kann es die Brust durch diesen Modus zu stimulieren und effektiv fördern diese Sekretion von Muttermilch.

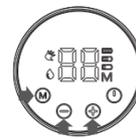


- "Drücken Sie kurz die Taste "M", um zwischen dem Massagemodus, dem Brustsaugmodus und dem gemischten Modus (Massagemodus) umzuschalten. Es gibt 3 Modi und jeder hat 9 Gänge. Hinweis: Gemischter Modus bedeutet, dass zwei Modusymbole gleichzeitig leuchten.

-07-

Verwendung der elektrischen Milchpumpe >>>

- Sie können den Saugmodus auswählen, indem Sie leicht auf die Taste "M" drücken. Es gibt neun Gänge in diesem Modus. Sie können durch Drücken "Up" und "Down" leicht, um die Saugkraft, die Sie bequem macht auszuwählen. Frühe postpartale Fütterung/Während der Zeit der Laktation, die Brust ist anfällig für Schmerzen, Klumpen und andere Brust-Beschwerden zu erweitern, und die Verwendung dieses Modus kann die Brustkrebs zu lindern. Das Gehäuse Problem.

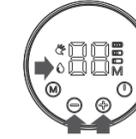

- Automatische Hochschaltfunktion: Standardmassagemodus nach dem Einschalten, automatisches Hochschalten nach jeweils 90 Sekunden, Anhalten des automatischen Hochschaltens bis zum fünften Gang.

- Nach dem Saugen, drücken Sie die Power-Taste "I", um das Gerät auszuschalten, und entfernen Sie es dann von der Brust. Entfernen Sie die Brustpumpe aus dem Herzen.



-08-

Aufbewahrung der Muttermilch >>>

Vorsicht

- die Muttermilch niemals wieder einfrieren.
- Mischen Sie keine frische Muttermilch mit bereits gefrorener Milch.
- verbleibende Milch am Ende der Fütterung immer wegwerfen

Hinweis

Bewahren Sie nur Muttermilch auf, die mit einer sterilisierten Milchpumpe gewonnen wurde.

Aufbewahrung der Muttermilch

Die abgepumpte Milch kann in einem sauberen und sterilisierten Milchaufbewahrungsbeutel oder in einer Flasche mit Dichtungsring aufbewahrt und sofort gekühlt oder eingefroren werden.

Vorsicht

Die gelutschte Milch kann 48 Stunden lang gekühlt (im Kühlschrank) oder eingefroren werden. Nach dem Einfrieren für drei Monate die Flasche oder den Beutel mit Datum und Uhrzeit des Lutschens beschriften. Antworten Die Milch zuerst essen.

Auftauen von Muttermilch

Tauen Sie gefrorene Muttermilch über Nacht im Kühlschrank auf. Im Notfall können Sie Ihre Muttermilch in einer Schüssel mit heißem Wasser auftauen. Nach dem Auftauen sollte die Muttermilch innerhalb von 24 Stunden verzehrt werden. Zum Erwärmen der Muttermilch stellen Sie die Flasche aufrecht in eine Schüssel mit heißem Wasser oder geben Sie Milch in die Flasche und Nahrung.

Warnung

- denken Sie daran!!! Überprüfen Sie unbedingt die Temperatur der Muttermilch, bevor Sie Ihr Baby füttern.
- Erwärmen Sie Muttermilch nicht in der Mikrowelle, da dadurch wichtige Nährstoffe und Antikörper zerstört werden können.
- Außerdem kann es durch ungleichmäßige Erwärmung zu einer lokalen Überhitzung der Flüssigkeit kommen, die zu Verbrühungen führen kann.
- Tauchen Sie die Milchvorratsflasche zum Erhitzen nicht in kochendes Wasser, damit sie nicht reißt oder bricht.

-09-